
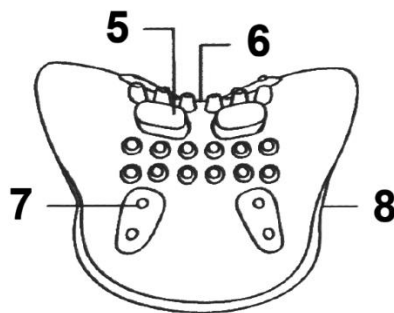




# HU: MEGANECK – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

## Az alkatrészek és a készülék részeinek leírása

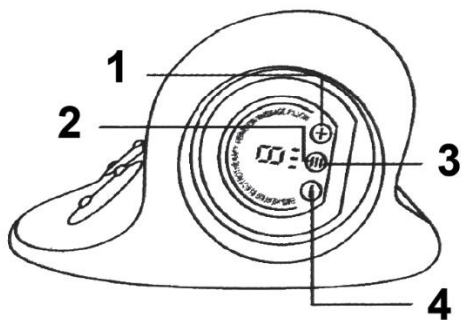

1. gomb (Növelés)
2. EMS / Fűtés / Vibráció – funkciógombok
3. Bekapcsológomb (ON/OFF)
4. – gomb (Csökkentés)
5. Fűtő EMS párna
6. Masszázscsomópontok
7. Mágneses betétek
8. USB Type-C port
9. USB Type-C töltőkábel

## Töltési mód

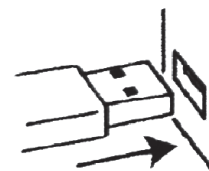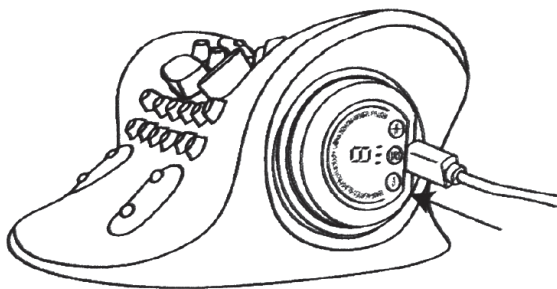


1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a készülék USB Type-C portjához.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy USB adapterhez vagy power bankhoz. Az USB adaptert vagy a power bankot külön kell biztosítani. 5 V / 1 A vagy annál nagyobb tápellátás ajánlott.
3. Töltés közben a piros jelzőfény villog. Amikor a készülék teljesen fel van töltve, a zöld jelzőfény folyamatosan világít.

## A készülék be- és kikapcsolása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.

Bekapcsolás után a készülék a távirányítóval is működtethető, ahol az M gomb a funkciók váltására szolgál.

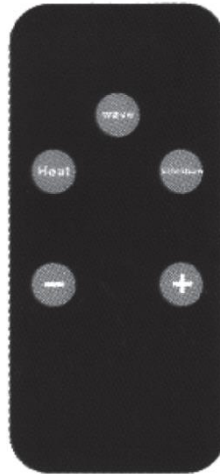

---

## A távirányító gombjai

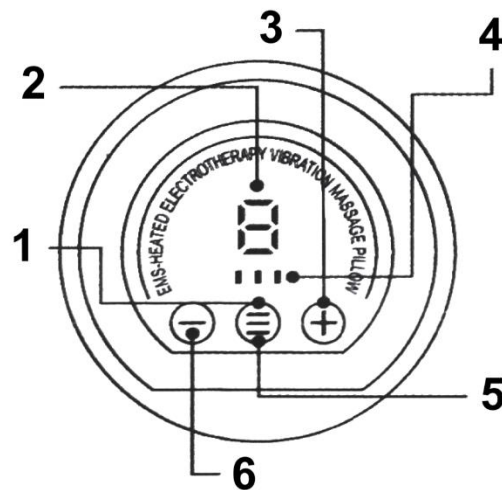

1. EMS / Fűtés / Vibráció – funkciógomb
  2. Intenzitásszint-jelző
  3. gomb (Növelés)
  4. Jelzőfény
  5. Bekapcsológomb (ON/OFF)
  6. – gomb (Csökkentés)
-

## Használat

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Az üzemmód jelzőfénye az első pozícióban jelenik meg. Nyomja meg a növelés (+) gombot. Amikor az intenzitási területen az 1-es szint jelenik meg, az EMS funkció aktiválódik. Ezután a + vagy – gombokkal beállíthatja az EMS intenzitását. Összesen 6 intenzitásszint áll rendelkezésre. Amikor az intenzitáskijelző 0-t mutat, az EMS funkció ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg ismét a bekapcsológombot. Amikor az üzemmód jelzőfénye a második pozícióba lép, a készülék fűtési módba kapcsol. Amikor az intenzitási területen az 1-es szint jelenik meg, a fűtési funkció aktiválódik. 3 fűtési szint áll rendelkezésre.  
**Figyelmeztetés:** Válassza ki az igényeinek megfelelő szintet. Kerülje a túlzott hőt az égési sérülések megelőzése érdekében.
3. Nyomja meg ismét a bekapcsológombot. Amikor az üzemmód jelzőfénye a harmadik pozícióba lép, a vibrációs mód aktiválódik. Amikor az 1-es szint megjelenik, a vibrációs funkció elindul. 3 vibrációs szint áll rendelkezésre.
4. A készülék 15 perc működés után automatikusan kikapcsol.
5. Az EMS, a fűtés és a vibráció funkciók egyszerre vagy külön-külön is használhatók.

---

### Fontos megjegyzések a fűtési funkcióhoz

Ne használja a fűtési funkciót folyamatosan hosszabb ideig. Még viszonylag alacsony hőmérsékleten is (40–50 °C) a bőrrel való hosszan tartó érintkezés alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat, még akkor is, ha nem érez azonnali kellemetlenséget vagy fájdalmat.

Ne használja az EMS funkciót vízzel kapcsolatos tevékenységek közben (például főzés, mosás vagy háziállatok kezelése során).

---

### Fontos figyelmeztetés

Ez a termék nem orvostechnikai eszköz, és nem szolgál orvosi kezelésre.


---

### Használati útmutató

Állítsa be a készüléket úgy, hogy a fűtött EMS párnák a nyak kívánt területére kerüljenek. Ahogy az ábrán látható, a készülék mindkét irányban használható. Próbálja fel a nyakára, és állítsa a legkényelmesebb pozícióba.

Ez a termék kifejezetten nyakon történő használatra készült. Ne használja a test más részein, például a karokon vagy a lábakon.

Az EMS funkció nedvességen keresztül továbbítja a stimulációt. Használat előtt enyhén nedvesítse meg vízzel vagy langyos vízzel a nyak azon területét, ahol a párnák érintkezni fognak a bőrrel.

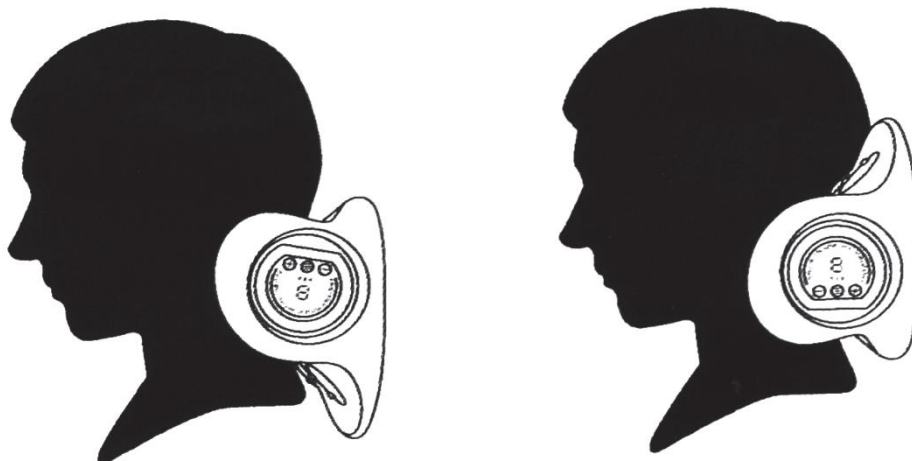

---

## Karbantartás

Minden használat után tisztítsa meg és tartsa karban a fűtő EMS párnákat.

- Csavarja ki a vízbe áztatott ruhát, és törölje át a párnákat, amíg még enyhén melegek.
- Gondosan tisztítsa meg az EMS párnákat.
- Ha szennyeződés található rajta, használjon meleg vízzel és hígított semleges tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ruhát, csavarja ki, majd törölje át a készülék felületét.
- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne mossa közvetlenül.
- Ne használjon oldószereket, például alkoholt, hígítót vagy benzint, mert ezek meghibásodást, az alkatrészek károsodását vagy elszíneződést okozhatnak.

---

## UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.