



IT: MEGANECK – MANUALE UTENTE

Descrizione dei componenti e delle parti

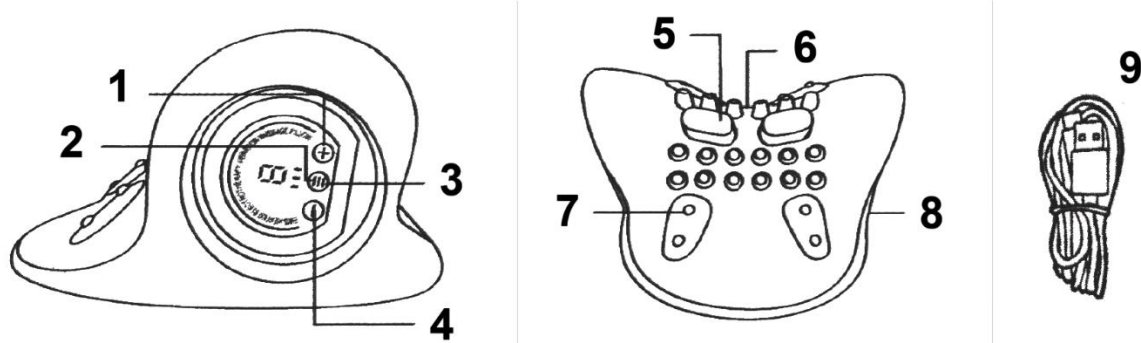

1. + Pulsante (aumento)
2. EMS / riscaldamento / vibrazione – pulsanti funzione
3. Pulsante di accensione (ON/OFF)
4. – Pulsante (diminuzione)
5. Cuscinetto EMS riscaldante
6. Nodi massaggianti
7. Inserti magnetici
8. Porta USB Type-C
9. Cavo di ricarica USB Type-C

Metodo di ricarica

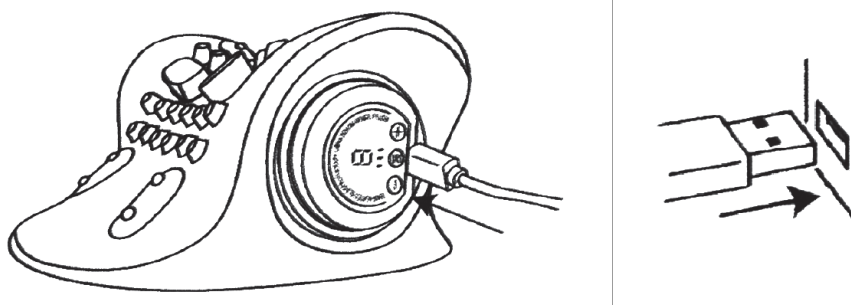


1. Inserire il cavo USB incluso nella porta USB Type-C del dispositivo.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB a un adattatore USB o a un power bank. L'adattatore USB o il power bank devono essere predisposti separatamente. Si consiglia un'alimentazione di 5 V / 1 A o superiore.
3. Durante la ricarica, la spia rossa lampeggia. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia verde rimane accesa.


Accensione e spegnimento del dispositivo

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

Dopo aver acceso il dispositivo, è possibile utilizzarlo anche tramite il telecomando, dove il pulsante M viene utilizzato per cambiare funzione.

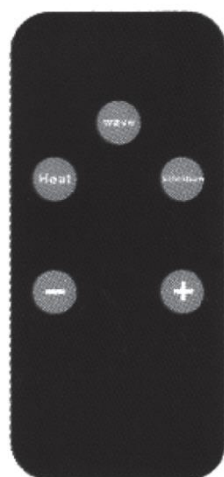

Pulsanti del telecomando

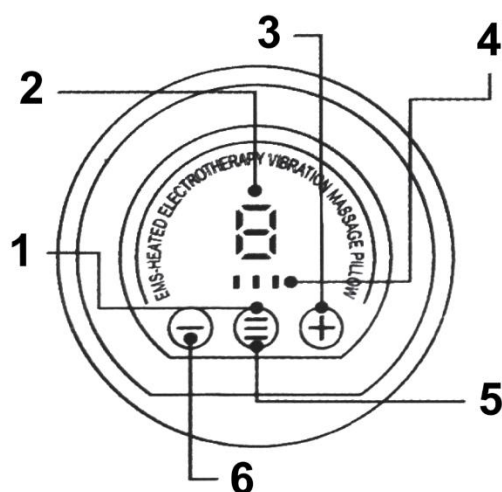

1. EMS / riscaldamento / vibrazione – pulsante funzione
2. Indicatore del livello di intensità
3. + Pulsante (aumento)
4. Spia luminosa
5. Pulsante di accensione (ON/OFF)
6. – Pulsante (diminuzione)

Come si usa

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere il dispositivo. La spia dell'indicatore di modalità apparirà nella prima posizione. Premere il pulsante di aumento (+). Quando nell'area dell'intensità viene visualizzato il livello 1, la funzione EMS è attivata. Successivamente è possibile regolare l'intensità EMS con i pulsanti + o -. Sono disponibili in totale 6 livelli di intensità. Quando il display dell'intensità mostra 0, la funzione EMS è disattivata.
2. Premere nuovamente il pulsante di accensione. Quando la spia dell'indicatore di modalità si sposta nella seconda posizione, il dispositivo entra in modalità riscaldamento. Quando nell'area dell'intensità viene visualizzato il livello 1, la funzione di riscaldamento è attivata. Sono disponibili 3 livelli di riscaldamento.

Avvertenza: scegliere il livello appropriato in base alle proprie esigenze. Evitare un calore eccessivo per prevenire ustioni.

3. Premere nuovamente il pulsante di accensione. Quando la spia dell'indicatore di modalità si sposta nella terza posizione, si attiva la modalità vibrazione. Quando viene visualizzato il livello 1, la funzione di vibrazione si avvia. Sono disponibili 3 livelli di vibrazione.
4. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di funzionamento.
5. Le funzioni EMS, riscaldamento e vibrazione possono essere utilizzate contemporaneamente o separatamente.

Note importanti per la funzione di riscaldamento

Non utilizzare la funzione di riscaldamento in modo continuo per periodi prolungati. Anche a temperature relativamente basse (40–50 °C), il contatto prolungato con la pelle può causare ustioni da bassa temperatura, anche se non si avverte immediatamente fastidio o dolore.

Non utilizzare la funzione EMS durante attività che comportano l'uso di acqua (come cucinare, lavare o maneggiare animali domestici).

Avviso importante


Questo prodotto non è un dispositivo medico e non è destinato a trattamenti medici.

Istruzioni per l'uso

Regolare il dispositivo in modo che i cuscinetti EMS riscaldanti siano posizionati sull'area desiderata del collo. Come mostrato nell'illustrazione, il dispositivo può essere utilizzato in entrambi gli orientamenti. Provarlo sul collo e regolarlo nella posizione più confortevole.

Questo prodotto è progettato specificamente per l'uso sul collo. Non utilizzarlo su altre parti del corpo come braccia o gambe.

La funzione EMS trasmette la stimolazione attraverso l'umidità. Prima dell'uso, inumidire leggermente l'area del collo in cui i cuscinetti entreranno in contatto con la pelle con acqua o acqua tiepida.

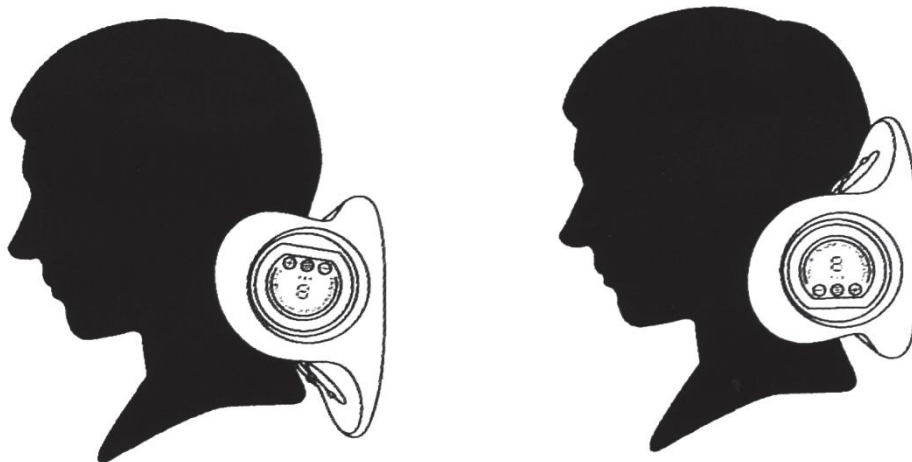

Manutenzione

Pulire ed effettuare la manutenzione dei cuscinetti EMS riscaldanti dopo ogni utilizzo.

- Strizzare un panno imbevuto d'acqua e pulire i cuscinetti mentre sono ancora leggermente caldi.
- Pulire con cura i cuscinetti EMS.
- Se è presente sporco, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua calda e detergente neutro diluito, strizzarlo e pulire la superficie del dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua né lavarlo direttamente.
- Non utilizzare solventi come alcol, diluente o benzene, poiché potrebbero causare malfunzionamenti, danni ai componenti o scolorimento.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.