



LT: MEGANECK – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įrenginio komponentų ir dalių aprašymas

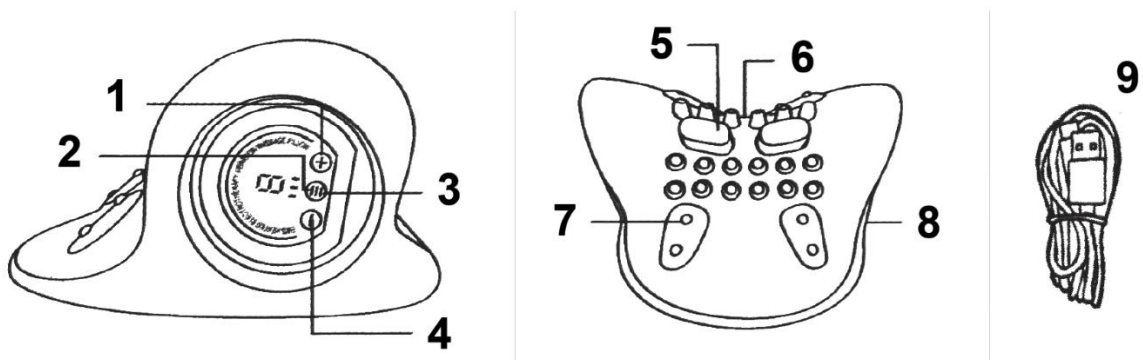

1. Mygtukas + (Didinimas)
2. EMS / Šildymas / Vibracija – funkciniai mygtukai
3. Maitinimo mygtukas (ON/OFF)
4. Mygtukas – (Mažinimas)
5. Šildanti EMS pagalvėlė
6. Masažo mazgai
7. Magnetiniai įdėklai
8. USB Type-C jungtis
9. USB Type-C įkrovimo laidas

Įkrovimo būdas

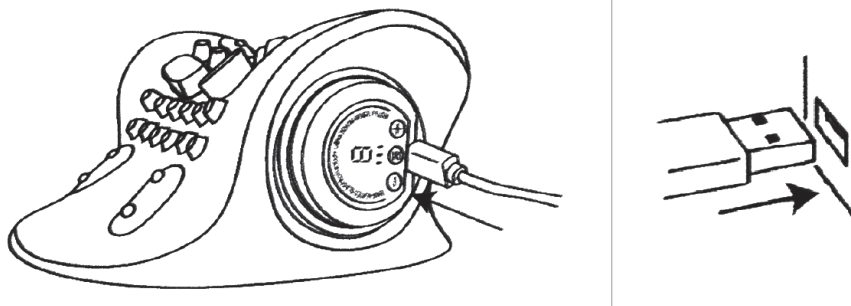


1. Įstatykite pridėdamą USB laidą į įrenginio USB Type-C jungtį.
2. Kitą USB laido galą prijunkite prie USB adapterio arba išorinės baterijos (power bank). USB adapterį arba išorinę bateriją reikia paruošti atskirai. Rekomenduojama naudoti 5 V / 1 A arba didesnį maitinimą.
3. Įkrovimo metu raudonas indikatorius mirksi. Kai įrenginys visiškai įkrautas, žalias indikatorius šviečia nuolat.


Irenginio įjungimas ir išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką apie 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.

Įjungus įrenginį, jį taip pat galima valdyti nuotolinio valdymo pultu, kuriame mygtukas M naudojamas funkcijoms keisti.

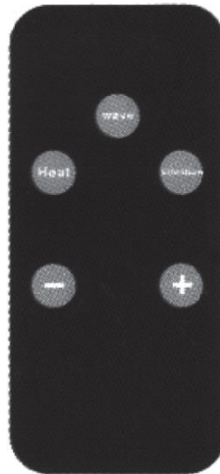

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

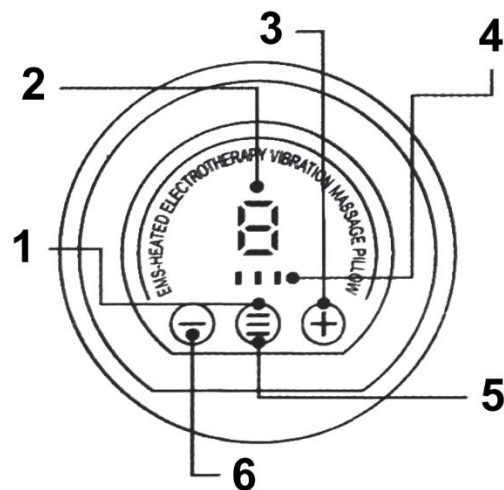

1. EMS / Šildymas / Vibracija – funkcinis mygtukas
2. Intensyvumo lygio indikatorius
3. Mygtukas + (Didinimas)
4. Indikatoriaus lemputė
5. Maitinimo mygtukas (ON/OFF)
6. Mygtukas - (Mažinimas)

Naudojimas

1. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką apie 3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį. Režimo indikatorius pasirodys pirmoje pozicijoje. Paspauskite didinimo mygtuką (+). Kai intensyvumo srityje pasirodys 1 lygis, EMS funkcija bus aktyvuota. Po to galite reguliuoti EMS intensyvumą naudodami + arba – mygtukus. Iš viso yra 6 intensyvumo lygiai. Kai intensyvumo indikatorius rodo 0, EMS funkcija yra išjungta.
2. Dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką. Kai režimo indikatorius pereina į antrą poziciją, įrenginys pereina į šildymo režimą. Kai intensyvumo srityje pasirodo 1 lygis, šildymo funkcija aktyvuojama. Galimi 3 šildymo lygiai.
Įspėjimas: Pasirinkite tinkamą lygį pagal savo poreikius. Venkite per didelio karščio, kad išvengtumėte nudegimų.
3. Dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką. Kai režimo indikatorius pereina į trečią poziciją, aktyvuojamas vibracijos režimas. Kai pasirodo 1 lygis, vibracijos funkcija pradeda veikti. Galimi 3 vibracijos lygiai.
4. Įrenginys automatiškai išsijungia po 15 minučių veikimo.
5. EMS, šildymo ir vibracijos funkcijos gali būti naudojamos kartu arba atskirai.

Svarbios pastabos apie šildymo funkciją

Nenaudokite šildymo funkcijos nepertraukiamai ilgą laiką. Net ir esant santykinai žemai temperatūrai (40–50 °C), ilgalaikis kontaktas su oda gali sukelti žemos temperatūros nudegimus, net jei nejaučiate momentinio diskomforto ar skausmo.

Nenaudokite EMS funkcijos atliekant veiklas, susijusias su vandeniu (pavyzdžiui, gaminant maistą, plaunant ar prižiūrint gyvūnus).

Svarbus įspėjimas


Šis produktas nėra medicininis prietaisas ir nėra skirtas medicininiam gydymui.

Naudojimo instrukcijos

Sureguliuokite įrenginį taip, kad šildančios EMS pagalvėlės būtų ant norimos kaklo vietos. Kaip parodyta paveikslėlyje, įrenginį galima naudoti abiem kryptimis. Uždėkite jį ant kaklo ir sureguliuokite patogiausią padėtį.

Šis produktas skirtas naudoti tik ant kaklo. Nenaudokite jo kitose kūno vietose, pavyzdžiui, ant rankų ar kojų.

EMS funkcija perduoda stimuliaciją per drėgmę. Prieš naudojimą lengvai sudrėkinkite kaklo vietą, kur pagalvėlės liesis su oda, vandeniu arba šiltu vandeniu.

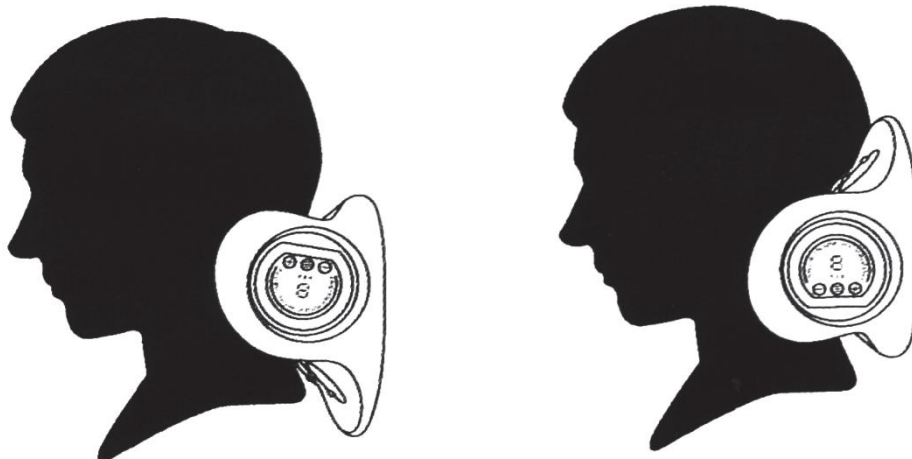

Priežiūra

Po kiekvieno naudojimo nuvalykite ir prižiūrėkite šildančias EMS pagalvėles.

- Išgręžkite vandeniu sudrėkintą šluostę ir nuvalykite pagalvėles, kol jos dar šiek tiek šiltos.
- Kruopščiai nuvalykite EMS pagalvėles.
- Jei yra nešvarumų, naudokite minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą šiltu vandeniu su praskiestu neutraliu valikliu, išgręžkite ją ir nuvalykite įrenginio paviršių.
- Nenardinkite įrenginio į vandenį ir neplaukite jo tiesiogiai.
- Nenaudokite tirpiklių, tokių kaip alkoholis, skiediklis ar benzenas, nes jie gali sukelti gedimus, pažeisti komponentus arba pakeisti spalvą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.