



МК: MEGANECK – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

Опис на компоненти и делови

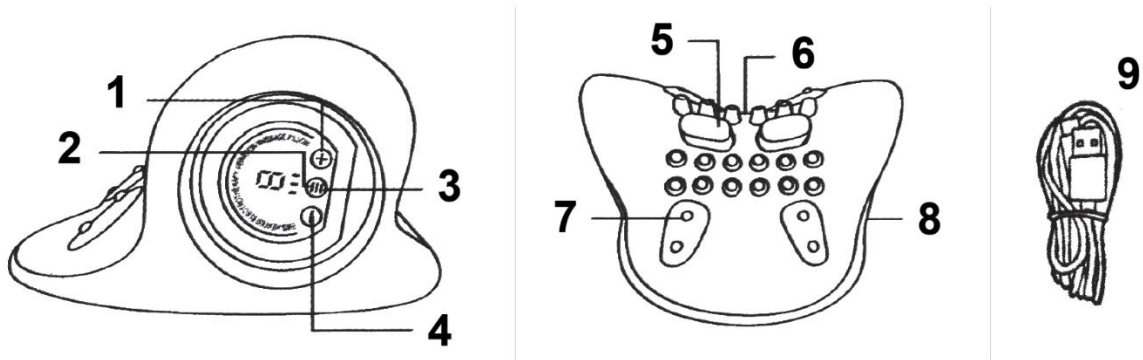

1. + Копче (зголемување)
2. EMS / загревање / вибрации – функционални копчиња
3. Копче за вклучување (ON/OFF)
4. – Копче (намалување)
5. EMS перниче за загревање
6. Масажни јазли
7. Магнетни влошки
8. USB Type-C приклучок
9. USB Type-C кабел за полнење

Начин на полнење

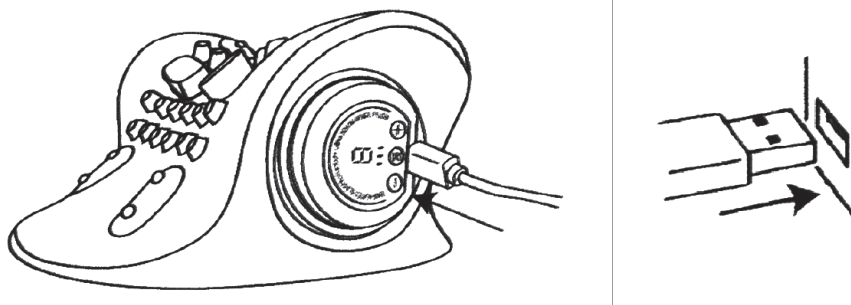


1. Вметнете го приложениот USB кабел во USB Type-C приклучокот на уредот.
2. Поврзете го другиот крај од USB кабелот со USB адаптер или power bank. USB адаптерот или power bank треба да се подготват одделно. Се препорачува напојување од 5 V / 1 A или повеќе.
3. За време на полнењето, црвеното индикаторско светло трепка. Кога уредот е целосно наполнет, зеленото индикаторско светло останува вклучено.


Вклучување и исклучување на уредот

Притиснете и задржете го копчето за вклучување околу 3 секунди за да го вклучите или исклучите уредот.

По вклучувањето на уредот, со него може да се управува и со далечинскиот управувач, каде што копчето M се користи за промена на функциите.

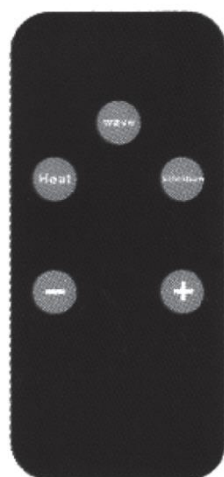

Копчиња на далечинскиот управувач

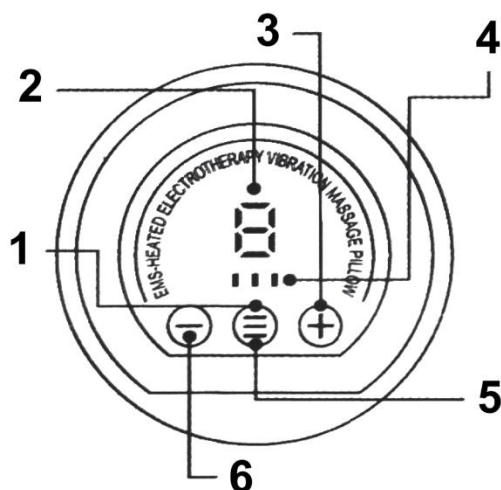

1. EMS / загревање / вибрации – функционално копче
2. Индикатор за ниво на интензитет
3. + Копче (зголемување)
4. Индикаторско светло
5. Копче за вклучување (ON/OFF)
6. – Копче (намалување)

Начин на користење

1. Притиснете и задржете го копчето за вклучување околу 3 секунди за да го вклучите уредот. Индикаторското светло за режим ќе се појави на првата позиција. Притиснете го копчето за зголемување (+). Кога во областа за интензитет е прикажано ниво 1, EMS функцијата е активирана. Потоа можете да го прилагодувате EMS интензитетот со копчињата + или -. Вкупно се достапни 6 нивоа на интензитет. Кога приказот на интензитет покажува 0, EMS функцијата е исклучена.
2. Притиснете го копчето за вклучување повторно. Кога индикаторското светло за режим ќе се помести на втората позиција, уредот влегува во режим на загревање. Кога во областа за интензитет е прикажано ниво 1, функцијата за загревање е активирана. Достапни се 3 нивоа на загревање.

Предупредување: Изберете соодветно ниво според вашите потреби. Избегнувајте прекумерна топлина за да спречите изгореници.

3. Притиснете го копчето за вклучување повторно. Кога индикаторското светло за режим ќе се помести на третата позиција, се активира режимот на вибрации. Кога е прикажано ниво 1, функцијата за вибрации започнува. Достапни се 3 нивоа на вибрации.
4. Уредот автоматски ќе се исклучи по 15 минути работа.
5. Функциите EMS, загревање и вибрации може да се користат истовремено или одделно.

Важни забелешки за функцијата за загревање

Не користете ја функцијата за загревање непрекинато подолг временски период. Дури и при релативно ниски температури (40–50 °C), продолжениот контакт со кожата може да предизвика изгореници од ниска температура, дури и ако не почувствувате веднаш непријатност или болка.

Не користете ја EMS функцијата додека извршувате активности што вклучуваат вода (како што се готвење, миење или ракување со домашни миленици).

Важно известување


Овој производ не е медицински уред и не е наменет за медицински третман.

Упатства за употреба

Прилагодете го уредот така што загреаните EMS перничкиња да бидат поставени на саканата област на вашиот врат. Како што е прикажано на илустрацијата, уредот може да се користи во двете насоки. Пробајте го на вашиот врат и прилагодете го во најудобна положба.

Овој производ е дизајниран специјално за употреба на вратот. Не го користете на други делови од телото како што се рацете или нозете.

EMS функцијата ја пренесува стимулацијата преку влага. Пред употреба, малку навлажнете ја областа на вратот каде што перничкињата ќе бидат во контакт со кожата, со вода или млака вода.

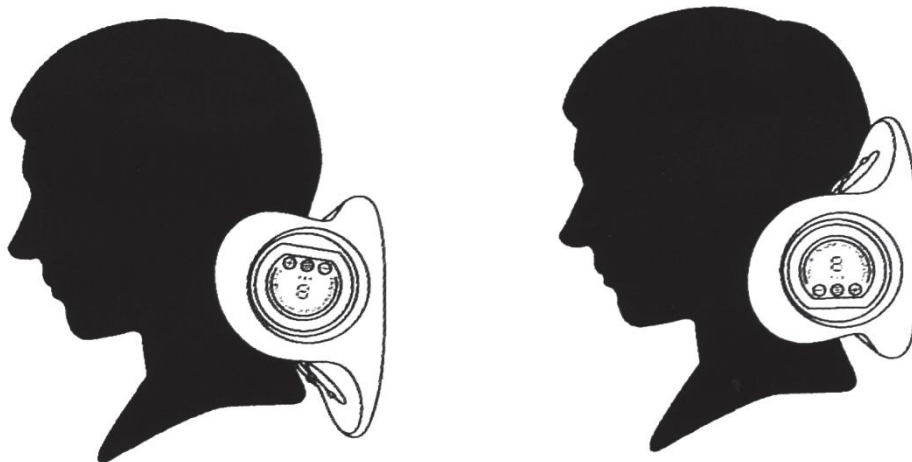

Одржување

Исчистете ги и одржувајте ги EMS перничњата за загревање по секоја употреба.

- Исцедете крпа натопена во вода и избришете ги перничњата додека се уште малку топли.
- Внимателно исчистете ги EMS перничњата.
- Ако има нечистотија, користете мека крпа лесно натопена во топла вода со разреден неутрален детергент, исцедете ја и избришете ја површината на уредот.
- Не го потопувајте уредот во вода и не мијте го директно.
- Не користете растворувачи како алкохол, разредувач или бензен, бидејќи тие може да предизвикаат неправилна работа, оштетување на компонентите или промена на бојата.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:




Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.


AL: MEGANECK – MANUALI I PËRDORIMIT

Përshkrimi i komponentëve dhe pjesëve

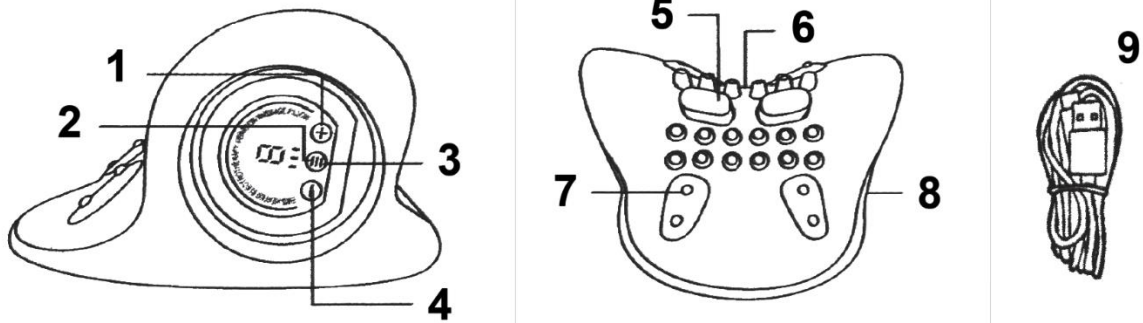

1. + Butoni (rritje)
2. EMS / ngrohje / dridhje – butonat e funksioneve
3. Butoni i ndezjes (ON/OFF)
4. – Butoni (ulje)
5. Jastëku EMS me ngrohje
6. Nyje masazhi
7. Shtesa magnetike
8. Porta USB Type-C
9. Kabllo karikimi USB Type-C

Mënyra e karikimit

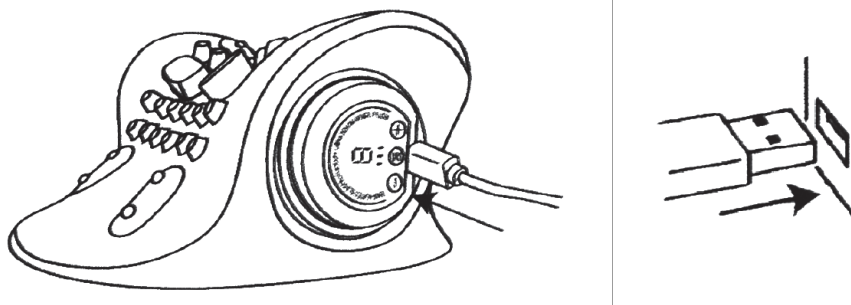


1. Futni kabllon USB të përfshirë në portën USB Type-C të pajisjes.
2. Lidhni skajin tjetër të kabllot USB me një adapter USB ose power bank. Adapteri USB ose power bank duhet të sigurohet veçmas. Rekomandohet një furnizim me energji prej 5 V / 1 A ose më i lartë.
3. Gjatë karikimit, drita treguese e kuqe pulson. Kur pajisja është plotësisht e karikuar, drita treguese e gjelbër qëndron e ndezur.


Ndezja dhe fikja e pajisjes

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për rreth 3 sekonda për të ndezur ose fikur pajisjen.

Pas ndezjes së pajisjes, ajo mund të përdoret edhe me telekomandë, ku butoni M përdoret për të ndryshuar funksionet.

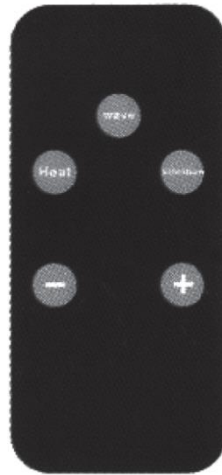

Butonat e telekomandës

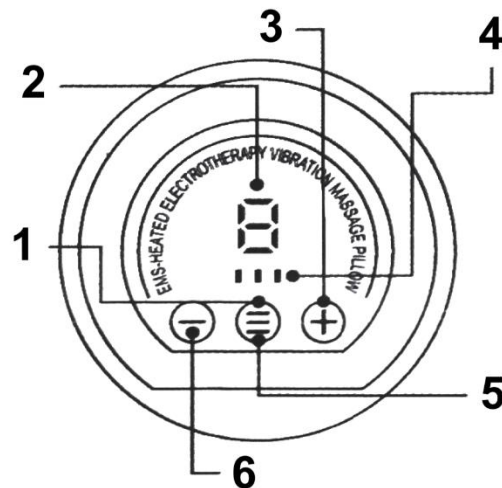

1. EMS / ngrohje / dridhje – butoni i funksionit
2. Treguesi i nivelit të intensitetit
3. + Butoni (rritje)
4. Drita treguese
5. Butoni i ndezjes (ON/OFF)
6. – Butoni (ulje)

Si të përdoret

1. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për rreth 3 sekonda për të ndezur pajisjen. Drita treguese e modalitetit do të shfaqet në pozicionin e parë. Shtypni butonin e rritjes (+). Kur niveli 1 shfaqet në zonën e intensitetit, funksioni EMS është aktivizuar. Më pas mund ta rregulloni intensitetin EMS me butonat + ose -. Në total janë të disponueshme 6 nivele intensiteti. Kur treguesi i intensitetit tregon 0, funksioni EMS është i fikur.
2. Shtypni përsëri butonin e ndezjes. Kur drita treguese e modalitetit kalon në pozicionin e dytë, pajisja hyn në mënyrën e ngrohjes. Kur niveli 1 shfaqet në zonën e intensitetit, funksioni i ngrohjes është aktivizuar. Janë të disponueshme 3 nivele ngrohjeje.
Paralajmërim: Zgjidhni nivelin e duhur sipas nevojave tuaja. Shmangni nxehësinë e tepërt për të parandaluar djegiet.

3. Shtypni përsëri butonin e ndezjes. Kur drita treguese e modalitetit kalon në pozicionin e tretë, aktivizohet mënyra e dridhjes. Kur shfaqet niveli 1, funksioni i dridhjes fillon. Janë të disponueshme 3 nivele dridhjeje.
4. Pajisja do të fiket automatikisht pas 15 minutash funksionimi.
5. Funksionet EMS, ngrohja dhe dridhja mund të përdoren njëkohësisht ose veçmas.

Shënime të rëndësishme për funksionin e ngrohjes

Mos e përdorni funksionin e ngrohjes vazhdimisht për periudha të gjata kohe. Edhe në temperatura relativisht të ulëta (40–50 °C), kontakti i zgjatur me lëkurën mund të shkaktojë djegie nga temperatura e ulët, edhe nëse nuk ndjeni menjëherë shqetësim ose dhimbje.

Mos e përdorni funksionin EMS gjatë aktiviteteve që përfshijnë ujë (si gatimi, larja ose trajtimi i kafshëve shtëpiake).

Njoftim i rëndësishëm


Ky produkt nuk është pajisje mjekësore dhe nuk është i destinuar për trajtim mjekësor.

Udhëzime për përdorim

Rregullojeni pajisjen në mënyrë që jastëkët EMS me ngrohje të vendosen në zonën e dëshiruar të qafës suaj. Siç tregohet në ilustrim, pajisja mund të përdoret në të dy orientimet. Provojeni në qafë dhe rregullojeni në pozicionin më të rehatshëm.

Ky produkt është projektuar posaçërisht për përdorim në qafë. Mos e përdorni në pjesë të tjera të trupit si krahët ose këmbët.

Funksioni EMS transmeton stimulim përmes lagështisë. Para përdorimit, lagni lehtë zonën e qafës ku jastëkët do të jenë në kontakt me lëkurën me ujë ose ujë të vakët.

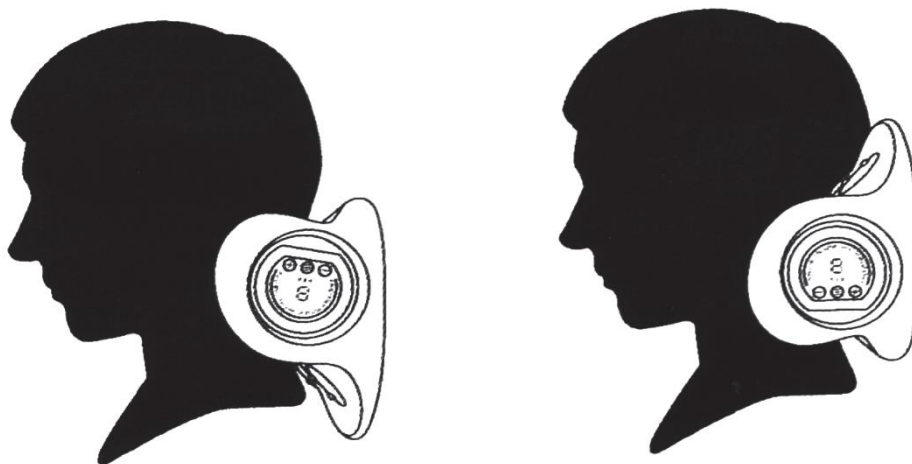

Mirëmbajtja

Pastroni dhe mirëmbani jastëkët EMS me ngrohje pas çdo përdorimi.

- Shtrydhni një leckë të lagur me ujë dhe fshini jastëkët ndërsa janë ende pak të ngrohtë.

- Pastroni me kujdes jastëkët EMS.
- Nëse ka papastërti, përdorni një leckë të butë të lagur lehtë me ujë të ngrohtë me detergjent neutral të holluar, shtrydhni dhe fshini sipërfaqen e pajisjes.
- Mos e zhytni pajisjen në ujë dhe mos e lani drejtpërdrejt.
- Mos përdorni tretës si alkooli, holluesi ose benzina, pasi ato mund të shkaktojnë keqfunksionim, dëmtim të përbërësve ose çngjyrosje.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.