



PT: MEGANECK – MANUAL DO UTILIZADOR

Descrição dos componentes e das peças

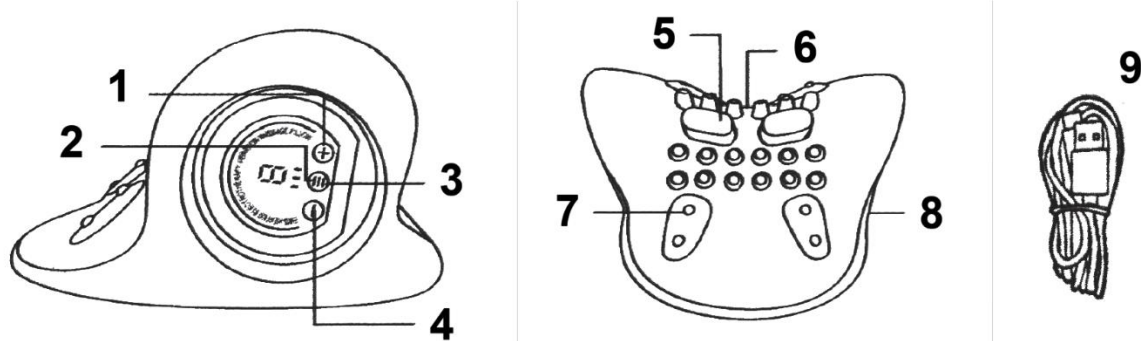

1. + Botão (aumentar)
2. EMS / aquecimento / vibração – botões de função
3. Botão de alimentação (ON/OFF)
4. – Botão (diminuir)
5. Almofada EMS aquecida
6. Nódulos de massagem
7. Inserções magnéticas
8. Porta USB Type-C
9. Cabo de carregamento USB Type-C

Método de carregamento

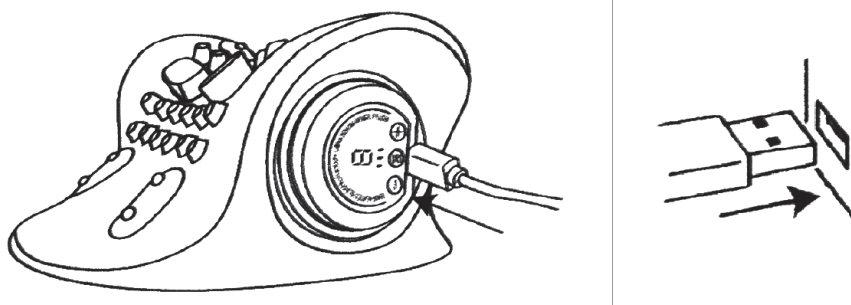


1. Insira o cabo USB incluído na porta USB Type-C do dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB a um adaptador USB ou a uma power bank. O adaptador USB ou a power bank devem ser preparados separadamente. Recomenda-se uma alimentação de 5 V / 1 A ou superior.
3. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha pisca. Quando o dispositivo está totalmente carregado, a luz indicadora verde permanece acesa.


Ligar e desligar o dispositivo

Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante aproximadamente 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

Depois de ligar o dispositivo, este também pode ser operado através do controlo remoto, onde o botão M é utilizado para mudar de funções.

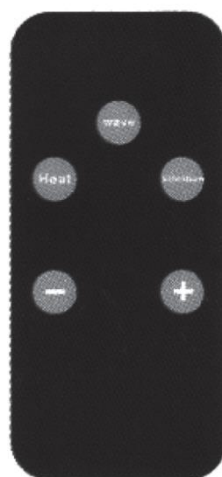

Botões do controlo remoto

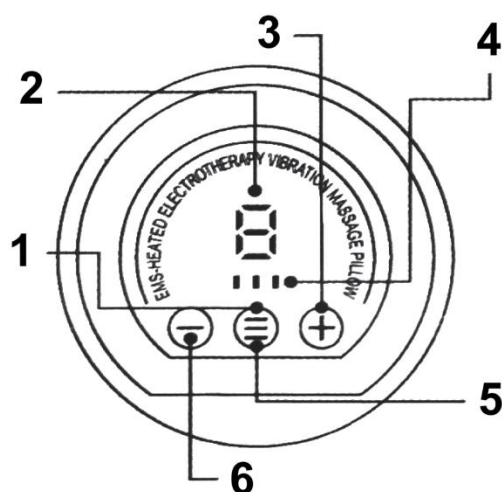

1. EMS / aquecimento / vibração – botão de função
2. Indicador do nível de intensidade
3. + Botão (aumentar)
4. Luz indicadora
5. Botão de alimentação (ON/OFF)
6. – Botão (diminuir)

Como utilizar

1. Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante cerca de 3 segundos para ligar o dispositivo. A luz indicadora do modo aparecerá na primeira posição. Prima o botão de aumento (+). Quando o nível 1 é apresentado na área de intensidade, a função EMS está ativada. Depois disso, pode ajustar a intensidade EMS com os botões + ou -. Estão disponíveis 6 níveis de intensidade no total. Quando o visor da intensidade mostra 0, a função EMS está desligada.
2. Prima novamente o botão de alimentação. Quando a luz indicadora do modo se desloca para a segunda posição, o dispositivo entra no modo de aquecimento. Quando o nível 1 é apresentado na área de intensidade, a função de aquecimento está ativada. Estão disponíveis 3 níveis de aquecimento.

Aviso: Selecione o nível adequado de acordo com as suas necessidades. Evite calor excessivo para prevenir queimaduras.

3. Prima novamente o botão de alimentação. Quando a luz indicadora do modo se desloca para a terceira posição, o modo de vibração é ativado. Quando o nível 1 é apresentado, a função de vibração inicia-se. Estão disponíveis 3 níveis de vibração.
4. O dispositivo desligar-se-á automaticamente após 15 minutos de funcionamento.
5. As funções EMS, aquecimento e vibração podem ser utilizadas em simultâneo ou separadamente.

Notas importantes sobre a função de aquecimento

Não utilize a função de aquecimento continuamente durante longos períodos. Mesmo a temperaturas relativamente baixas (40–50 °C), o contacto prolongado com a pele pode causar queimaduras de baixa temperatura, mesmo que não exista desconforto ou dor imediatos.

Não utilize a função EMS durante atividades que envolvam água (como cozinhar, lavar ou manusear animais de estimação).

Aviso importante


Este produto não é um dispositivo médico e não se destina a tratamento médico.

Instruções de utilização

Ajuste o dispositivo de modo a que as almofadas EMS aquecidas fiquem posicionadas na área desejada do seu pescoço. Conforme mostrado na ilustração, o dispositivo pode ser utilizado em qualquer orientação. Experimente-o no pescoço e ajuste-o para a posição mais confortável.

Este produto foi concebido especificamente para utilização no pescoço. Não o utilize noutras partes do corpo, como braços ou pernas.

A função EMS transmite estimulação através da humidade. Antes da utilização, humedeça ligeiramente a área do pescoço onde as almofadas entrarão em contacto com a pele com água ou água morna.

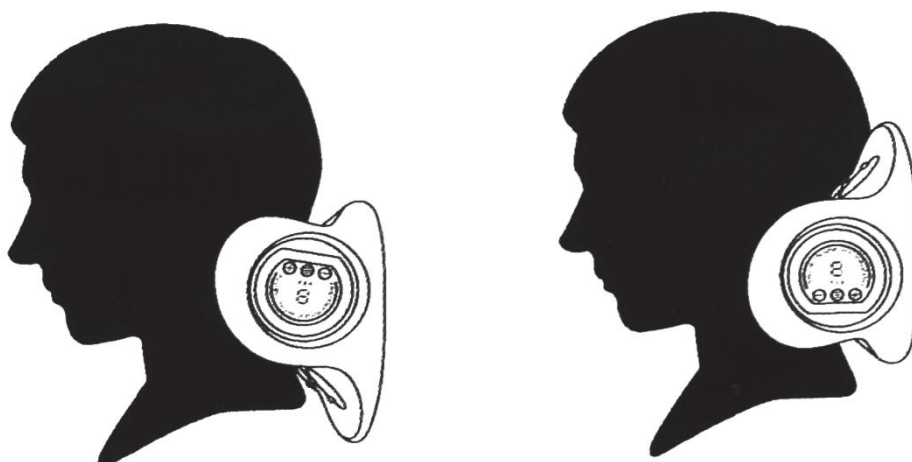

Manutenção

Limpe e faça a manutenção das almofadas EMS aquecidas após cada utilização.

- Torça um pano embebido em água e limpe as almofadas enquanto ainda estiverem ligeiramente quentes.
- Limpe cuidadosamente as almofadas EMS.
- Se houver sujidade, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água morna e detergente neutro diluído, torça-o e limpe a superfície do dispositivo.
- Não mergulhe o dispositivo em água nem o lave diretamente.
- Não utilize solventes como álcool, diluente ou benzeno, pois podem causar avarias, danos nos componentes ou descoloração.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.