



## SR (Latn.): MEGANECK – KORISNIČKO UPUTSTVO

### Opis komponenti i delova

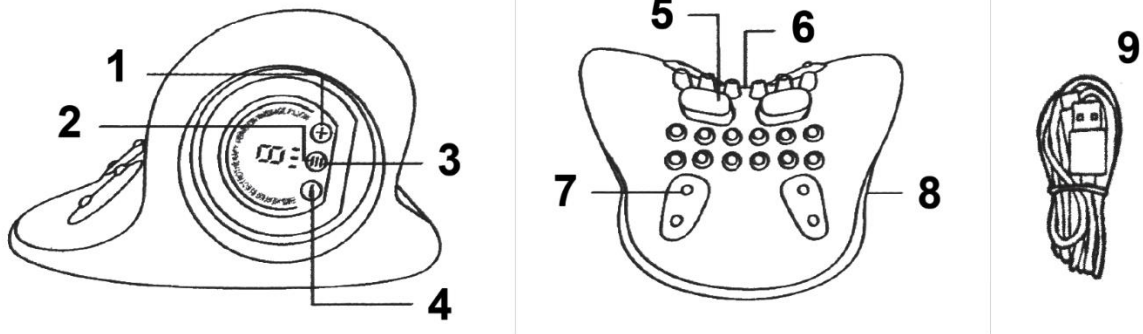

1. + Dugme (povećanje)
2. EMS / grejanje / vibracija – funkcijska dugmad
3. Dugme za uključivanje (ON/OFF)
4. – Dugme (smanjenje)
5. EMS jastučić za grejanje
6. Masažni čvorovi
7. Magnetski umetci
8. USB Type-C priključak
9. USB Type-C kabl za punjenje

### Način punjenja

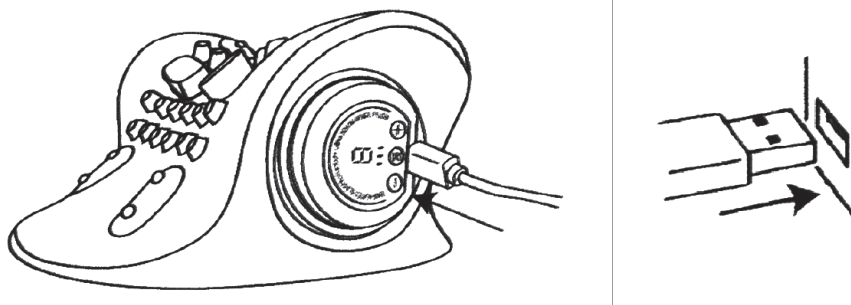


1. Umetnite priloženi USB kabl u USB Type-C priključak na uređaju.
2. Drugi kraj USB kabla povežite sa USB adapterom ili power bank uređajem. USB adapter ili power bank treba pripremiti odvojeno. Preporučuje se napajanje od 5 V / 1 A ili više.
3. Tokom punjenja crveno indikatorsko svetlo treperi. Kada je uređaj potpuno napunjen, zeleno indikatorsko svetlo ostaje uključeno.

### Uključivanje i isključivanje uređaja


Pritisnite i držite dugme za uključivanje približno 3 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj.

Nakon uključivanja, uređajem se može upravljati i pomoću daljinskog upravljača, pri čemu se dugme M koristi za promenu funkcija.

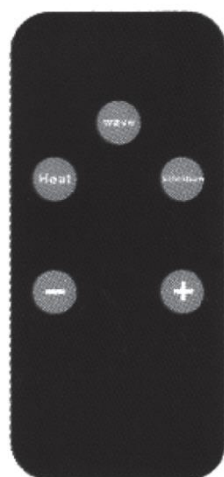

---

### Dugmad daljinskog upravljača

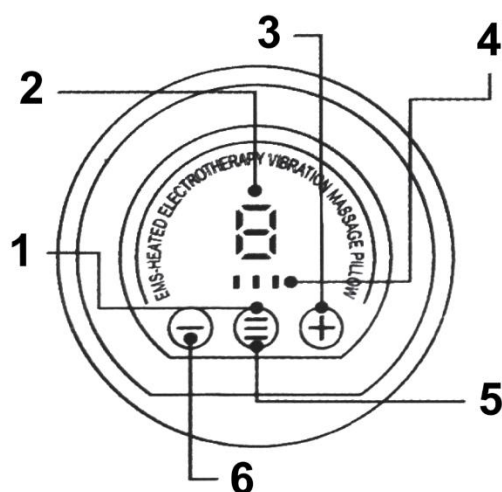

1. EMS / grejanje / vibracija – funkcijsko dugme
2. Indikator nivoa intenziteta
3. + Dugme (povećanje)
4. Indikatorsko svetlo
5. Dugme za uključivanje (ON/OFF)
6. – Dugme (smanjenje)

---

### Kako koristiti

1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje oko 3 sekunde da biste uključili uređaj. Indikatorsko svetlo režima će se pojaviti u prvom položaju. Pritisnite dugme za povećanje (+). Kada je u oblasti intenziteta prikazan nivo 1, EMS funkcija je aktivirana. Nakon toga možete podešavati EMS intenzitet pomoću dugmadi + ili -. Ukupno je dostupno 6 nivoa intenziteta. Kada prikaz intenziteta pokazuje 0, EMS funkcija je isključena.
2. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje. Kada se indikatorsko svetlo režima pomeri u drugi položaj, uređaj ulazi u režim grejanja. Kada je u oblasti intenziteta prikazan nivo 1, funkcija grejanja je aktivirana. Dostupna su 3 nivoa grejanja.  
Upozorenje: Izaberite odgovarajući nivo prema svojim potrebama. Izbegavajte prekomernu toplotu kako biste sprečili opekotine.

3. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje. Kada se indikatorsko svetlo režima pomeri u treći položaj, aktivira se režim vibracije. Kada je prikazan nivo 1, funkcija vibracije se pokreće. Dostupna su 3 nivoa vibracije.
4. Uređaj će se automatski isključiti nakon 15 minuta rada.
5. EMS, grejanje i funkcije vibracije mogu se koristiti istovremeno ili odvojeno.

### **Važne napomene za funkciju grejanja**

Ne koristite funkciju grejanja neprekidno tokom dužeg vremenskog perioda. Čak i pri relativno niskim temperaturama (40–50 °C), produženi kontakt sa kožom može izazvati opekotine od niske temperature, čak i ako ne osetite trenutnu nelagodnost ili bol.

Ne koristite EMS funkciju tokom aktivnosti koje uključuju vodu (kao što su kuvanje, pranje ili rukovanje kućnim ljubimcima).

---

### **Važno obaveštenje**

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i nije namenjen za medicinski tretman.


---

### **Uputstvo za upotrebu**

Podesite uređaj tako da grejani EMS jastučići budu postavljeni na željeno područje vašeg vrata. Kao što je prikazano na ilustraciji, uređaj se može koristiti u oba položaja. Isprobajte ga na vratu i podesite ga u najudobniji položaj.

Ovaj proizvod je dizajniran posebno za upotrebu na vratu. Nemojte ga koristiti na drugim delovima tela kao što su ruke ili noge.

EMS funkcija prenosi stimulaciju putem vlage. Pre upotrebe blago navlažite područje vrata gde će jastučići biti u kontaktu sa kožom vodom ili mlakom vodom.

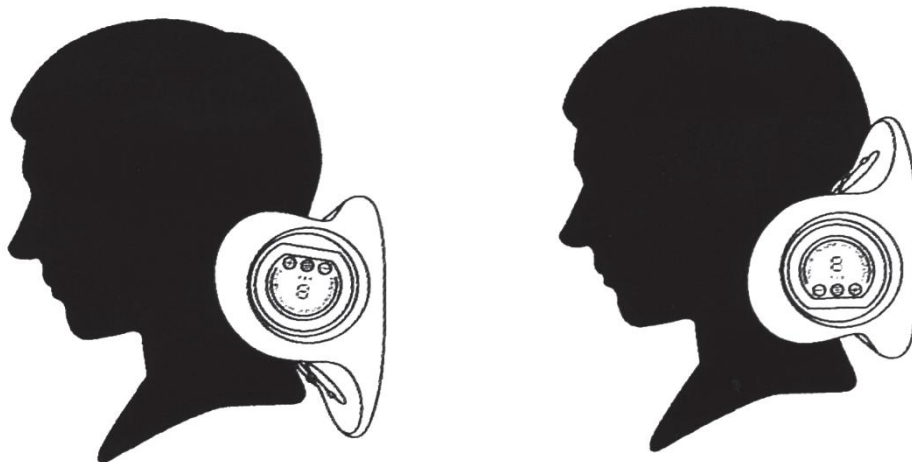

---

### **Održavanje**

Očistite i održavajte EMS jastučiće za grejanje nakon svake upotrebe.

- Ocedite krpu natopljenu vodom i obrišite jastučiće dok su još blago topli.

- Pažljivo očistite EMS jastučice.
- Ako je prisutna prljavština, upotrebite meku krpu blago natopljenu toplom vodom sa razblaženim neutralnim deterdžentom, ocedite je i obrišite površinu uređaja.
- Ne potapajte uređaj u vodu niti ga perite direktno.
- Ne koristite rastvarače kao što su alkohol, razređivač ili benzin, jer mogu izazvati nepravilan rad, oštećenje komponenti ili promenu boje.

---

#### UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.


Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.


## SR (Cyril.): MEGANECK – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

### Опис компоненти и делова

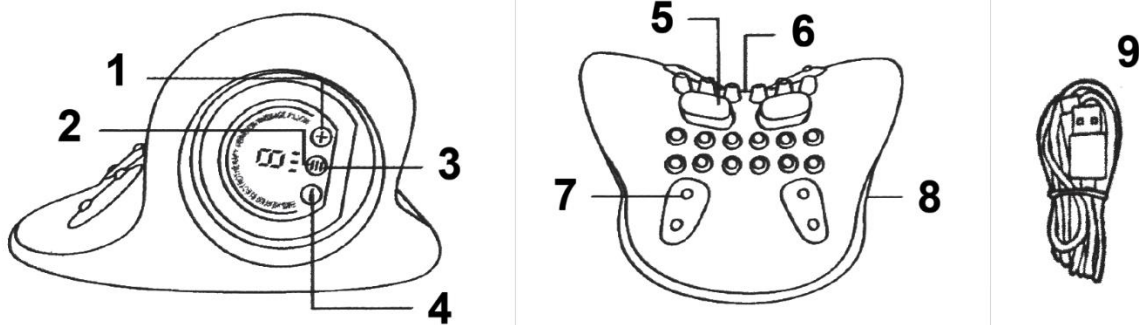

1. + Дугме (повећање)
2. EMS / грејање / вибрација – функцијска дугмад
3. Дугме за укључивање (ON/OFF)
4. – Дугме (смањење)
5. EMS јастучић за грејање
6. Масажни чворови
7. Магнетни уметци
8. USB Type-C прикључак
9. USB Type-C кабл за пуњење

### Начин пуњења

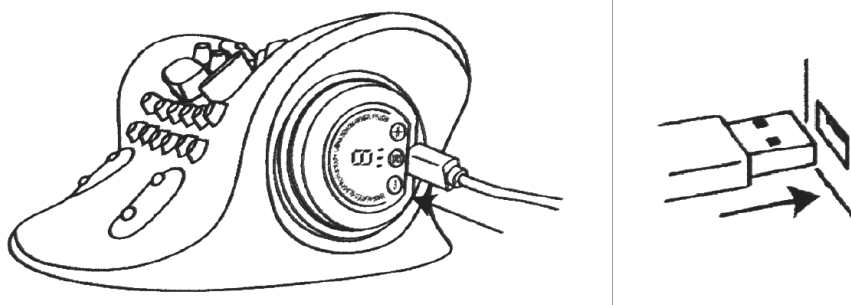


1. Уметните приложени USB кабл у USB Type-C прикључак на уређају.
2. Други крај USB кабла повежите са USB адаптером или power bank уређајем. USB адаптер или power bank треба припремити одвојено. Препоручује се напајање од 5 V / 1 A или више.
3. Током пуњења црвено индикаторско светло трепери. Када је уређај потпуно напуњен, зелено индикаторско светло остаје укључено.

### Укључивање и искључивање уређаја


Притисните и држите дугме за укључивање приближно 3 секунде да бисте укључили или искључили уређај.

Након укључивања, уређајем се може управљати и помоћу даљинског управљача, при чему се дугме М користи за промену функција.

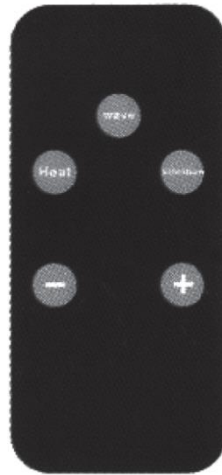

---

### Дугмад даљинског управљача

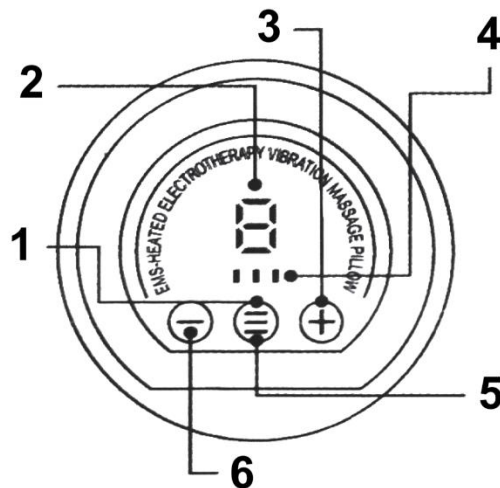

1. EMS / грејање / вибрација – функцијско дугме
2. Индикатор нивоа интензитета
3. + Дугме (повећање)
4. Индикаторско светло
5. Дугме за укључивање (ON/OFF)
6. – Дугме (смањење)

---

### Како користити

1. Притисните и држите дугме за укључивање око 3 секунде да бисте укључили уређај. Индикаторско светло режима ће се појавити у првом положају. Притисните дугме за повећање (+). Када је у области интензитета приказан ниво 1, EMS функција је активирана. Након тога можете подешавати EMS интензитет помоћу дугмади + или -. Укупно је доступно 6 нивоа интензитета. Када приказ интензитета показује 0, EMS функција је искључена.
2. Поново притисните дугме за укључивање. Када се индикаторско светло режима помери у други положај, уређај улази у режим грејања. Када је у области интензитета приказан ниво 1, функција грејања је активирана. Доступна су 3 нивоа грејања.

Упозорење: Изаберите одговарајући ниво према својим потребама. Избегавајте прекомерну топлоту како бисте спречили опекотине.

3. Поново притисните дугме за укључивање. Када се индикаторско светло режима помери у трећи положај, активира се режим вибрације. Када је приказан ниво 1, функција вибрације се покреће. Доступна су 3 нивоа вибрације.
4. Уређај ће се аутоматски искључити након 15 минута рада.
5. EMS, грејање и функције вибрације могу се користити истовремено или одвојено.

### Важне напомене за функцију грејања

Не користите функцију грејања непрекидно током дужег временског периода. Чак и при релативно ниским температурама (40–50 °C), продужени контакт са кожом може изазвати опекотине од ниске температуре, чак и ако не осетите тренутну нелагодност или бол.

Не користите EMS функцију током активности које укључују воду (као што су кување, прање или руковање кућним љубимцима).

---

### Важно обавештење

Овај производ није медицински уређај и није намењен за медицински третман.


---

### Упутство за употребу

Подесите уређај тако да грејани EMS јастучићи буду постављени на жељено подручје вашег врата. Као што је приказано на илустрацији, уређај се може користити у оба положаја. Испробајте га на врату и подесите га у најудобнији положај.

Овај производ је дизајниран посебно за употребу на врату. Немојте га користити на другим деловима тела као што су руке или ноге.

EMS функција преноси стимулацију путем влаге. Пре употребе благо навлажите подручје врата где ће јастучићи бити у контакту са кожом водом или млаком водом.

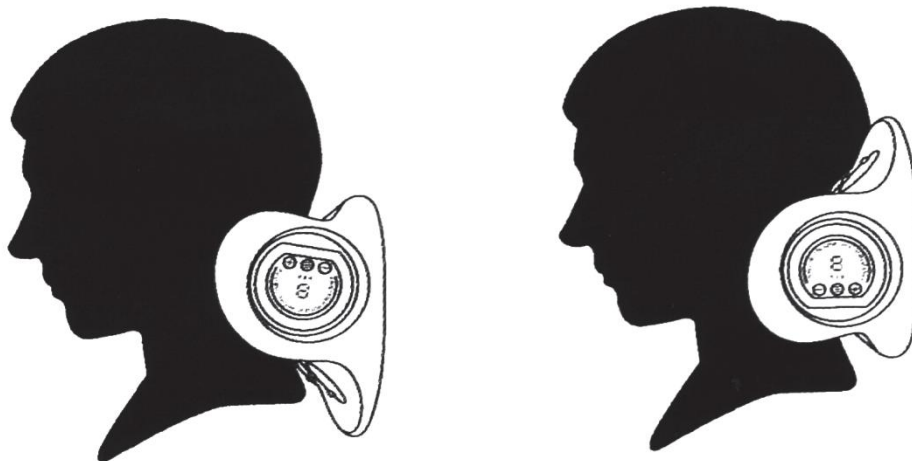

---

### Одржавање

Очистите и одржавајте EMS јастучиће за грејање након сваке употребе.

- Оцедите крпу натопљену водом и обришите јастучиће док су још благо топли.
- Пажљиво очистите EMS јастучиће.
- Ако је присутна прљавштина, употребите меку крпу благо натопљену топлим водом са разблаженим неутралним детерџентом, оцедите је и обришите површину уређаја.
- Не потапајте уређај у воду нити га перите директно.
- Не користите раствараче као што су алкохол, разређивач или бензин, јер могу изазвати неправилан рад, оштећење компоненти или промену боје.

---

#### УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније