


RO: PETAGRIND – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

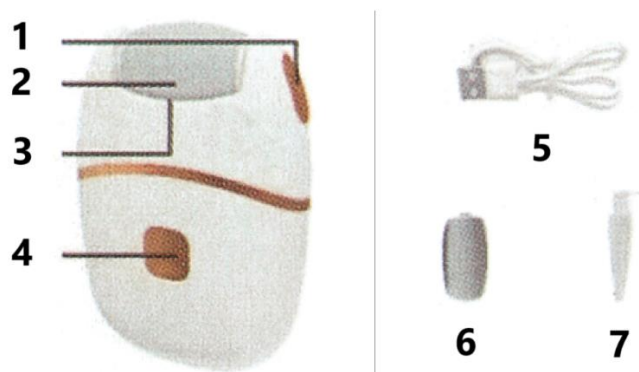

1. Buton de eliberare
2. Cap de șlefuire
3. Lumină LED
4. Comutator PORNIT/OPRIT
5. Cablu de încărcare USB Type-C
6. Cap de șlefuire de rezervă
7. Perie de curățare

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE


1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
 2. Introduceți cablul de alimentare în portul de încărcare al dispozitivului.
 3. Conectați mufa USB la un power bank, port USB de computer sau altă sursă de alimentare.
 4. Lumina roșie se aprinde în timpul încărcării. Când dispozitivul este complet încărcat, lumina devine verde.
- Timpul de încărcare este de aproximativ 1,5 ore.

ÎNLOCUIREA CAPULUI DE ȘLEFUIRE

Înlocuiți capul de șlefuire după cum este necesar pentru rezultate optime. În funcție de frecvența utilizării și suprafața tratată, capul poate necesita înlocuire după două utilizări complete.

Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de înlocuirea capului.

1. Țineți capul cu o mână și apăsați butonul lateral cu cealaltă mână. Capul se va desprinde spre exterior (vezi Fig. 6 și 7).
2. Introduceți un nou cap de șlefuire până când auziți un „click”, ceea ce indică fixarea corectă.

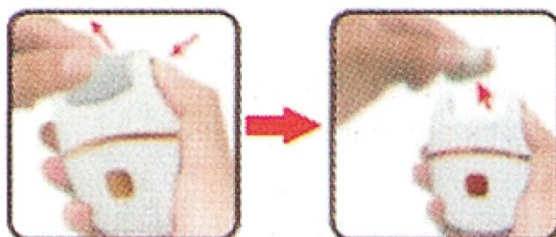

Notă: Nu porniți dispozitivul fără ca un cap să fie montat corespunzător.

Important: În ambalaj, dispozitivul este livrat cu un cap de șlefuire grosier preinstalat.

DEPOZITARE

Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros, ferit de copii.

Evitați expunerea la căldură sau umiditate.

CUM SE UTILIZEAZĂ PRODUSUL

Acest produs este conceput exclusiv pentru netezirea pielii de pe tălpi și călcâie. Nu utilizați pe alte părți ale corpului.

1. Spălați și uscați bine pielea. Nu utilizați pe piele iritată sau lezată.
2. Verificați dacă capul de șlefuire este bine fixat (consultați secțiunea „Înlocuirea capului”).
3. Îndepărtați capacul de protecție înainte de utilizare.
4. Apăsăți butonul de pornire. Dispozitivul are două viteze:
 - Apăsăți o dată pentru viteză mică
 - Apăsăți din nou pentru viteză mare
 - Sau apăsați rapid de două ori pentru viteză mare direct
5. Plimbați ușor dispozitivul (înainte, înapoi sau lateral) pe zona cu piele întărită timp de 2–3 secunde. Nu apăsați. Dacă apăsați prea tare, dispozitivul se va opri automat.
 - Verificați dacă pielea este moale.
 - Repetați în intervale de 2–3 secunde dacă este necesar.
6. Pentru curățare, consultați secțiunea „Curățare”.
7. Puneți capacul de protecție după utilizare.



INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.