

BG: TOOFY – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел: QCS-H168

Батерия: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Вход: 5V / 1A, 0.5W


Забележка: Подходящо за деца над 3 години

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Напълно водоустойчив и запечатан дизайн (IPX7), осигуряващ удобство, издръжливост и лесно почистване.
 - U-образна глава на четката, изработена от мек антибактериален силикон, подходящ за контакт с храни. Осигурява 360° контакт с венците и зъбите за бързо и удобно почистване.
 - Помага за защита на венците, стимулира пародонталната циркулация и намалява риска от пародонтални заболявания.
 - Осигурява бързо и ефективно почистване на устната кухина само за 45 секунди, насърчавайки децата да мият зъбите си с удоволствие.
 - Малката глава е подходяща за деца на възраст 2–6 години, а средната глава е подходяща за деца над 6 години.
-

ПРЕГЛЕД НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ПРОДУКТА

Структурата на продукта е показана на фигурата:

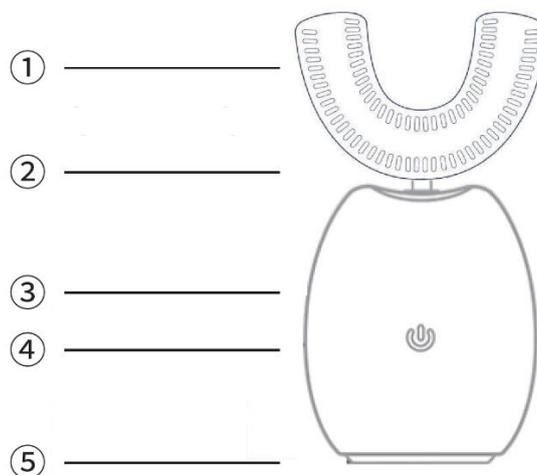

1. Антибактериална U-образна силиконова глава
2. LED светлина

3. Тяло на четката за зъби
4. Бутон за включване / функции
5. Порт за зареждане

РЕЖИМ НА РАБОТА

Натиснете бутона за включване/функция, за да промените режима на работа:

- **Режим почистване:** 15 000 движения/минута, синя светлина включена
- **Режим избелване:** 10 000 движения/минута, синя светлина включена
- **Режим масаж:** 11 000 движения/минута, синя светлина включена

Състояние на зареждане:

- Постоянна червена светлина показва, че устройството се зарежда
- Постоянна синя светлина показва, че устройството е напълно заредено

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



1. Нанесете равномерно пенеста паста за зъби от двете страни на U-образната глава.
2. Поставете четката в устата и внимателно разположете зъбите в каналите. Не захващайте прекалено силно.
3. Натиснете бутона, за да стартирате четката. Леко движете устройството наляво и надясно за по-добро почистване.
4. След употреба изплакнете четката под течаща вода и я подсушете.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Поставете DC края на кабела за зареждане вертикално в порта за зареждане в долната част на четката. Свържете USB края към захранващ адаптер.

По време на зареждане LED светлината на устройството пулсира. Светлината изгасва, когато батерията е напълно заредена.

НАЧИН ЗА СМЯНА НА ГЛАВАТА НА ЧЕТКАТА



1



2

Внимателно поставете ножица в отвора в долната част на главата (оста). Приложете равномерен натиск от двете страни и внимателно повдигнете нагоре.

Алтернативно, хванете здраво главата с палеца и показалеца и бавно я издърпайте.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Нормалната работна температура е от 0°C до 50°C.
- Зареждайте продукта при стайна температура и се уверете, че устройството е сухо. Използвайте захранване до максимум 5V / 1A.
- Ако продуктът не се използва дълго време, го зареждайте и разреждайте поне веднъж на три месеца.
- Съхранявайте продукта на хладно и сухо място и избягвайте пряка слънчева светлина.
- След почистване изплакнете главата с чиста вода и внимателно отстранете излишната вода. Избягвайте потапяне на устройството във вода.
- Устройството има висока изходна мощност; не го използвайте непрекъснато повече от 10 минути.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.