

## CZ: TOOFY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

---

### SPECIFIKACE PRODUKTU

**Model:** QCS-H168

**Baterie:** Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

**Vstup:** 5V / 1A, 0.5W

**Upozornění:** Vhodné pro děti od 3 let


---

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Plně vodotěsný a utěsněný design (IPX7), který zajišťuje pohodlí, odolnost a snadné čištění.
  - Hlavice kartáčku ve tvaru U z měkkého antibakteriálního silikonu vhodného pro styk s potravinami. Poskytuje 360° kontakt s dásněmi a zuby pro rychlé a pohodlné čištění.
  - Pomáhá chránit dásně, podporuje parodontální prokrvení a snižuje riziko parodontálních onemocnění.
  - Zajišťuje rychlé a efektivní čištění ústní dutiny během pouhých 45 sekund a motivuje děti k pravidelnému čištění zubů.
  - Malá hlavice je vhodná pro děti ve věku 2–6 let, zatímco střední hlavice je vhodná pro děti od 6 let výše.
- 

### PŘEHLED SOUČÁSTÍ PRODUKTU

Struktura produktu je zobrazena na obrázku:

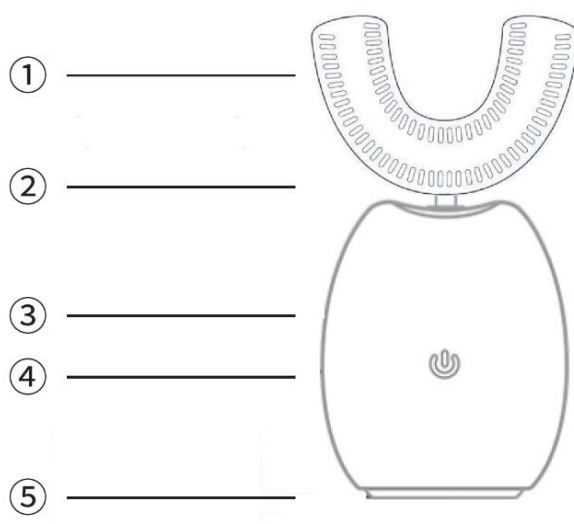

1. Antibakteriální silikonová hlavice ve tvaru U
2. LED světlo
3. Tělo zubního kartáčku

4. Tlačítko zapnutí / funkce
5. Nabíjecí port

---

## PROVOZNÍ REŽIM

Stiskněte tlačítko zapnutí/funkce pro změnu režimu:


- **Režim čištění:** 15 000 pohybů/minutu, modré světlo zapnuto
- **Režim bělení:** 10 000 pohybů/minutu, modré světlo zapnuto
- **Režim masáže:** 11 000 pohybů/minutu, modré světlo zapnuto

Stav nabíjení:

- Trvalé červené světlo znamená, že se zařízení nabíjí
- Trvalé modré světlo znamená, že je zařízení plně nabité

---

## NÁVOD K POUŽITÍ

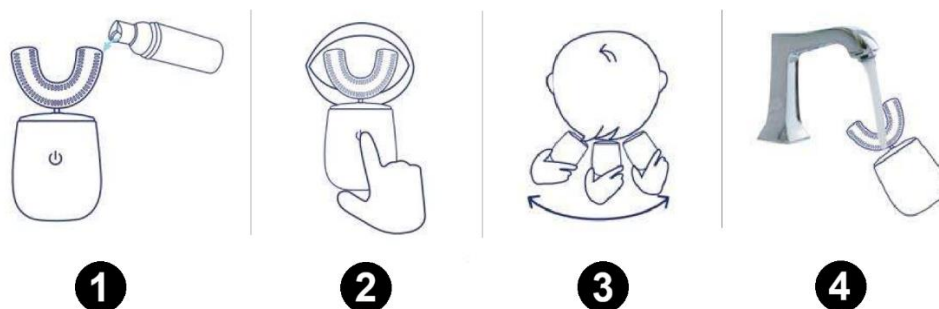

1. Naneste rovnoměrně pěnovou zubní pastu na obě strany hlavičky ve tvaru U.
2. Vložte kartáček do úst a jemně usadte zuby do drážek. Nekousejte příliš silně.
3. Stiskněte tlačítko pro spuštění kartáčku. Jemně pohybujte zařízením ze strany na stranu pro lepší čištění.
4. Po použití kartáček opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jej.

---


## POKYNY PRO NABÍJENÍ

Zasuňte DC konec nabíjecího kabelu svisle do nabíjecího portu na spodní části kartáčku. USB konec připojte k napájecímu adaptéru.

Během nabíjení LED světlo na zařízení pulzuje. Po úplném nabití baterie světlo zhasne.

---

## ZPŮSOB VÝMĚNY HLAVICE

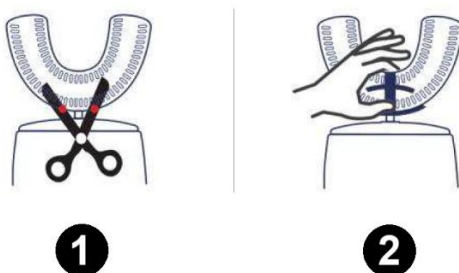

Opatrně vložte nůžky do štěrbin na spodní části hlavice (osy). Rovnoměrně zatlačte na obě strany a jemně zvedněte nahoru.

Případně uchopte hlavici pevně palcem a ukazováčkem a pomalu ji vytáhněte.

---

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Běžná provozní teplota je od 0°C do 50°C.
- Nabíjejte produkt při pokojové teplotě a ujistěte se, že je zařízení suché. Používejte napájení maximálně 5V / 1A.
- Pokud produkt není delší dobu používán, nabijte a vybijte jej alespoň jednou za tři měsíce.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě a vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Po čištění opláchněte hlavici čistou vodou a jemně setřeste přebytečnou vodu. Vyhněte se ponoření zařízení do vody.
- Zařízení má vysoký výstupní výkon; nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 10 minut.

---

## NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.