

DE: TOOFY – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell: QCS-H168

Batterie: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Eingang: 5V / 1A, 0.5W


Hinweis: Geeignet für Kinder ab 3 Jahren

PRODUKTMERKMALE

- Rundum wasserdichtes und versiegeltes Design (IPX7), das Komfort, Langlebigkeit und einfache Reinigung gewährleistet.
 - U-förmiger Bürstenkopf aus weichem, antibakteriellem Silikon in Lebensmittelqualität. Bietet 360° Kontakt mit Zahnfleisch und Zähnen für ein schnelles und angenehmes Putzen.
 - Hilft, das Zahnfleisch zu schützen, fördert die Durchblutung des Zahnhalteapparats und reduziert das Risiko von Parodontalerkrankungen.
 - Ermöglicht eine schnelle und effektive Mundreinigung in nur 45 Sekunden und motiviert Kinder zum Zähneputzen.
 - Der kleine Bürstenkopf ist für Kinder von 2–6 Jahren geeignet, der mittlere Bürstenkopf für Kinder ab 6 Jahren.
-

ÜBERSICHT DER PRODUKTKOMPONENTEN

Die Struktur des Produkts ist in der Abbildung dargestellt:

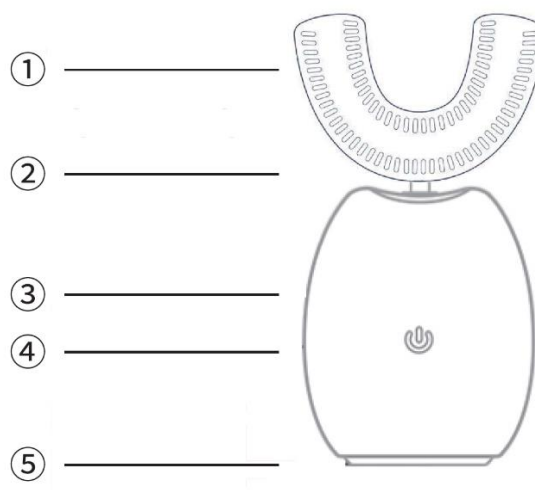

1. Antibakterieller U-förmiger Silikon-Bürstenkopf
2. LED-Licht
3. Zahnbürstenkörper

4. Ein-/Funktionsknopf
 5. Ladeanschluss
-

BETRIEBSMODUS


Drücken Sie den Ein-/Funktionsknopf, um den Betriebsmodus zu wechseln:

- **Reinigungsmodus:** 15.000 Bewegungen/Minute, blaues Licht an
- **Aufhellungsmodus:** 10.000 Bewegungen/Minute, blaues Licht an
- **Massagemodus:** 11.000 Bewegungen/Minute, blaues Licht an

Ladestatus:

- Dauerhaft rotes Licht zeigt an, dass das Gerät geladen wird
 - Dauerhaft blaues Licht zeigt an, dass das Gerät vollständig geladen ist
-

GEBRAUCHSANWEISUNG

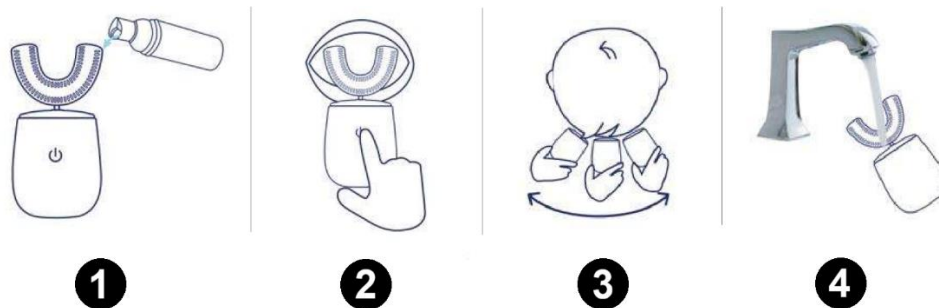


1. Tragen Sie Schaumzahnpaste gleichmäßig auf beide Seiten des U-förmigen Bürstenkopfs auf.
 2. Setzen Sie die Bürste in den Mund ein und platzieren Sie die Zähne vorsichtig in den Rillen. Nicht zu fest beißen.
 3. Drücken Sie den Knopf, um die Zahnbürste zu starten. Bewegen Sie das Gerät sanft von Seite zu Seite für eine bessere Reinigung.
 4. Nach der Verwendung die Zahnbürste unter fließendem Wasser abspülen und trocknen.
-

LADEANWEISUNG

Stecken Sie das DC-Ende des Ladekabels senkrecht in den Ladeanschluss an der Unterseite der Zahnbürste. Verbinden Sie das USB-Ende mit einem Netzadapter.

Während des Ladevorgangs pulsiert das LED-Licht am Gerät. Das Licht erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

AUSTAUSCH DES BÜRSTENKOPFS

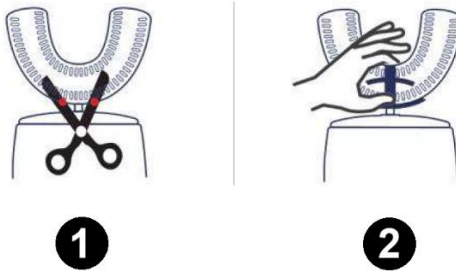

Führen Sie vorsichtig eine Schere in den Schlitz an der Unterseite des Bürstenkopfs (Achse) ein. Üben Sie gleichmäßigen Druck auf obere Seiten aus und heben Sie ihn vorsichtig nach oben.

Alternativ halten Sie den Bürstenkopf fest mit Daumen und Zeigefinger und ziehen ihn langsam heraus.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die normale Betriebstemperatur liegt zwischen 0°C und 50°C.
- Laden Sie das Produkt bei Raumtemperatur und stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken ist. Verwenden Sie eine Stromversorgung von maximal 5V / 1A.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, laden und entladen Sie es mindestens einmal alle drei Monate.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Nach dem Putzen den Bürstenkopf mit sauberem Wasser abspülen und überschüssiges Wasser vorsichtig abschütteln. Vermeiden Sie es, das Gerät in Wasser einzutauchen.
- Das Gerät hat eine hohe Ausgangsleistung; verwenden Sie es nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.