

# DA: TOOFY – BRUGERMANUAL

---

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**Model:** QCS-H168

**Batteri:** Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

**Indgang:** 5V / 1A, 0.5W

**Bemærkning:** Egned til børn fra 3 år og opefter


---

## PRODUKTFUNKTIONER

- Fuldt vandtæt og forseglet design (IPX7), som sikrer bekvemmelighed, holdbarhed og nem rengøring.
  - U-formet børstehoved fremstillet af blød, antibakteriel silikone i fødevarekvalitet. Giver 360° kontakt med tandkød og tænder for hurtig og behagelig børstning.
  - Hjælper med at beskytte tandkødet, fremmer parodontal blodcirkulation og reducerer risikoen for parodontale sygdomme.
  - Giver hurtig og effektiv mundrengøring på kun 45 sekunder og motiverer børn til at børste tænder.
  - Det lille børstehoved er egnet til børn i alderen 2–6 år, mens det mellemstore børstehoved er egnet til børn fra 6 år og opefter.
- 

## OVERSIGT OVER PRODUKTKOMPONENTER

Produktets struktur er vist på figuren:

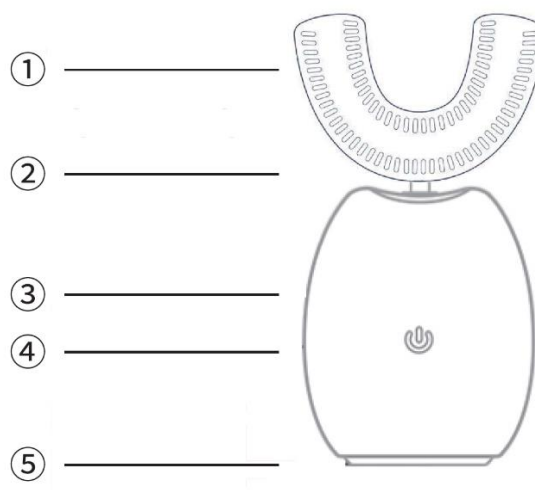

1. Antibakterielt U-formet silikonebørstehoved
2. LED-lys
3. Tandbørstens krop

4. Tænd/sluk- / funktionsknap
  5. Opladningsport
- 

## DRIFTSTILSTAND


Tryk på tænd/sluk-/funktionsknappen for at ændre driftstilstand:

- **Rengøringstilstand:** 15.000 bevægelser/minut, blått lys tændt
- **Blegningstilstand:** 10.000 bevægelser/minut, blått lys tændt
- **Massagetilstand:** 11.000 bevægelser/minut, blått lys tændt

Opladningsstatus:

- Fast rødt lys angiver, at enheden oplades
  - Fast blått lys angiver, at enheden er fuldt opladet
- 

## BRUGSANVISNING

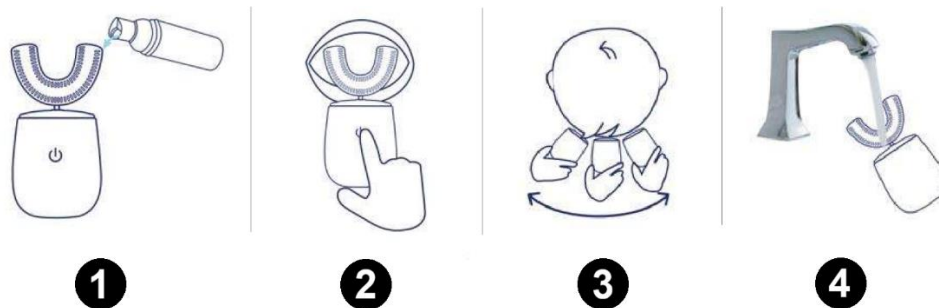

1. Påfør jævnt skummende tandpasta på begge sider af det U-formede børstehoved.
  2. Placer børsten i munden og tilpas tænderne forsigtigt i rillerne. Bid ikke for hårdt.
  3. Tryk på knappen for at starte tandbørsten. Bevæg enheden forsigtigt fra side til side for bedre rengøring.
  4. Efter brug skylles tandbørsten under rindende vand og tørres af.
- 


## OPLADNINGSTRUKTIONER

Indsæt DC-enden af opladningskablet lodret i opladningsporten i bunden af tandbørsten. Tilslut USB-enden til en strømadapter.

Under opladning pulserer LED-lyset på enheden. Lyset slukker, når batteriet er fuldt opladet.

---

## METODE TIL UDSKIFTNING AF BØRSTEHØVEDET

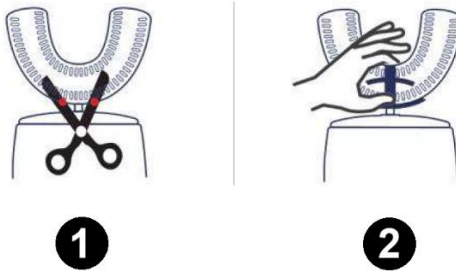

Indsæt forsigtigt en saks i åbningen i bunden af børstehovedet (akslen). Påfør jævnt tryk på begge sider og løft forsigtigt opad.

Alternativt kan du holde børstehovedet fast med tommel- og pegefinger og trække det langsomt ud.

---

### FORHOLDSREGLER

- Den normale driftstemperatur er fra 0°C til 50°C.
- Oplad produktet ved stuetemperatur og sørg for, at enheden er tør. Brug en strømforsyning på op til 5V / 1A.
- Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal det oplades og aflades mindst én gang hver tredje måned.
- Opbevar produktet et køligt og tørt sted og undgå direkte sollys.
- Efter børstning skylles børstehovedet med rent vand og overskydende vand rystes forsigtigt af. Undgå at nedsænke enheden i vand.
- Enheden har høj udgangseffekt; brug den ikke kontinuerligt i mere end 10 minutter.

---

### INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.