

EE: TOOFY – KASUTUSJUHEND

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Mudel: QCS-H168

Aku: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Sisend: 5V / 1A, 0.5W


Märkus: Sobib lastele alates 3. eluaastast

TOOTE OMADUSED

- Täielikult veekindel ja suletud disain (IPX7), mis tagab mugavuse, vastupidavuse ja lihtsa puhastamise.
 - U-kujuline harjapea, valmistatud pehmest antibakteriaalsest toidukvaliteediga silikoonist. Tagab 360° kontakti igemete ja hammastega kiireks ja mugavaks puhastamiseks.
 - Aitab kaitsta igemeid, soodustab parodontaalset vereringet ja vähendab parodontaalhaiguste riski.
 - Tagab kiire ja tõhusa suuhügieeni vaid 45 sekundiga, julgustades lapsi hambaid pesema.
 - Väike harjapea sobib lastele vanuses 2–6 aastat, keskmine harjapea lastele alates 6. eluaastast.
-

TOOTE KOMPONENTIDE ÜLEVAADE

Toote struktuur on näidatud joonisel:

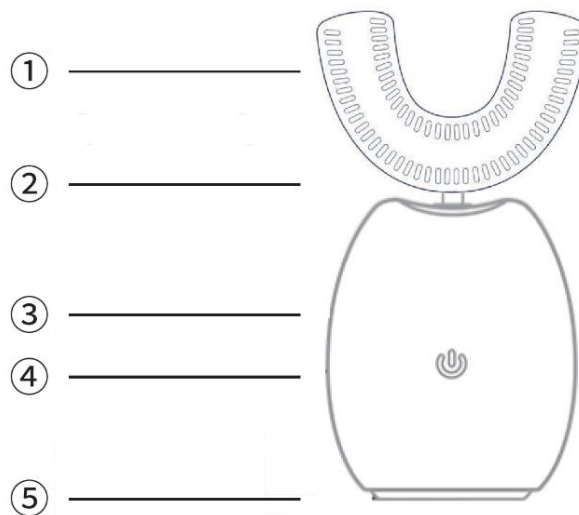

1. Antibakteriaalne U-kujuline silikoonist harjapea
2. LED-valgus
3. Hambaharja korpus

4. Toite- / funktsiooninupp
5. Laadimisport

TÖÖREŽIIM


Vajutage toite-/funktsiooninuppu töörežiimi muutmiseks:

- **Puhastusrežiim:** 15 000 liigutust/minutis, sinine tuli sees
- **Valgendusrežiim:** 10 000 liigutust/minutis, sinine tuli sees
- **Massaažirežiim:** 11 000 liigutust/minutis, sinine tuli sees

Laadimisolek:

- Pidev punane tuli näitab, et seadet laetakse
- Pidev sinine tuli näitab, et seade on täielikult laetud

KASUTUSJUHEND

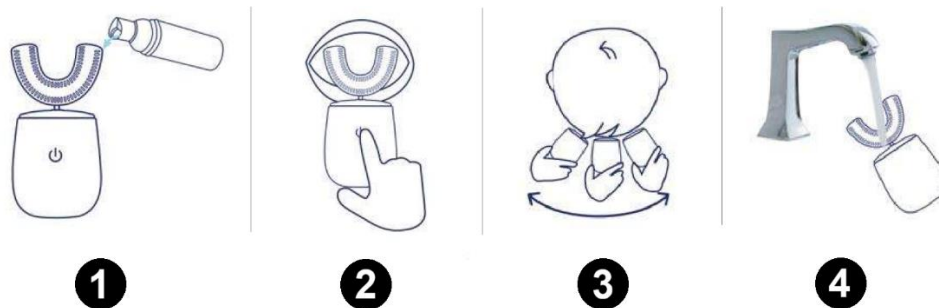


1. Kandke vahutav hambapasta ühtlaselt U-kujulise harjapea mõlemale poolele.
2. Asetage hari suhu ja sobitage hambad õrnalt soontesse. Ärge hammustage liiga tugevalt.
3. Vajutage nuppu hambaharja käivitamiseks. Liigutage seadet õrnalt küljelt küljele parema puhastuse saavutamiseks.
4. Pärast kasutamist loputage hambahari jooksva vee all ja kuivatage.

LAADIMISJUHEND

Sisestage laadimiskaabli DC-ots vertikaalselt hambaharja põhjas asuvasse laadimisporti. Ühendage USB-ots toiteadapteriga.

Laadimise ajal LED-tuli pulseerib. Tuli kustub, kui aku on täielikult laetud.

HARJAPEA VAHETAMISE MEETOD

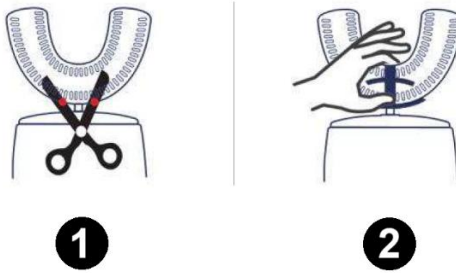

Sisestage ettevaatlikult käärid harjapea põhjas olevasse avasse (teljele). Rakendage mõlemale poolele ühtlast survet ja tõstke ettevaatlikult ülespoole.

Alternatiivina hoidke harjapead kindlalt pöidla ja nimetissõrmega ning tõmmake see aeglaselt välja.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Tavaline töötemperatuur on vahemikus 0°C kuni 50°C.
- Laadige toodet toatemperatuuril ja veenduge, et seade on kuiv. Kasutage toiteallikat kuni 5V / 1A.
- Kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige ja tühjendage seda vähemalt kord kolme kuu jooksul.
- Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas ning vältige otsest päikesevalgust.
- Pärast puhastamist loputage harjapea puhta veega ja raputage liigne vesi maha. Vältige seadme vette kastmist.
- Seadmel on suur väljundvõimsus; ärge kasutage seda pidevalt kauem kui 10 minutit.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviiemis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.