

FR: TOOFY – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle : QCS-H168

Batterie : Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Entrée : 5V / 1A, 0.5W


Avertissement : Convient aux enfants à partir de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conception entièrement étanche et scellée (IPX7), garantissant praticité, durabilité et nettoyage facile.
 - Tête de brosse en forme de U en silicone souple antibactérien de qualité alimentaire. Offre un contact à 360° avec les gencives et les dents pour un brossage rapide et confortable.
 - Aide à protéger les gencives, favorise la circulation parodontale et réduit le risque de maladies parodontales.
 - Assure un nettoyage buccal rapide et efficace en seulement 45 secondes, encourageant les enfants à se brosser les dents avec plaisir.
 - La petite tête de brosse convient aux enfants de 2 à 6 ans, tandis que la tête moyenne convient aux enfants à partir de 6 ans.
-

PRÉSENTATION DES COMPOSANTS DU PRODUIT

La structure du produit est illustrée dans la figure :

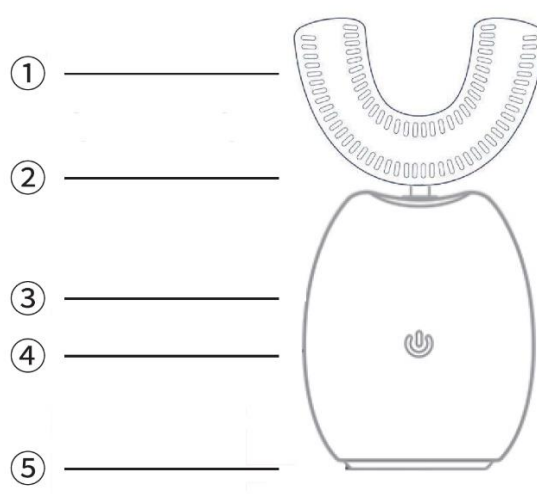

1. Tête de brosse en silicone antibactérien en forme de U
2. Lumière LED
3. Corps de la brosse à dents

4. Bouton marche / fonction
5. Port de charge

MODE DE FONCTIONNEMENT


Appuyez sur le bouton marche/fonction pour changer le mode de fonctionnement :

- **Mode nettoyage** : 15 000 mouvements/minute, lumière bleue allumée
- **Mode blanchiment** : 10 000 mouvements/minute, lumière bleue allumée
- **Mode massage** : 11 000 mouvements/minute, lumière bleue allumée

État de charge :

- Lumière rouge fixe indique que l'appareil est en cours de charge
- Lumière bleue fixe indique que l'appareil est entièrement chargé

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

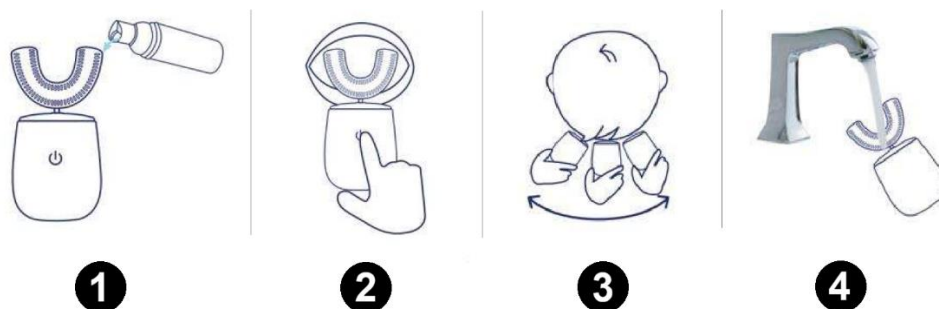


1. Appliquez uniformément un dentifrice en mousse sur les deux côtés de la tête de brosse en forme de U.
2. Placez la brosse dans la bouche et positionnez doucement les dents dans les rainures. Ne mordez pas trop fort.
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer la brosse. Déplacez doucement l'appareil de gauche à droite pour un meilleur nettoyage.
4. Après utilisation, rincez la brosse à dents à l'eau courante et séchez-la.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Insérez l'extrémité DC du câble de charge verticalement dans le port de charge situé en bas de la brosse. Connectez l'extrémité USB à un adaptateur secteur.

Pendant la charge, la lumière LED de l'appareil clignote. La lumière s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

MÉTHODE DE REMPLACEMENT DE LA TÊTE DE BROSSE

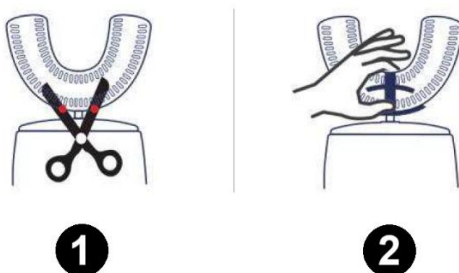

Insérez soigneusement des ciseaux dans la fente située à la base de la tête de brosse (axe). Appliquez une pression uniforme des deux côtés et soulevez doucement vers le haut.

Sinon, tenez fermement la tête de brosse avec le pouce et l'index et tirez-la lentement vers l'extérieur.

PRÉCAUTIONS

- La température de fonctionnement normale est comprise entre 0°C et 50°C.
- Chargez le produit à température ambiante et assurez-vous que l'appareil est sec. Utilisez une alimentation jusqu'à 5V / 1A.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le et déchargez-le au moins une fois tous les trois mois.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil.
- Après le brossage, rincez la tête de brosse à l'eau propre et secouez doucement l'excès d'eau. Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau.
- L'appareil a une puissance de sortie élevée ; ne l'utilisez pas en continu pendant plus de 10 minutes.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.