

GR: TOOFY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο: QCS-H168

Μπαταρία: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Είσοδος: 5V / 1A, 0.5W


Σημείωση: Κατάλληλο για παιδιά άνω των 3 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πλήρως αδιάβροχος και σφραγισμένος σχεδιασμός (IPX7), που εξασφαλίζει ευκολία, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό.
 - Κεφαλή βούρτσας σε σχήμα U από μαλακή, αντιβακτηριακή σιλικόνη κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα. Παρέχει επαφή 360° με τα ούλα και τα δόντια για γρήγορο και άνετο βούρτσισμα.
 - Βοηθά στην προστασία των ούλων, προάγει την περιοδοντική κυκλοφορία και μειώνει τον κίνδυνο περιοδοντικών παθήσεων.
 - Παρέχει γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό του στόματος σε μόλις 45 δευτερόλεπτα, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απολαμβάνουν το βούρτσισμα.
 - Η μικρή κεφαλή είναι κατάλληλη για παιδιά 2–6 ετών, ενώ η μεσαία κεφαλή είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 6 ετών.
-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η δομή του προϊόντος παρουσιάζεται στο σχήμα:

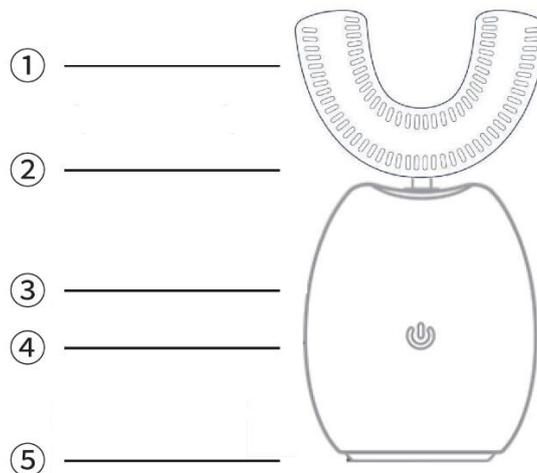

1. Αντιβακτηριακή κεφαλή σιλικόνης σε σχήμα U
2. Φως LED

3. Σώμα οδοντόβουρτσας
 4. Κουμπί ενεργοποίησης / λειτουργιών
 5. Θύρα φόρτισης
-

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργίας για να αλλάξετε τη λειτουργία:

- **Λειτουργία καθαρισμού:** 15.000 κινήσεις/λεπτό, μπλε φως ενεργό
- **Λειτουργία λεύκανσης:** 10.000 κινήσεις/λεπτό, μπλε φως ενεργό
- **Λειτουργία μασάζ:** 11.000 κινήσεις/λεπτό, μπλε φως ενεργό

Κατάσταση φόρτισης:

- Σταθερό κόκκινο φως υποδηλώνει ότι η συσκευή φορτίζεται
 - Σταθερό μπλε φως υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

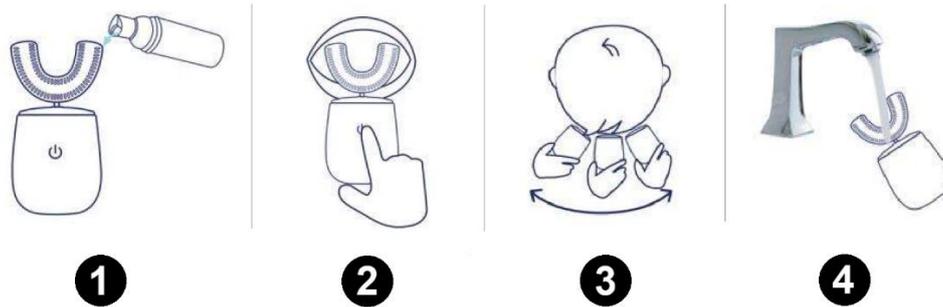

1. Εφαρμόστε ομοιόμορφα αφρώδη οδοντόκρεμα και στις δύο πλευρές της κεφαλής σε σχήμα U.
 2. Τοποθετήστε τη βούρτσα στο στόμα και προσαρμόστε απαλά τα δόντια στις αυλακώσεις. Μην δαγκώνετε πολύ δυνατά.
 3. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η οδοντόβουρτσα. Μετακινήστε απαλά τη συσκευή από τη μία πλευρά στην άλλη για καλύτερο καθαρισμό.
 4. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε τη βούρτσα με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε την.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ


Εισάγετε το άκρο DC του καλωδίου φόρτισης κάθετα στη θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος της οδοντόβουρτσας. Συνδέστε το άκρο USB σε έναν προσαρμογέα ρεύματος.

Κατά τη φόρτιση, το φως LED στη συσκευή αναβοσβήνει. Το φως σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



1

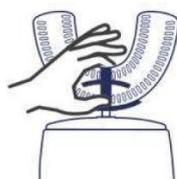

2

Εισάγετε προσεκτικά ένα ψαλίδι στην υποδοχή στο κάτω μέρος της κεφαλής (άξονας). Εφαρμόστε ομοιόμορφη πίεση και στις δύο πλευρές και σηκώστε απαλά προς τα πάνω.

Εναλλακτικά, κρατήστε σταθερά την κεφαλή με τον αντίχειρα και τον δείκτη και τραβήξτε την αργά προς τα έξω.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0°C έως 50°C.
- Φορτίζετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή. Χρησιμοποιήστε τροφοδοσία έως 5V / 1A.
- Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε και αποφορτίστε το τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος και αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο.
- Μετά το βούρτσισμα, ξεπλύνετε την κεφαλή με καθαρό νερό και τινάξτε απαλά το περίσσιο νερό. Αποφύγετε τη βύθιση της συσκευής στο νερό.
- Η συσκευή έχει υψηλή ισχύ εξόδου· μην τη χρησιμοποιείτε συνεχόμενα για περισσότερο από 10 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.