

# HR: TOOFY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

---

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

**Model:** QCS-H168

**Baterija:** Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

**Ulaz:** 5V / 1A, 0.5W

**Napomena:** Prikladno za djecu stariju od 3 godine


---

## ZNAČAJKE PROIZVODA

- Potpuno voodootporan i zatvoren dizajn (IPX7), koji osigurava praktičnost, dugotrajnost i jednostavno čišćenje.
  - U-oblikovana glava četkice izrađena od mekog, antibakterijskog silikona za prehrambenu upotrebu. Omogućuje kontakt od 360° s desni i zubima za brzo i ugodno četkanje.
  - Pomaže u zaštiti desni, potiče cirkulaciju u parodontu i smanjuje rizik od parodontnih bolesti.
  - Omogućuje brzo i učinkovito čišćenje usne šupljine u samo 45 sekundi, potičući djecu da rado peru zube.
  - Mala glava četkice prikladna je za djecu od 2–6 godina, dok je srednja glava prikladna za djecu od 6 godina i starije.
- 

## PREGLED DIJELOVA PROIZVODA

Struktura proizvoda prikazana je na slici:

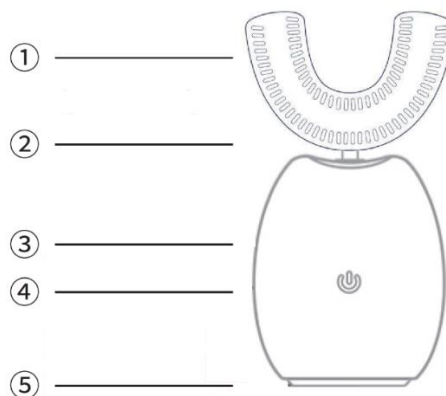

1. Antibakterijska U-oblikovana silikonska glava četkice
  2. LED svjetlo
  3. Tijelo četkice za zube
  4. Tipka za uključivanje / funkcije
  5. Priključak za punjenje
-

## NAČIN RADA

Pritisnite tipku za uključivanje/funkciju kako biste promijenili način rada:


- **Način čišćenja:** 15.000 puta/minuti, plavo svjetlo uključeno
- **Način izbjeljivanja:** 10.000 puta/minuti, plavo svjetlo uključeno
- **Način masaže:** 11.000 puta/minuti, plavo svjetlo uključeno

Status punjenja:

- Stalno crveno svjetlo označava da se uređaj puni
- Stalno plavo svjetlo označava da je uređaj potpuno napunjen

---

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

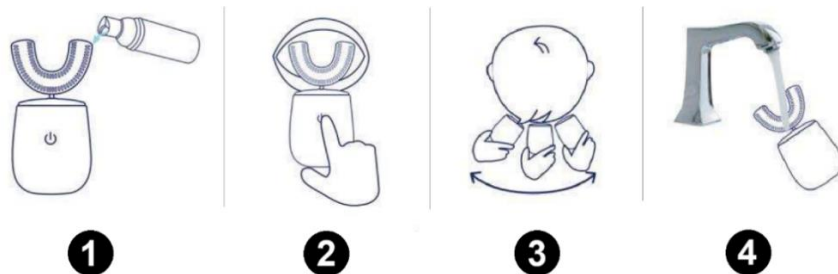

1. Ravnomjerno nanesite pjenastu pastu za zube na obje strane U-oblikovane glave četkice.
2. Stavite četkicu u usta i nježno postavite zube u utore. Nemojte prejako gristi.
3. Pritisnite tipku za pokretanje četkice. Lagano pomičite uređaj lijevo-desno za bolje čišćenje.
4. Nakon upotrebe isperite četkicu pod tekućom vodom i obrišite je do suhog.

---


## UPUTE ZA PUNJENJE

Umetnite DC kraj kabela za punjenje okomito u priključak za punjenje na dnu četkice. USB kraj spojite na adapter za napajanje.

Tijekom punjenja LED svjetlo na uređaju pulsira. Svjetlo se gasi kada je baterija potpuno napunjena.

---

## NAČIN ZAMJENE GLAVE ČETKICE

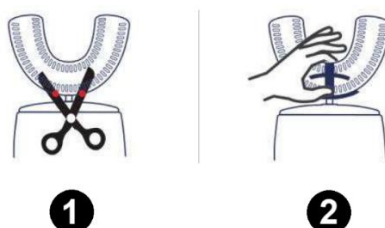

Pažljivo umetnite škare u utor na dnu glave četkice (osovine). Ravnomjerno pritisnite s obje strane i nježno podignite prema gore.

Alternativno, čvrsto primite glavu četkice palcem i kažiprstom te je polako izvucite.

---

#### **MJERE OPREZA**

- Normalna radna temperatura je od 0°C do 50°C.
  - Puniti proizvod na sobnoj temperaturi i osigurajte da je uređaj suh. Koristite napajanje do najviše 5V / 1A.
  - Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, napunite i ispraznite ga barem jednom svaka tri mjeseca.
  - Čuvajte proizvod na hladnom i suhom mjestu te izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
  - Nakon četkanja isperite glavu četkice čistom vodom i lagano otesite višak vode. Izbjegavajte potapanje uređaja u vodu.
  - Uređaj ima visoku izlaznu snagu; nemojte ga koristiti neprekidno dulje od 10 minuta.
- 

#### **UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:**



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.