

HU: TOOFY – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK

Modell: QCS-H168

Akkumulátor: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Bemenet: 5V / 1A, 0.5W


Megjegyzés: 3 éves kortól ajánlott

TERMÉK JELLEMZŐK

- Teljesen vízálló és zárt kialakítás (IPX7), amely kényelmet, tartósságot és könnyű tisztíthatóságot biztosít.
 - U alakú kefefej puha, élelmszeripari minőségű antibakteriális szilikonból. 360°-os érintkezést biztosít az ínnyel és a fogakkal a gyors és kényelmes tisztítás érdekében.
 - Segít megvédeni az ínyt, elősegíti a parodontális vérkeringést és csökkenti a parodontális betegségek kockázatát.
 - Gyors és hatékony szájhygiéniai tisztítást biztosít mindössze 45 másodperc alatt, ösztönözve a gyermekeket a fogmosásra.
 - A kis kefefej 2–6 éves gyermekek számára alkalmas, míg a közepes kefefej 6 éves kortól ajánlott.
-

A TERMÉK ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE

A termék felépítése az ábrán látható:

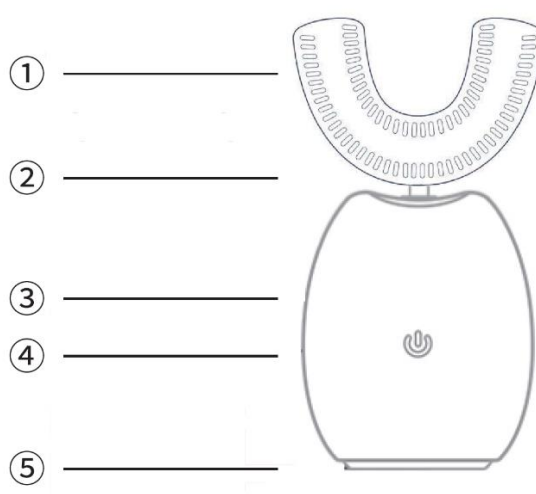

1. Antibakteriális U alakú szilikon kefefej
2. LED fény
3. Fogkefe teste

4. Be-/kikapcsoló / funkció gomb
5. Töltőcsatlakozó

MŰKÖDÉSI MÓD


Nyomja meg a be-/kikapcsoló/funkció gombot az üzemmód váltásához:

- **Tisztító mód:** 15 000 mozgás/perc, kék fény bekapcsolva
- **Fehérítő mód:** 10 000 mozgás/perc, kék fény bekapcsolva
- **Masszázs mód:** 11 000 mozgás/perc, kék fény bekapcsolva

Töltési állapot:

- Folyamatos piros fény jelzi, hogy a készülék töltés alatt áll
- Folyamatos kék fény jelzi, hogy a készülék teljesen feltöltött

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

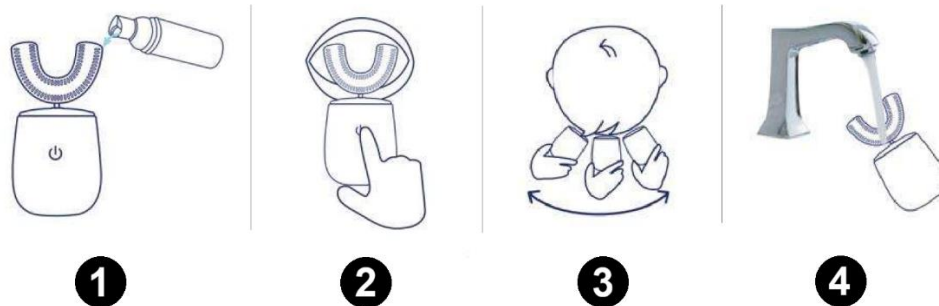


1. Egyenletesen vigyen fel habzó fogkrémet az U alakú kefefej mindkét oldalára.
2. Helyezze a kefét a szájba, és finoman illessze a fogakat a vájatokba. Ne harapjon túl erősen.
3. Nyomja meg a gombot a fogkefe elindításához. Finoman mozgassa az eszközt oldalirányban a jobb tisztítás érdekében.
4. Használat után öblítse le a fogkefét folyó víz alatt, majd törölje szárazra.

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Csatlakoztassa a töltőkábel DC végét függőlegesen a fogkefe alján található töltőportba. A USB végét csatlakoztassa egy hálózati adapterhez.

Töltés közben a készüléken lévő LED fény pulzál. A fény kialszik, amikor az akkumulátor teljesen feltöltött.

A KEFEFEJ CSERÉJÉNEK MÓDJA

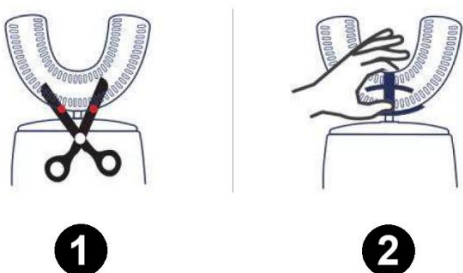

Óvatosan helyezzen ollót a kefefej alján lévő nyílásba (tengely). Egyenletes nyomást gyakoroljon mindkét oldalra, majd finoman emelje felfelé.

Alternatív megoldásként fogja meg erősen a kefefejet hüvelyk- és mutatóujjával, és lassan húzza ki.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A normál üzemi hőmérséklet 0°C és 50°C között van.
- A terméket szobahőmérsékleten töltsen, és győződjön meg róla, hogy a készülék száraz. Legfeljebb 5V / 1A tápellátást használjon.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, legalább háromhavonta egyszer töltsen fel és merítse le.
- Tárolja a terméket hűvös, száraz helyen, és kerülje a közvetlen napfényt.
- Fogmosás után öblítse le a kefefejet tiszta vízzel, és finoman rázza le a felesleges vizet. Kerülje a készülék vízbe merítését.
- A készülék nagy kimeneti teljesítménnyel rendelkezik; ne használja folyamatosan 10 percnél tovább.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.