

IT: TOOFY – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello: QCS-H168

Batteria: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Ingresso: 5V / 1A, 0.5W


Avvertenza: Adatto a bambini dai 3 anni in su

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Design completamente impermeabile e sigillato (IPX7), che garantisce praticità, durata e facilità di pulizia.
 - Testina a forma di U realizzata in silicone morbido antibatterico per uso alimentare. Offre un contatto a 360° con gengive e denti per una pulizia rapida e confortevole.
 - Aiuta a proteggere le gengive, favorisce la circolazione parodontale e riduce il rischio di malattie parodontali.
 - Garantisce una pulizia orale rapida ed efficace in soli 45 secondi, incoraggiando i bambini a lavarsi i denti con piacere.
 - La testina piccola è adatta per bambini dai 2 ai 6 anni, mentre quella media è adatta per bambini dai 6 anni in su.
-

DESCRIZIONE DEGLI ACCESSORI DEL PRODOTTO

La struttura del prodotto è illustrata nella figura:

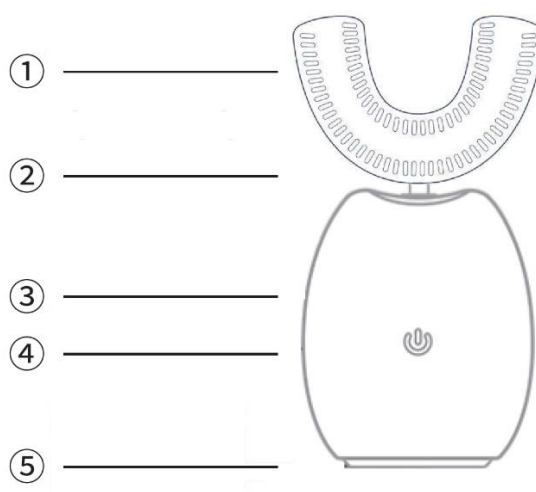

1. Testina in silicone antibatterico a forma di U
2. Luce LED
3. Corpo dello spazzolino

4. Pulsante di accensione / funzione
5. Porta di ricarica

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO


Premere il pulsante di accensione/funzione per cambiare modalità di lavoro:

- **Modalità pulizia:** 15.000 movimenti/minuto, luce blu accesa
- **Modalità sbiancamento:** 10.000 movimenti/minuto, luce blu accesa
- **Modalità massaggio:** 11.000 movimenti/minuto, luce blu accesa

Stato di ricarica:

- Luce rossa fissa indica che il dispositivo è in carica
- Luce blu fissa indica che il dispositivo è completamente carico

ISTRUZIONI PER L'USO

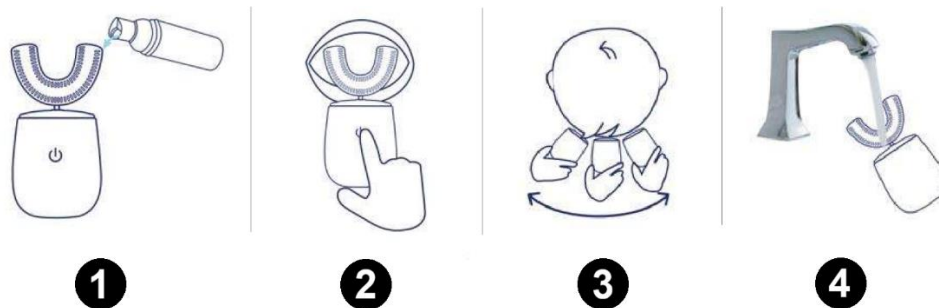


1. Applicare uniformemente il dentifricio in schiuma su entrambi i lati della testina a forma di U.
2. Inserire lo spazzolino in bocca e posizionare delicatamente i denti nelle scanalature. Non mordere troppo forte.
3. Premere il pulsante per avviare lo spazzolino. Muovere delicatamente il dispositivo da un lato all'altro per una pulizia migliore.
4. Dopo l'uso, sciacquare lo spazzolino sotto acqua corrente e asciugarlo.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Inserire l'estremità DC del cavo di ricarica verticalmente nella porta di ricarica alla base dello spazzolino. Collegare l'estremità USB a un adattatore di alimentazione.

Durante la ricarica, la luce LED sul dispositivo pulsa. La luce si spegne quando la batteria è completamente carica.

METODO DI SOSTITUZIONE DELLA TESTINA

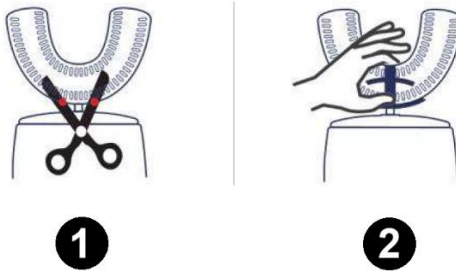

Inserire con cautela delle forbici nella fessura alla base della testina (asse). Applicare una pressione uniforme su entrambi i lati e sollevare delicatamente verso l'alto.

In alternativa, afferrare saldamente la testina con pollice e indice ed estrarla lentamente.

PRECAUZIONI

- La temperatura di funzionamento normale è compresa tra 0°C e 50°C.
- Caricare il prodotto a temperatura ambiente e assicurarsi che il dispositivo sia asciutto. Utilizzare un'alimentazione fino a un massimo di 5V / 1A.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo e scaricarlo almeno una volta ogni tre mesi.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto ed evitare la luce solare diretta.
- Dopo la pulizia, sciacquare la testina con acqua pulita e scuotere delicatamente l'acqua in eccesso. Evitare di immergere il dispositivo in acqua.
- Il dispositivo ha un'elevata potenza in uscita; non utilizzarlo continuamente per più di 10 minuti.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.