

LT: TOOFY – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Modelis: QCS-H168

Baterija: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Ivestis: 5V / 1A, 0.5W


Pastaba: Tinka vaikams nuo 3 metų

PRODUKTO SAVYBĖS

- Visiškai vandeniui atsparus ir sandarus dizainas (IPX7), užtikrinantis patogumą, ilgaamžiškumą ir lengvą valymą.
 - U formos šepetėlio galvutė, pagaminta iš minkšto, antibakterinio, maistui tinkamo silikono. Užtikrina 360° kontaktą su dantenomis ir dantimis, leidžiant greitai ir patogiai valyti.
 - Padeda apsaugoti danteną, gerina periodonto kraujotaką ir mažina periodonto ligų riziką.
 - Užtikrina greitą ir efektyvų burnos valymą vos per 45 sekundes, skatindama vaikus mėgautis dantų valymu.
 - Maža galvutė tinka 2–6 metų vaikams, o vidutinė galvutė tinka vaikams nuo 6 metų ir vyresniems.
-

PRODUKTO KOMPONENTŲ APŽVALGA

Produkto struktūra pavaizduota paveikslėlyje:

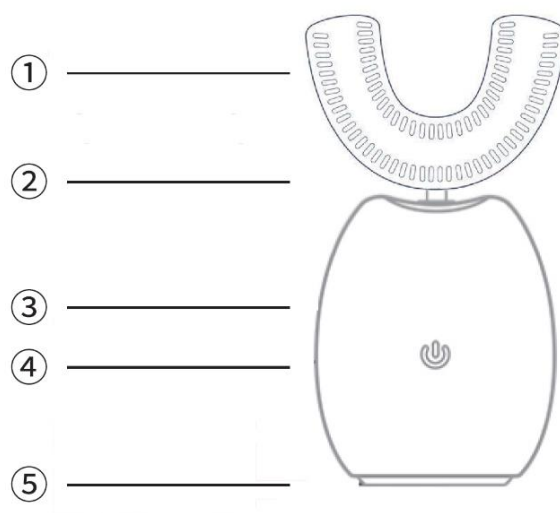

1. Antibakterinė U formos silikoninė šepetėlio galvutė
2. LED šviesa
3. Dantų šepetėlio korpusas

4. Įjungimo / funkcijų mygtukas
 5. Įkrovimo lizdas
-

VEIKIMO REŽIMAS


Paspauskite įjungimo/funkcijų mygtuką, kad pakeistumėte veikimo režimą:

- **Valymo režimas:** 15 000 judesių/min., įjungta mėlyna šviesa
- **Balinimo režimas:** 10 000 judesių/min., įjungta mėlyna šviesa
- **Masažo režimas:** 11 000 judesių/min., įjungta mėlyna šviesa

Įkrovimo būseną:

- Nuolat šviečianti raudona šviesa rodo, kad įrenginys kraunamas
 - Nuolat šviečianti mėlyna šviesa rodo, kad įrenginys visiškai įkrautas
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

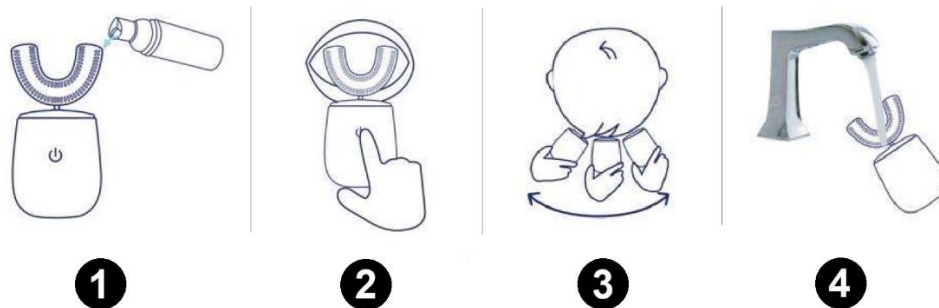


1. Tolygiai užtepkite putojančią dantų pastą ant abiejų U formos galvutės pusių.
 2. Įdėkite šepetėlį į burną ir švelniai įstatykite dantis į griovelius. Nekąskite per stipriai.
 3. Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte šepetėlį. Švelniai judinkite įrenginį į šonus, kad geriau išvalytumėte.
 4. Po naudojimo nuplaukite šepetėlį po tekančiu vandeniu ir nusausinkite.
-

ĮKROVIMO INSTRUKCIJA

Įstatykite įkrovimo kabelio DC galą vertikaliai į įkrovimo lizdą šepetėlio apačioje. USB galą prijunkite prie maitinimo adapterio.

Įkrovimo metu LED šviesa pulsuoja. Šviesa išsijungia, kai baterija visiškai įkrauta.

ŠEPETĖLIO GALVUTĖS KEITIMO BŪDAS

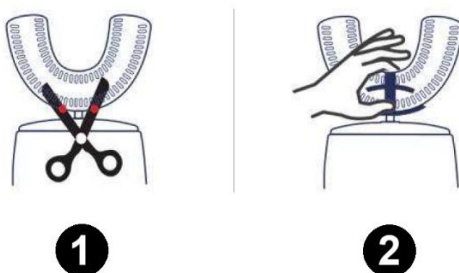

Atsargiai įkiškite žirkles į angą galvutės apačioje (ašyje). Tolygiai spauskite iš abiejų pusių ir švelniai pakelkite aukštyn.

Arba tvirtai suimkite galvutę nykščiu ir smiliumi ir lėtai ją ištraukite.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprasta darbo temperatūra yra nuo 0°C iki 50°C.
- Kraukite gaminį kambario temperatūroje ir įsitikinkite, kad įrenginys yra sausas. Naudokite maitinimo šaltinį iki 5V / 1A.
- Jei gaminys ilgą laiką nenaudojamas, įkraukite ir iškraukite jį bent kartą per tris mėnesius.
- Laikykite gaminį vėsioje ir sausoje vietoje, venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Po valymo nuplaukite galvutę švariu vandeniu ir švelniai nukratykite perteklinį vandenį. Venkite panardinti įrenginį į vandenį.
- Įrenginys turi didelę išeigos galią; nenaudokite jo nepertraukiamai ilgiau nei 10 minučių.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.