

LV: TOOFY – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modelis: QCS-H168

Akumulators: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Ieeja: 5V / 1A, 0.5W


Piezīme: Piemērots bērniem no 3 gadu vecuma

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- Pilnībā ūdensizturīgs un noslēgts dizains (IPX7), kas nodrošina ērtu lietošanu, izturību un vieglu tīrīšanu.
 - U-veida birstes galviņa, izgatavota no mīksta, antibakteriāla silikona, kas piemērots saskarei ar pārtiku. Nodrošina 360° kontaktu ar smaganām un zobiem ātrai un ērtai tīrīšanai.
 - Palīdz aizsargāt smaganas, veicina parodontālo asinsriti un samazina parodontālo slimību risku.
 - Nodrošina ātru un efektīvu mutes dobuma tīrīšanu tikai 45 sekundēs, veicinot bērnu vēlmi tīrīt zobus.
 - Mazā galviņa ir piemērota bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem, savukārt vidējā galviņa – bērniem no 6 gadu vecuma.
-

PRODUKTA SASTĀVDAĻU PĀRSKATS

Produkta uzbūve ir parādīta attēlā:

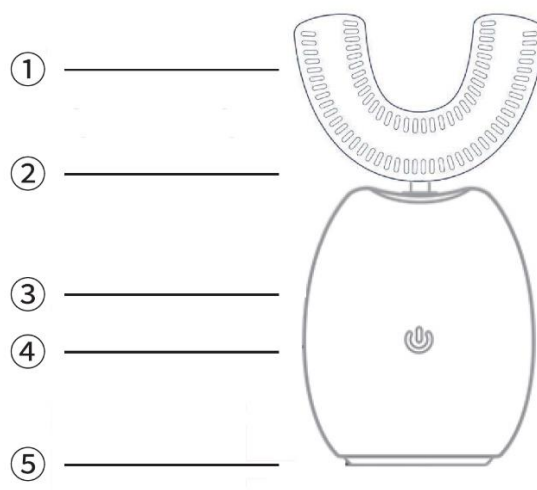

1. Antibakteriāla U-veida silikona birstes galviņa
2. LED gaisma
3. Zobu birstes korpuss

4. Ieslēgšanas / funkciju poga
5. Uzlādes ports

DARBĪBAS REŽĪMS


Nospiediet ieslēgšanas/funkciju pogu, lai mainītu darbības režīmu:

- **Tīrīšanas režīms:** 15 000 kustības/minūtē, zilā gaisma ieslēgta
- **Balināšanas režīms:** 10 000 kustības/minūtē, zilā gaisma ieslēgta
- **Masāžas režīms:** 11 000 kustības/minūtē, zilā gaisma ieslēgta

Uzlādes statuss:

- Pastāvīga sarkana gaisma norāda, ka ierīce tiek uzlādēta
- Pastāvīga zila gaisma norāda, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

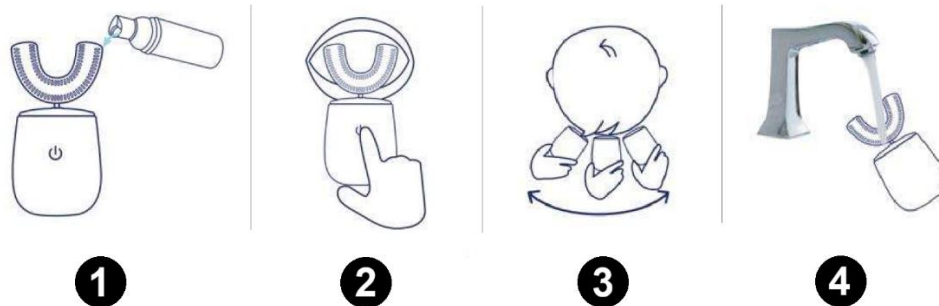

1. Vienmērīgi uzklājiet putojošu zobu pastu uz abām U-veida galviņas pusēm.
2. Ievietojiet birsti mutē un maigi novietojiet zobus rievās. Nekodiet pārāk stipri.
3. Nospiediet pogu, lai ieslēgtu birsti. Viegli kustiniet ierīci no vienas puses uz otru labākai tīrīšanai.
4. Pēc lietošanas noskalojiet birsti zem tekoša ūdens un nosusiniet to.

UZLĀDES INSTRUKCIJA


Ievietojiet uzlādes kabeļa DC galu vertikāli uzlādes portā birstes apakšā. Pievienojiet USB galu strāvas adapterim.

Uzlādes laikā LED gaisma uz ierīces pulsē. Gaisma izslēdzas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

BIRSTES GALVIŅAS NOMAIŅAS VEIDS



1

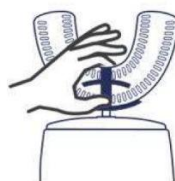

2

Uzmanīgi ievietojiet šķēres spraugā galviņas apakšā (ass daļā). Vienmērīgi spiediet abās pusēs un viegli paceliet uz augšu.

Alternatīvi, stingri satveriet galviņu ar īkšķi un rādītājpirkstu un lēnām izvelciet to.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Normālā darba temperatūra ir no 0°C līdz 50°C.
- Uzlādi veiciet istabas temperatūrā un pārļiecinieties, ka ierīce ir sausa. Izmantojiet strāvas avotu līdz 5V / 1A.
- Ja produkts netiek lietots ilgāku laiku, uzlādējiet un izlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos.
- Glabājiet produktu vēsā un sausā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem.
- Pēc tīrīšanas noskalojiet galviņu ar tīru ūdeni un viegli nokratiet lieko ūdeni. Izvairieties no ierīces iegremdēšanas ūdenī.
- Ierīcei ir augsta izejas jauda; nelietojiet to nepārtraukti ilgāk par 10 minūtēm.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.