

MD: TOOFY – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model: QCS-H168

Baterie: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Intrare: 5V / 1A, 0.5W


Atenționare: Potrivit pentru copii cu vârsta de peste 3 ani

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Design complet impermeabil și etanș (IPX7), care asigură confort, durabilitate și curățare ușoară.
 - Cap de periuță în formă de U realizat din silicon moale antibacterian, de calitate alimentară. Oferă contact la 360° cu gingiile și dinții pentru o periere rapidă și confortabilă.
 - Ajută la protejarea gingiilor, stimulează circulația parodontală și reduce riscul bolilor parodontale.
 - Oferă o curățare orală rapidă și eficientă în doar 45 de secunde, încurajând copiii să se bucure de periaj.
 - Capul mic este potrivit pentru copii cu vârste între 2–6 ani, iar capul mediu este potrivit pentru copii de peste 6 ani.
-

PREZENTAREA COMPONENTELOR PRODUSULUI

Structura produsului este prezentată în figură:

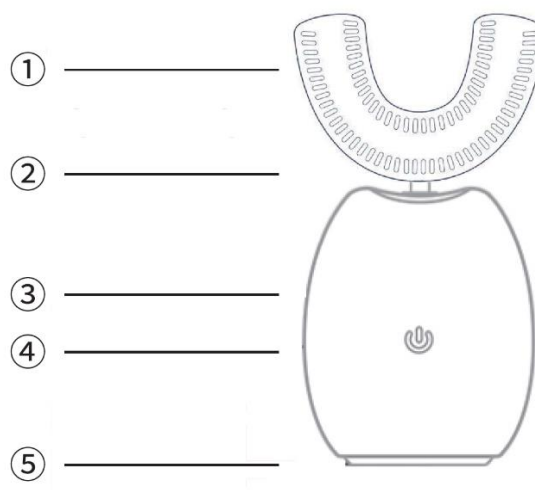

1. Cap de periuță din silicon antibacterian în formă de U
2. Lumină LED
3. Corpul periuței de dinți

4. Buton pornire / funcții
5. Port de încărcare

MOD DE FUNCȚIONARE


Apăsați butonul de pornire/funcție pentru a schimba modul de funcționare:

- **Mod de curățare:** 15.000 mișcări/minut, lumină albastră aprinsă
- **Mod de albire:** 10.000 mișcări/minut, lumină albastră aprinsă
- **Mod de masaj:** 11.000 mișcări/minut, lumină albastră aprinsă

Starea încărcării:

- Lumină roșie continuă indică faptul că dispozitivul se încarcă
- Lumină albastră continuă indică faptul că dispozitivul este complet încărcat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

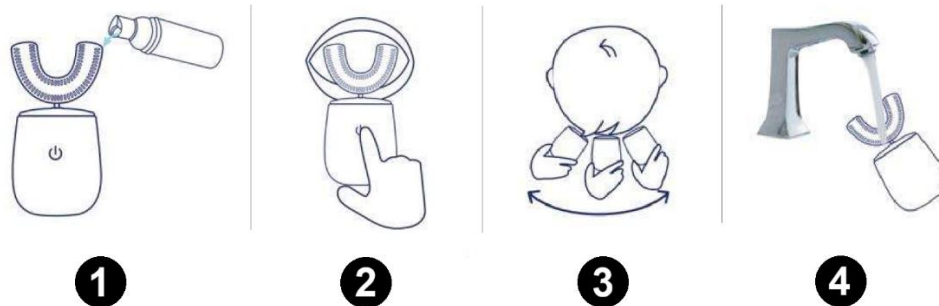

1. Aplicați uniform pastă de dinți spumantă pe ambele părți ale capului în formă de U.
2. Introduceți periuța în gură și poziționați ușor dinții în caneluri. Nu mușcați prea tare.
3. Apăsați butonul pentru a porni periuța. Mișcați ușor dispozitivul dintr-o parte în alta pentru o curățare mai eficientă.
4. După utilizare, clătiți periuța sub apă curentă și ștergeți-o până devine uscată.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Introduceți capătul DC al cablului de încărcare vertical în portul de încărcare din partea inferioară a periuței. Conectați capătul USB la un adaptor de alimentare.

În timpul încărcării, lumina LED de pe dispozitiv pulsează. Lumina se stinge atunci când bateria este complet încărcată.

METODA DE ÎNLOCUIRE A CAPULUI PERIUȚEI



1



2

Introduceți cu grijă o foarfecă în fanta de la baza capului periuței (ax). Aplicați presiune uniformă pe ambele părți și ridicați ușor în sus.

Alternativ, țineți ferm capul periuței cu degetul mare și arătătorul și trageți-l încet în afară.

PRECAUȚII

- Temperatura normală de funcționare este între 0°C și 50°C.
- Încărcați produsul la temperatura camerei și asigurați-vă că dispozitivul este uscat. Utilizați o sursă de alimentare de maximum 5V / 1A.
- Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, încărcați-l și descărcați-l cel puțin o dată la trei luni.
- Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat și evitați lumina directă a soarelui.
- După periaj, clătiți capul periuței cu apă curată și scuturați ușor excesul de apă. Evitați scufundarea dispozitivului în apă.
- Dispozitivul are o putere mare de ieșire; nu îl utilizați continuu mai mult de 10 minute.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.