

NL: TOOFY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Model: QCS-H168

Batterij: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Ingang: 5V / 1A, 0.5W


Opmerking: Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar

PRODUCTKENMERKEN

- Volledig waterdicht en afgesloten ontwerp (IPX7), dat gemak, duurzaamheid en eenvoudige reiniging garandeert.
 - U-vormige borstelkop gemaakt van zacht, antibacterieel siliconen van voedingskwaliteit. Biedt 360° contact met tandvlees en tanden voor snel en comfortabel poetsen.
 - Helpt het tandvlees te beschermen, bevordert de parodontale doorbloeding en vermindert het risico op parodontale aandoeningen.
 - Zorgt voor een snelle en effectieve mondreiniging in slechts 45 seconden en stimuleert kinderen om tandenpoetsen leuk te vinden.
 - De kleine borstelkop is geschikt voor kinderen van 2–6 jaar, terwijl de middelgrote borstelkop geschikt is voor kinderen vanaf 6 jaar.
-

OVERZICHT VAN PRODUCTONDERDELEN

De structuur van het product wordt weergegeven in de afbeelding:

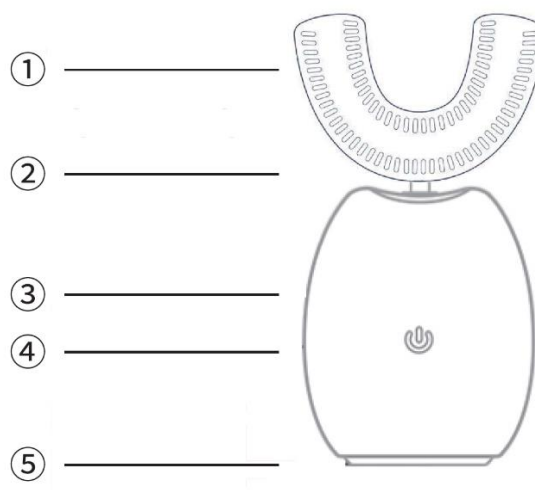

1. Antibacteriële U-vormige siliconen borstelkop
2. LED-licht
3. Behuizing van de tandenborstel

4. Aan/uit- / functieknop
 5. Oplaadpoort
-

BEDIENINGSMODUS


Druk op de aan/uit- / functieknop om de werkmodus te wijzigen:

- **Reinigingsmodus:** 15.000 bewegingen/minuut, blauw licht aan
- **Witmakingsmodus:** 10.000 bewegingen/minuut, blauw licht aan
- **Massagemodus:** 11.000 bewegingen/minuut, blauw licht aan

Oplaadstatus:

- Continu rood licht geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen
 - Continu blauw licht geeft aan dat het apparaat volledig is opgeladen
-

GEBRUIKSINSTRUCTIES

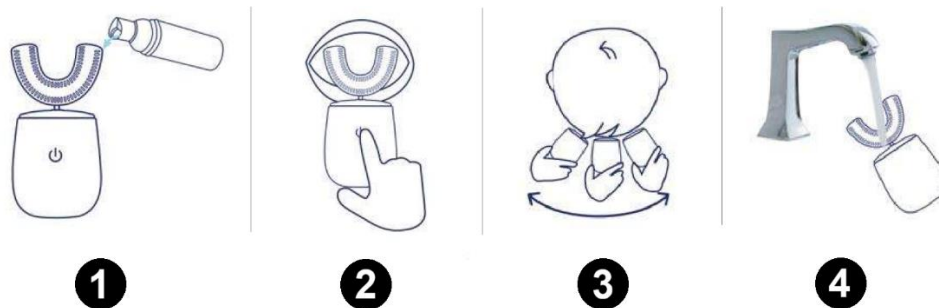


1. Breng schuimende tandpasta gelijkmatig aan op beide zijden van de U-vormige borstelkop.
 2. Plaats de borstel in de mond en positioneer de tanden voorzichtig in de groeven. Niet te hard bijten.
 3. Druk op de knop om de tandenborstel te starten. Beweeg het apparaat zachtjes van links naar rechts voor een betere reiniging.
 4. Spoel de tandenborstel na gebruik af onder stromend water en droog deze af.
-

OPLAADINSTRUCTIES

Steek het DC-uiteinde van de oplaadkabel verticaal in de oplaadpoort aan de onderkant van de tandenborstel. Verbind het USB-uiteinde met een voedingsadapter.

Tijdens het opladen knippert het LED-licht op het apparaat. Het licht gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

METHODE VOOR HET VERVANGEN VAN DE BORSTELKOP

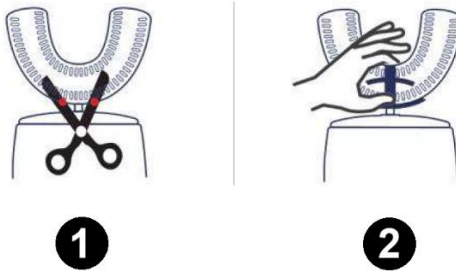

Steek voorzichtig een schaar in de opening aan de onderkant van de borstelkop (as). Oefen gelijkmatige druk uit aan beide zijden en til voorzichtig omhoog.

U kunt ook de borstelkop stevig vastpakken met duim en wijsvinger en deze langzaam eruit trekken.

VOORZORGSMaatregelen

- De normale bedrijfstemperatuur ligt tussen 0°C en 50°C.
- Laad het product op bij kamertemperatuur en zorg ervoor dat het apparaat droog is. Gebruik een voeding tot maximaal 5V / 1A.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, laad en ontlad het dan minstens één keer per drie maanden.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats en vermijd direct zonlicht.
- Spoel de borstelkop na het poetsen met schoon water en schud overtollig water voorzichtig af. Vermijd het onderdompelen van het apparaat in water.
- Het apparaat heeft een hoog uitgangsvermogen; gebruik het niet langer dan 10 minuten continu.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.