

SR (Latn.): TOOFY – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: QCS-H168

Baterija: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Ulaz: 5V / 1A, 0.5W


Napomena: Pogodno za decu stariju od 3 godine

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Potpuno vodootporan i zatvoren dizajn (IPX7), koji obezbeđuje praktičnost, dugotrajnost i lako čišćenje.
 - U-oblikovana glava četkice izrađena od mekog, antibakterijskog silikona za prehrambenu upotrebu. Omogućava kontakt od 360° sa desnim i zubima za brzo i udobno pranje.
 - Pomaže u zaštiti desni, podstiče cirkulaciju u parodontu i smanjuje rizik od parodontalnih oboljenja.
 - Omogućava brzo i efikasno čišćenje usne duplje za samo 45 sekundi, podstičući decu da rado peru zube.
 - Mala glava četkice pogodna je za decu uzrasta 2–6 godina, dok je srednja glava pogodna za decu od 6 godina i starije.
-

PREGLED DELOVA PROIZVODA

Struktura proizvoda prikazana je na slici:

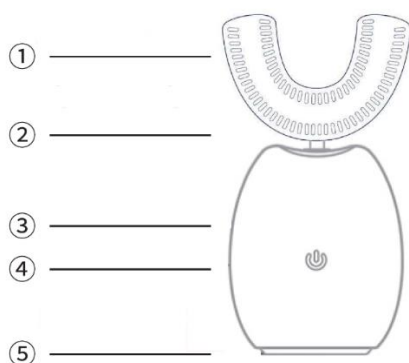

1. Antibakterijska U-oblikovana silikonska glava četkice
 2. LED svetlo
 3. Telo četkice za zube
 4. Dugme za uključivanje / funkcije
 5. Priključak za punjenje
-

NAČIN RADA


Pritisnite dugme za uključivanje/funkciju da promenite režim rada:

- **Režim čišćenja:** 15.000 puta/minuti, plavo svetlo uključeno
- **Režim izbeljivanja:** 10.000 puta/minuti, plavo svetlo uključeno
- **Režim masaže:** 11.000 puta/minuti, plavo svetlo uključeno

Status punjenja:

- Neprekidno crveno svetlo označava da se uređaj puni
- Neprekidno plavo svetlo označava da je uređaj potpuno napunjen

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

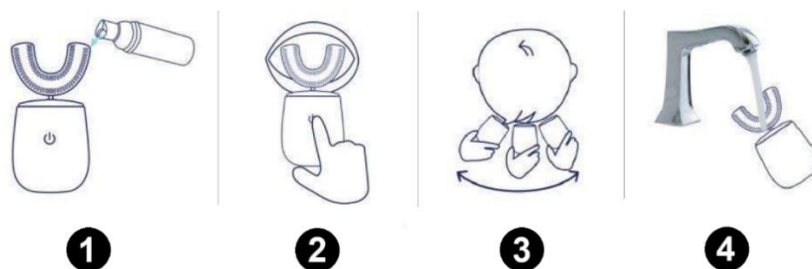


1. Ravnomerno nanesite penastu pastu za zube na obe strane U-oblikovane glave četkice.
2. Stavite četkicu u usta i nežno postavite zube u žlebove. Nemojte prejako gristi.
3. Pritisnite dugme za pokretanje četkice. Lagano pomerajte uređaj levo-desno radi boljeg čišćenja.
4. Nakon upotrebe isperite četkicu pod tekućom vodom i obrišite je do suva.

UPUTSTVO ZA PUNJENJE

Umetnite DC kraj kabla za punjenje vertikalno u priključak za punjenje na dnu četkice. USB kraj povežite sa adapterom za napajanje.

Tokom punjenja LED svetlo na uređaju pulsira. Svetlo se gasi kada je baterija potpuno napunjena.

NAČIN ZAMENE GLAVE ČETKICE

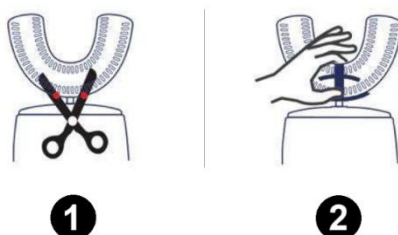

Pažljivo ubacite makaze u otvor na dnu glave četkice (osovine). Ravnomerno pritisnite sa obe strane i lagano podignite nagore.

Alternativno, čvrsto uhvatite glavu četkice palcem i kažiprstom i polako je izvucite.

MERE OPREZA

- Normalna radna temperatura je od 0°C do 50°C.
- Puniti proizvod na sobnoj temperaturi i uverite se da je uređaj suv. Koristite napajanje do najviše 5V / 1A.
- Ako se proizvod ne koristi duže vreme, napunite i ispraznite ga najmanje jednom svaka tri meseca.
- Čuvajte proizvod na hladnom i suvom mestu i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.
- Nakon pranja isperite glavu četkice čistom vodom i lagano otresite višak vode. Izbegavajte potapanje uređaja u vodu.
- Uređaj ima visoku izlaznu snagu; nemojte ga koristiti neprekidno duže od 10 minuta.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): TOOFY – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел: QCS-H168

Батерија: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Улаз: 5V / 1A, 0.5W


Напомена: Погодно за децу старију од 3 године

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА

- Потпуно водоотпоран и затворен дизајн (IPX7), који обезбеђује практичност, дуготрајност и лако чишћење.
 - U-обликована глава четкице израђена од меког, антибактеријског силикона за прехранбену употребу. Омогућава контакт од 360° са деснима и зубима за брзо и удобно прање.
 - Помаже у заштити десни, подстиче циркулацију у пародонту и смањује ризик од пародонталних обољења.
 - Омогућава брзо и ефикасно чишћење усне дупље за само 45 секунди, подстичући децу да радо перу зубе.
 - Мала глава четкице погодна је за децу узраста 2–6 година, док је средња глава погодна за децу од 6 година и старије.
-

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОИЗВОДА

Структура производа приказана је на слици:

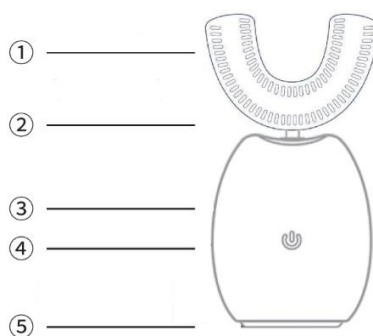

1. Антибактеријска U-обликована силиконска глава четкице
 2. LED светло
 3. Тело четкице за зубе
 4. Дугме за укључивање / функције
 5. Прикључак за пуњење
-

НАЧИН РАДА


Притисните дугме за укључивање/функцију да промените режим рада:

- **Режим чишћења:** 15.000 пута/минут, плаво светло укључено
- **Режим избељивања:** 10.000 пута/минут, плаво светло укључено
- **Режим масаже:** 11.000 пута/минут, плаво светло укључено

Статус пуњења:

- Непрекидно црвено светло означава да се уређај пуни
- Непрекидно плаво светло означава да је уређај потпуно напуњен

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

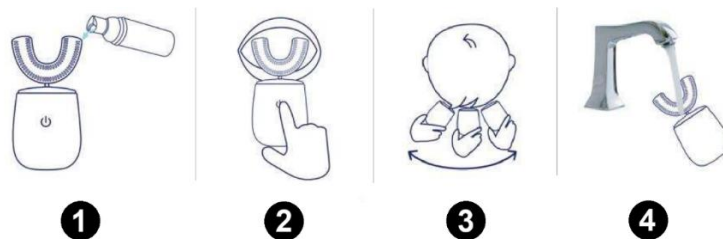


1. Равномерно нанесите пенасту пасту за зубе на обе стране U-обликоване главе четкице.
2. Ставите четкицу у уста и нежно поставите зубе у жлебове. Немојте прејако гризити.
3. Притисните дугме за покретање четкице. Лагано померајте уређај лево-десно ради бољег чишћења.
4. Након употребе исперите четкицу под текућом водом и обришите је до сувог.

УПУТСТВО ЗА ПУЊЕЊЕ

Уметните DC крај кабла за пуњење вертикално у прикључак за пуњење на дну четкице. USB крај повежите са адаптером за напајање.

Током пуњења LED светло на уређају пулсира. Светло се гаси када је батерија потпуно напуњена.

НАЧИН ЗАМЕНЕ ГЛАВЕ ЧЕТКИЦЕ

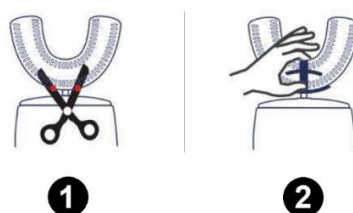

Пажљиво убаците маказе у отвор на дну главе четкице (осовине). Равномерно притисните са обе стране и лагано подигните нагоре.

Алтернативно, чврсто ухватите главу четкице палцем и кажипрстом и полако је извуците.

МЕРЕ ОПРЕЗА

- Нормална радна температура је од 0°C до 50°C.
- Пуните производ на собној температури и уверите се да је уређај сув. Користите напајање до највише 5V / 1A.
- Ако се производ не користи дуже време, напуните и испразните га најмање једном свака три месеца.
- Чувајте производ на хладном и сувом месту и избегавајте директну сунчеву светлост.
- Након прања исперите главу четкице чистом водом и лагано отресите вишак воде. Избегавајте потапање уређаја у воду.
- Уређај има високу излазну снагу; немојте га користити непрекидно дуже од 10 минута.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније