

SI: TOOFY – NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model: QCS-H168

Baterija: Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

Vhodna napetost: 5V / 1A, 0.5W


Omejitev odgovornosti: Primerno za otroke, stare 3 leta in več

LASTNOSTI IZDELKA

- Popolnoma vodoodporna in zatesnjena zasnova (IPX7), ki zagotavlja priročnost, vzdržljivost in enostavno čiščenje.
 - U-oblikovana glava ščetke iz mehkega, antibakterijskega silikona za živilsko uporabo. Omogoča 360° stik z dlesni in zobmi za hitro in udobno ščetkanje.
 - Pomaga zaščititi dlesni, spodbuja prekrvavitev obzobnih tkiv in zmanjšuje tveganje za parodontalne bolezni.
 - Zagotavlja hitro in učinkovito čiščenje ustne votline v samo 45 sekundah ter spodbuja otroke k rednemu ščetkanju.
 - Majhna glava ščetke je primerna za otroke od 2–6 let, srednja pa za otroke od 6 let naprej.
-

PREDSTAVITEV DODATKOV IZDELKA

Struktura izdelka je prikazana na sliki:

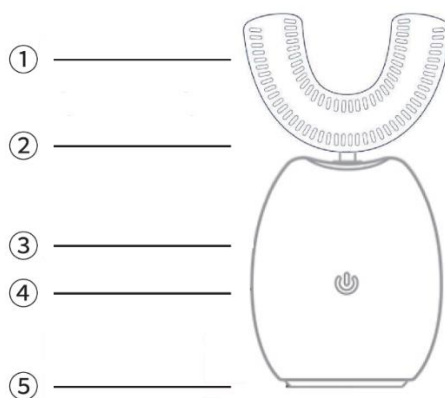

1. Antibakterijska U-oblikovana silikonska glava ščetke
 2. LED lučka
 3. Ohišje zobne ščetke
 4. Gumb za vklop / funkcije
 5. Polnilni priključek
-

NAČIN DELOVANJA


Pritisnite gumb za vklop/funkcijo za spremembo načina delovanja:

- **Način čiščenja:** 15.000 gibov/minuto, modra lučka sveti
- **Način beljenja:** 10.000 gibov/minuto, modra lučka sveti
- **Način masaže:** 11.000 gibov/minuto, modra lučka sveti

Stanje polnjenja:

- Neprekinjena rdeča lučka pomeni, da se naprava polni
- Neprekinjena modra lučka pomeni, da je naprava popolnoma napolnjena

NAVODILA ZA UPORABO

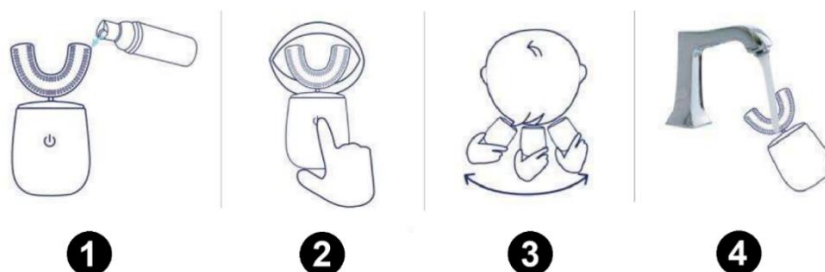


1. Enakomerno nanesite penasto zobno pasto na obe strani U-oblikovane glave ščetke.
2. Vstavite ščetko v usta in nežno namestite zobe v utore. Ne grizite premočno.
3. Pritisnite gumb za zagon ščetke. Napravo nežno premikajte levo in desno za boljše čiščenje.
4. Po uporabi ščetko sperite pod tekočo vodo in jo obrišite do suhega.

NAVODILA ZA POLNJENJE

Vstavite DC konec polnilnega kabla navpično v polnilni priključek na dnu zobne ščetke. USB konec priključite na napajalni adapter za polnjenje.

Med polnjenjem LED lučka na ohišju utripa. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se lučka ugasne.

NAČIN MENJAVE GLAVE ŠČETKE

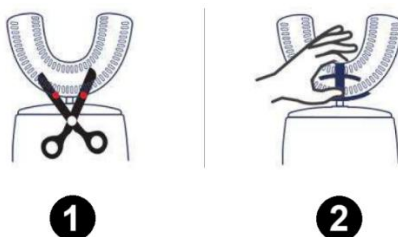

Previdno vstavite škarje v režo na dnu glave ščetke (osi). Enakomerno pritisnite na obe strani in nežno dvignite navzgor.

Lahko pa glavo ščetke trdno primete s palcem in kazalcem ter jo počasi izvlečete.

VARNOSTNI UKREPI

- Normalna delovna temperatura je od 0°C do 50°C.
- Izdelek polnite pri sobni temperaturi in zagotovite, da je naprava suha. Uporabite napajalnik z nazivno vrednostjo največ 5V / 1A.
- Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga vsaj enkrat na tri mesece napolnite in izpraznite.
- Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu ter se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
- Po ščetkanju glavo ščetke sperite s čisto vodo in nežno stresite odvečno vodo. Izogibajte se namakanju naprave v vodi.
- Naprava ima visoko izhodno moč; ne uporabljajte je neprekinjeno več kot 10 minut.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.