

# SK: TOOFY – NÁVOD NA POUŽITIE

---

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

**Model:** QCS-H168

**Batéria:** Li-ion 3.7V, 150mAh, 0.555Wh

**Vstup:** 5V / 1A, 0.5W

**Upozornenie:** Vhodné pre deti od 3 rokov


---

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- Plne vodotesný a utesnený dizajn (IPX7), ktorý zabezpečuje pohodlie, odolnosť a jednoduché čistenie.
  - Hlavica kefy v tvare U vyrobená z mäkkého antibakteriálneho silikónu vhodného pre kontakt s potravinami. Poskytuje 360° kontakt s ďasnami a zubami pre rýchle a pohodlné čistenie.
  - Pomáha chrániť ďasná, podporuje parodontálnu cirkuláciu a znižuje riziko parodontálnych ochorení.
  - Zabezpečuje rýchle a účinné čistenie ústnej dutiny za iba 45 sekúnd a motivuje deti k čisteniu zubov.
  - Malá hlavica je vhodná pre deti vo veku 2–6 rokov, zatiaľ čo stredná hlavica je vhodná pre deti od 6 rokov a viac.
- 

## PREHĽAD SÚČASTÍ PRODUKTU

Štruktúra produktu je znázornená na obrázku:

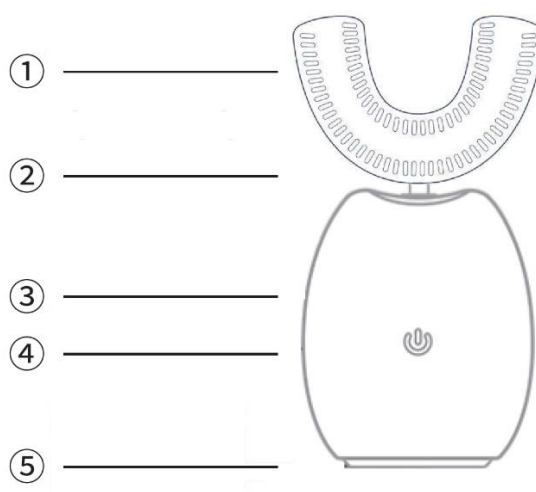

1. Antibakteriálna silikónová hlavica v tvare U
2. LED svetlo
3. Telo zubnej kefy

4. Tlačidlo zapnutia / funkcie
5. Nabíjací port

---

## REŽIM PREVÁDZKY

Stlačte tlačidlo zapnutia/funkcie na zmenu režimu:


- **Režim čistenia:** 15 000 pohybov/minútu, modré svetlo zapnuté
- **Režim bielenia:** 10 000 pohybov/minútu, modré svetlo zapnuté
- **Režim masáže:** 11 000 pohybov/minútu, modré svetlo zapnuté

Stav nabíjania:

- Trvalé červené svetlo znamená, že zariadenie sa nabíja
- Trvalé modré svetlo znamená, že zariadenie je plne nabité

---

## NÁVOD NA POUŽITIE

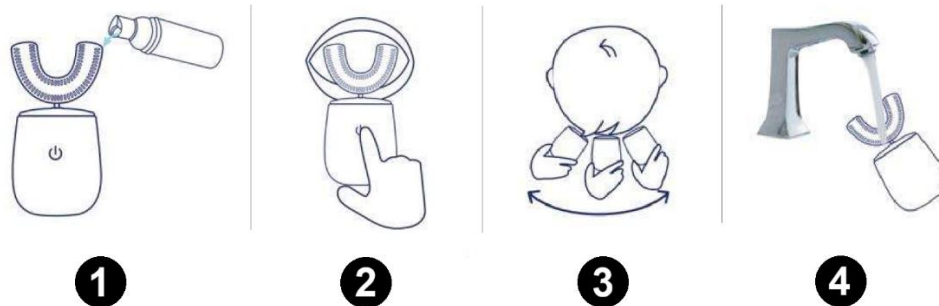

1. Naneste rovnomerne penovú zubnú pastu na obe strany hlavice v tvare U.
2. Vložte kefku do úst a jemne umiestnite zuby do drážok. Nehryzte príliš silno.
3. Stlačte tlačidlo na spustenie kefky. Jemne pohybujte zariadením zo strany na stranu pre lepšie čistenie.
4. Po použití kefku opláchnite pod tečúcou vodou a osušte ju.

---


## POKYNY NA NABÍJANIE

Zasuňte DC koniec nabíjacieho kábla zvislo do nabíjacieho portu na spodnej časti kefky. USB koniec pripojte k napájacímu adaptéru.

Počas nabíjania LED svetlo na zariadení pulzuje. Svetlo zhasne, keď je batéria úplne nabitá.

---

## SPÔSOB VÝMENY HLAVICE KEFKY

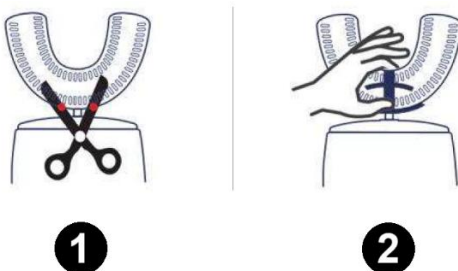

Opatrne vložte nožnice do otvoru na spodnej časti hlavice (osi). Rovnomerne zatlačte na obe strany a jemne zdvihnite nahor.

Alternatívne uchopte hlavicu pevne palcom a ukazovákom a pomaly ju vytiahnite.

---

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Bežná prevádzková teplota je od 0°C do 50°C.
- Nabíjajte produkt pri izbovej teplote a uistite sa, že je zariadenie suché. Používajte napájanie maximálne 5V / 1A.
- Ak sa produkt nepoužíva dlhší čas, nabite a vybite ho aspoň raz za tri mesiace.
- Skladujte produkt na chladnom a suchom mieste a vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Po čistení opláchnite hlavicu čistou vodou a jemne straste prebytočnú vodu. Vyhnite sa ponoreniu zariadenia do vody.
- Zariadenie má vysoký výstupný výkon; nepoužívajte ho nepretržite dlhšie ako 10 minút.

---

## POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.