

SI: TOOTHCLEANSO - NAVODILA ZA UPORABO

PRIPOMOČEK ZA IZDELEK

- A. Močan pulzni tok učinkovito očisti bakterije, zobne madeže, nečistoče in delce hrane z vseh delov ustne votline.
- B. Izjemno fini vodni tok doseže dlesni in globino zob ter brez oviranja izboljša zdravje dlesni.
- C. Učinkovito odstranjuje najbolj trdovratne zobne obloge z zobne površine in je pri tem učinkovitejši od običajne zobne nitke.
- D. Zagotavlja hitro čiščenje ustne votline, tako doma kot pri obedovanju, da hitro obnovi čistočo ustne votline.
- E. Odličen za čiščenje okoli ortodontskih pripomočkov, vsadkov in vinilk.
- F. Pomaga spodbujati zdrave vsakodnevne navade ustne higijene ter tako ohranja zobe sveže in čiste.


VARNOST IZDELKA IN UPORABNIKA

- Pred uporabo natančno preberite ta priročnik, da se izognete poškodbam ali poškodbam zaradi nepravilnega delovanja.
- Izdelka ne razstavljajte sami, saj lahko pride do poškodb ali električnega udara.
- V posodi za vodo ne uporabljajte vode s temperaturo nad 40 °C, da preprečite opekline.
- Če izdelek med polnjenjem slučajno pade v vodo, ga takoj izključite iz električnega omrežja in pred ponovnim polnjenjem zagotovite, da je popolnoma suh.
- Če je napajalni kabel ali vtič poškodovan, pred ponovno uporabo zamenjajte napajalnik.
- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam ali ga ne postavljajte v ogenj, saj lahko baterija eksplodira.
- Izdelek uporabljajte izključno za čiščenje ustne votline.
- Da preprečite poškodbe, pršilnika ne pritiskajte močno ob dlesni ali zobe.
- Izdelka ne potaplajte v vodo, saj lahko to povzroči okvaro.
- Izdelka ne uporabljajte v preveč vročih ali vlažnih okoljih.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga prenehajte uporabljati.
- Pred uporabo se prepričajte, da je razpršilnik nameščen.
- Nekaterе vrste ustne vode so lahko jedke; pred uporabo preverite sestavine.
- Za zagotovitev varne uporabe nadzorujte otroke, starejše uporabnike ali osebe, ki izdelka ne poznajo.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok in dojenčkov. To ni igrača.
- Če imate parodontalno bolezen, ste imeli v zadnjih dveh mesecih kirurški poseg v ustni votlini ali imate druge težave z ustnim zdravjem, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.
- Izogibajte se uporabi močnega načina na dlesnih, ki lahko krvavijo ali so že vnete.
- Intenzivnost pulznega toka prilagodite glede na stanje ustne votline.
- Celotnega aparata ne potaplajte v vodo, saj lahko to povzroči okvaro ali popolno poškodbo izdelka.
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, poskrbite, da rezervoar za vodo izpraznite in posušite, da preprečite rast bakterij.

PARAMETRI IZDELKA

Neto teža	235g	Polnilni tok	1A
Zmogljivost rezervoarja	230 ml	Nazivna napetost	3.7V
Napetost polnjenja:	5V	Nazivna moč	3.5W

PREGLED IZDELKA

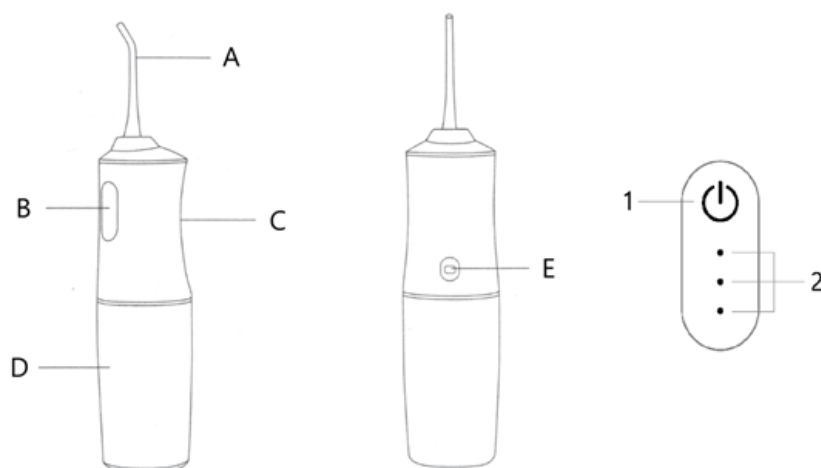


- A. Tušna glava
- B. Nadzorna plošča
- C. Ročaj za oprijem
- D. Rezervoar za vodo
- E. vmesnik za polnjenje

Vmesnik:

1. Vklop/izklop/nastavitev merilnika (tri stopnje)
2. Indikatorji prestav (šibka, močna, impulzna)

Priključki za šobe:

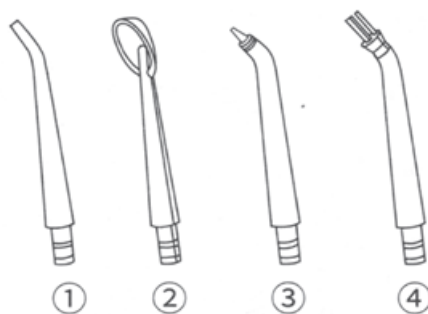

1. Standardna šoba - primerna za vsakodnevno čiščenje
2. Šoba za prevleko jezika - specializirana za čiščenje jezika
3. Šoba za čiščenje parodontalnih žepov - Za čiščenje parodontalnih žepov
4. Ortodontska šoba - idealna za čiščenje zobnih aparatov

NAČIN DELOVANJA

Na kratko pritisnite gumb za vklop, da ga vklopite; privzeti način je šibek način, pri čemer se prižge ustrezna indikatorska lučka. Na kratko pritisnite gumb, da preklopite načine: iz šibkega v močan in nato v pulzni način. Indikatorska lučka se bo ustrezno spremenila. Za izklop naprave pritisnite in 2 sekundi držite gumb za vklop. Naprava se samodejno izklopi po 2 minutah uporabe. Med polnjenjem bodo tri indikatorske lučke zaporedoma utripale, po polnem polnjenju pa bodo ostale prižgane vse tri.

KAKO UPORABLJATI





1. Napravo napolnite, preden jo prvič uporabite.
2. Varno vstavite ustrezen nastavek, da med uporabo ne pride do iztekanja.
3. Odstranite posodo za vodo in jo napolnite z vodo ali ustno vodo.
4. Količino vode ali ustne vode prilagodite glede na svoje potrebe.
5. Namestite šobo v usta in jo usmerite na področje, ki ga želite očistiti.
6. Po uporabi odstranite ostanke vode iz rezervoarja.

PRAVILNA METODA ČIŠČENJA ZOB

Izberite ustrezno prestavo, pri čemer je priporočljivo začeti z najnižjo nastavitvijo. Postopoma poiščite prestavo, ki ustreza vašemu udobju in potrebam. Pri čiščenju vstavite šobo v usta in jo usmerite v zobe ali dlesni. Usta imejte rahlo odprta, da voda nemoteno izteka.

Izpiranje dlesni začnite tako, da šobo usmerite na najbolj notranji zob (na primer na položaj 1 ali 4). Počasi se premikajte vzdolž dlesni v isti smeri. Ko dosežete zadnji zob, obrnite šobo in nadaljujte z izpiranjem od znotraj v nasprotni smeri (na primer od položajev 2 ali 3), dokler ne očistite dlesni okoli zadnjega zoba. Enak postopek izvajajte za nasprotno vrsto zob.

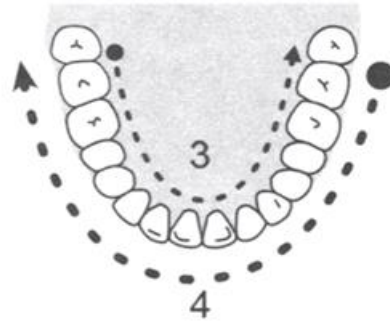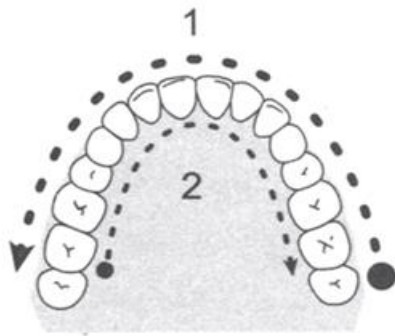

NASVETI ZA PRVE UPORABNIKE:

- Stomatološki strokovnjaki priporočajo, da prvi teden uporabljate nežen način. Nato preklopite na običajni način.
- Za učinkovito uporabo upoštevajte naslednje korake:
 - a. Usmerite tok vode pravokotno na zobe ali dlesni.
 - b. Počasi se premikajte vzdolž zob.
 - c. Nastavite šobo navpično na dlesni.
 - d. Temeljito očistite zobe, zobne aparate, krone in proteze.
- Ne usmerjajte vode neposredno v parodontalne žepe za daljši čas, saj to lahko povzroči nelagodje.



VZDRŽEVANJE

- A. Za čiščenje izdelka uporabite vlažno krpo in jo osušite z mehko krpo ali papirnato brisačo.
- B. Izdelka ne potopite v vodo.
- C. Izdelka ne čistite z vodo, ki je toplejša od 50 °C.
- D. Izogibajte se upogibanju, raztezanju ali zvijanju cevi škropilnice.
- E. Šobo je priporočljivo zamenjati vsake 3 mesece.
- F. Če izdelka dalj časa ne uporabljate, izpraznite rezervoar za vodo in izdelek shranite na hladnem in suhem mestu.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

NAPAKA	MOŽNA VZROKA	REŠITEV
Naprava se ne vklopi	Nov nakup ali neuporabljen 3 mesece ali več	Napolnite za 4 ure in poskusite znova.
Slab pritisk vode	Šoba je blokirana ali upognjena	Zamenjajte šobo

NAPAKA	MOŽNA VZROKA	REŠITEV
Kratka življenjska doba baterije	Baterija je na koncu življenjske dobe	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom
Indikator polnjenja ne deluje	Napajanje ni pravilno priključeno ali je uporabljen napačen adapter	Ponovno priključite napajanje ali zamenjajte adapter
Ni pršenja vode	Šoba je zamašena ali je predolgo ostala v mirovanju	Očistite šobo in poskusite znova

ODSTRANJEVANJE AKUMULATORSKE BATERIJE

1. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo za ponovno polnjenje, ki lahko onesnažuje okolje. Ustrezno jo odstranite tako, da odstranite baterijo.
2. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je naprava izklopljena.
3. Če želite odstraniti baterijo, odprite pokrov izdelka in izvlecite baterijo.
4. Litijevo baterijo odvrzite v določenem centru za recikliranje baterij.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.