

CUPPY - VAKUUM MASSAGEGERÄT



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.



Bitte lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

LIEFERUMFANG:

TEHNISCHE DATEN:

Ladespannung: DC 5V
Betriebsspannung: 3,7 V
Strom: 8W

Eigenschaften

- Unterdruck-Gravitation
 - A.) Aerobic-Übung zum Ansaugen des Fettgewebes der Haut.
 - B.) Regt die Lymphfähigkeit und die Blutzirkulation an.
 - C.) Ausscheidung von Giftstoffen über das Lymphsystem.
 - D.) Abschabende Wirkung.
- Thermische Energie
 - A.) Kollagen wird durch den thermischen Effekt erzeugt.
 - B.) Kontinuierliche Wärme, entspannt den Geist, löst den Druck.
- Magnetwellen-Therapie
 - A.) Hilft beim Abklingen der Schwellung, beseitigt Schwellungen und Schmerzen.

B.) Reduziert die Müdigkeit und trägt zur körperlichen Erholung bei.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Wenn auf Ihrer Haut diverse Venen zu sehen sind, sollten Sie das Gerät nicht verwenden.
2. Nicht in der Schwangerschaft oder während der Monatsblutung verwenden.
3. Nicht direkt nach einer Mahlzeit verwenden.
4. Die behandelte Hautpartie darf nicht mit Wasser, Lotion, Seife oder Sonne in Berührung kommen.
5. Verwenden Sie das Gerät stets in der gleichen Richtung.
6. Je nach Hautbeschaffenheit nur in täglichen Abständen anwenden.
7. Bleiben Sie nicht länger als 1 Minute auf der gleichen Stelle; und wenn Sie ein Unbehagen verspüren, hören Sie bitte auf, das Gerät länger zu benutzen.
8. Menschen mit Hautallergien, schwangere Frauen, Herzinfarktpatienten, Menschen mit anormalem Blutdruck, bösartigen Tumoren, zerebrovaskulären Erkrankungen und Menschen mit Fremdkörpern sollten dieses Produkt nicht verwenden.

HINWEIS: Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Bei der Verwendung muss vorsichtig vorgegangen werden.

TEILE:


- 1 Ein/Aus-Taste
- 2 Heiztaste
- 3 Unterdrucktaste
- 4 LCD-Anzeige
- 5 Zeittaste



GEBRAUCH

Hinweis:

★ Bevor Sie das Gerät benutzen, müssen Sie die Filterwatte in den Filterstopfen stecken (Abbildung 1), und dann den Filterstopfen in die Ansaugöffnung des Geräts stecken (Abbildung 2). Sie kann das ätherische Öl oder Massageprodukte direkt im Gerät effektiv zurückhalten. Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts effektiv. (Tauschen Sie die Filterwatte nach jedem Gebrauch aus, die Filterwatte wird luftgetrocknet und kann wiederverwendet werden).

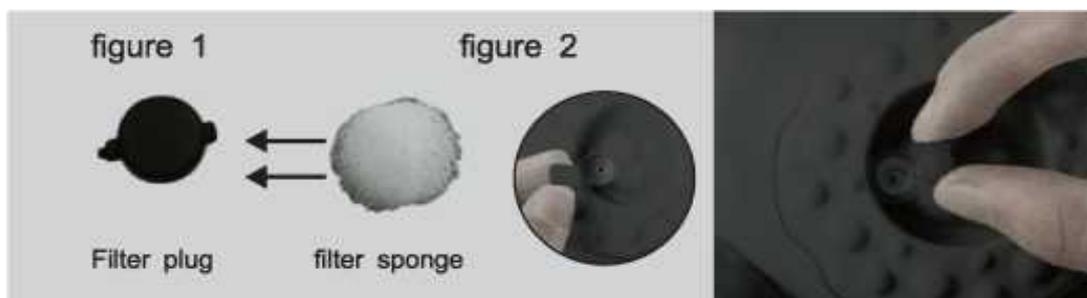

1. Tragen Sie nach der Reinigung der Haut eine kleine Menge ätherisches Öl auf.

2. Laden Sie das Gerät zunächst vollständig auf.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, woraufhin die Digitalanzeige leuchtet. Jetzt können Sie die "Heizung" und den "Unterdruck" je nach den Bedürfnissen des Kunden einstellen.
4. Drücken Sie die Heiztaste, es gibt die Temperaturstufen 1-9, je größer die Zahl, desto höher die Temperatur.
5. Drücken Sie die Unterdrucktaste, es gibt die Unterdruckstufen 1-9. Je größer die Zahl, desto stärker ist der Unterdruck.
6. Drücken Sie nach der Verwendung des Geräts die Ein/Aus-Taste in der Mitte, um das Gerät auszuschalten. Reinigen Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

Hinweis: Die Standardbetriebszeit des Geräts beträgt 20 Minuten. Nach 20 Minuten schaltet es sich automatisch ab, wodurch die Lebensdauer des Geräts effektiv verlängert wird.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Produkts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Händler können das Produkt umweltgerecht entsorgen.



Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.

Vertriebshändler: HS Plus, d.o.o

Herkunftsland: China