

CUPPY – VAKUUMSKI MASAŽER



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Draga korisnice, dragi korisniče,
Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.



Prije upotrebe uređaja pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

PAKIRANJE UKLUČUJE:

TEHNIČKI PODACI:

Napon punjenja: DC 5 V

Radni napon: 3,7 V

Napajanje: 8 W

Značajke

■ Gravitacija negativnog tlaka

- A.) Aerobna vježba za isisavanje masnog tkiva kože.
- B.) Povećava funkciju limfnog sustava i cirkulaciju krvi.
- C.) Postiže se izlučivanje toksina kroz cirkulaciju limfe.
- D.) Efekt struganja.

■ Toplinska energija

- A.) Kolagen iz kortikalne kosti povećava se djelovanjem topline.
- B.) Kontinuirano zagrijavajte pomaže da odmorite tijelo i otpustite pritisak.

■ Terapija magnetskim valovima

- A.) Pomaže u ublažavanju otekline, uklanja otekline i bol.
- B.) Uklanja umor, pomaže tjelesni oporavak.

SIGURNOSNE MJERE

1. Ako su vene vidljive na vašoj koži, ne smijete upotrebljavati uređaj.
2. Nemojte ga upotrebljavati ni ako ste trudni ili tijekom mjesečnice.
3. Nemojte upotrebljavati uređaj neposredno nakon konzumiranja obroka.
4. Ne izlažite tretirani dio kože vodi, losionima, sapunu, suncu...
5. Uređaj obavezno upotrebljavajte uvijek u istom smjeru.
6. Upotrebljavajte ga u dnevnim intervalima, ovisno o stanju kože.
7. Nemojte zadržavati masažer na istom mjestu dulje od 1 minute. Ako osjetite bilo kakvu nelagodu, prestanite upotrebljavati uređaj.
8. Osobe s alergijama na koži, trudnice, pacijenti s bolestima srca, osobe koje pate od povišenog ili sniženog krvnog tlaka, osobe sa zloćudnim tumorima, cerebrovaskularnim bolestima i osobe s ugrađenim pomagalicama obavezno trebaju izbjegavati upotrebu ovog proizvoda.

NAPOMENA: Površina uređaja je vruća. Korisnik mora biti oprezan tijekom upotrebe masažera.

DIJELOVI:


- 1 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 2 Gumb za zagrijavanje
- 3 Gumb za negativni tlak
- 4 LCD zaslon
- 5 Gumb za vrijeme



UPOTREBA

Napomena:

★ Prije upotrebe uređaja treba staviti pamučni filtar u čep filtra (slika 1), a zatim čep filtra umetnuti u usisni otvor na uređaju (slika 2). Može učinkovito blokirati esencijalna ulja ili proizvode za masažu i zadržati ih unutar uređaja. Time se produžava vijek trajanja uređaja. (Zamijenite pamučni filtar nakon svake upotrebe. Pamučni filtar suši se na zraku i može se ponovno upotrijebiti.)

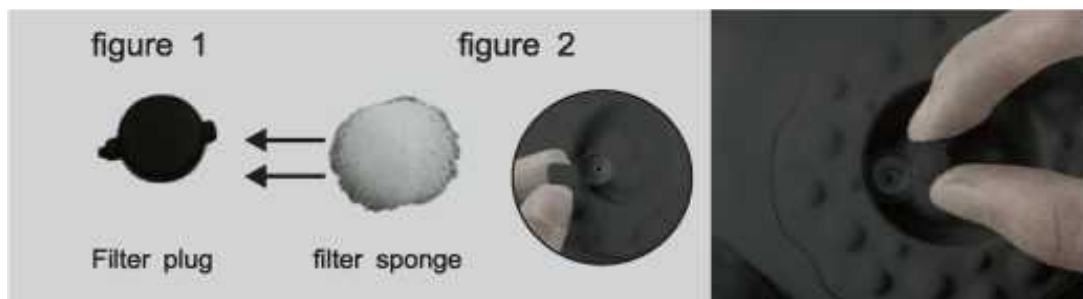

1. Nakon čišćenja nanosite malu količinu esencijalnog ulja na kožu.
2. Najprije u potpunosti napunite uređaj.
3. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i aktivirat će se digitalno svjetlo. U tom trenutku možete prilagoditi postavke „zagrijavanje“ i „negativni tlak“ u skladu sa svojim željama.

4. Temperatura je podijeljena u rasponu od 1 do 9, pa se svakim pritiskom gumba za zagrijavanje temperatura povećava.
5. Negativni tlak je podijeljen u rasponu od 1 do 9 i mijenja se pritiskom gumba za negativni tlak. Svakim pritiskom gumba negativni tlak se povećava.
6. Nakon upotrebe uređaja pritisnite srednji gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj, nakon čega ga očistite i spremite na suho mjesto.

Napomena: Zadano radno vrijeme uređaja je 20 minuta i automatski će se isključiti nakon 20 minuta, čime se produžuje životni vijek instrumenta.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.

Distributer: HS Plus d.o.o

Zemlja porijekla: Kina