

CUPPY - MASSAJADOR A VÁCUO



MANUAL DO UTILIZADOR

Estimado(a) cliente,
Obrigado por adquirir o nosso produto.



Por favor, leia as instruções antes de manusear o dispositivo e guarde-as para referência futura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

DADOS TÉCNICOS:

Tensão de carregamento: CC 5 V

Tensão de funcionamento: 3,7 V

Potência: 8 W

Características

- Gravitação de pressão negativa
 - A.) Exercício aeróbico para aspirar o tecido oleoso da pele.
 - B.) Aumento da função linfática e a circulação sanguínea.
 - C.) Excreção de toxinas através da circulação linfática.
 - D.) Efeito de raspagem.

- Energia térmica
 - A.) O colágeno cortical é cultivado pelo efeito térmico.
 - B.) Calor contínuo, relaxa o espírito, liberta a pressão.

- Terapia por ondas magnéticas
 - A.) Ajuda a diminuição do inchaço, elimina o inchaço e a dor.
 - B.) Elimina a fadiga, ajuda na recuperação física.

PRECAUÇÕES

1. Se a sua pele tem várias nervuras, não deve ser usado.
2. Não usar se estiver grávida ou durante o período menstrual.
3. Não usar diretamente após uma refeição.
4. Não expor a parte da pele tratada a quaisquer exposições como água, creme, sabonetes, sol...
5. Quando usar, siga a mesma direção.
6. Utilizar apenas com intervalos diários, dependendo do estado da pele.
7. Não fique no mesmo lugar durante mais de 1 minuto; e, se sentir algum desconforto, por favor, pare de usá-lo continuamente.
8. Pessoas com alergias de pele, mulheres grávidas, doentes cardíacos, pessoas que sofrem de tensão arterial anormal, tumor maligno, doença cerebrovascular e pessoas com objetos estranhos devem evitar o uso deste produto.

NOTA: O dispositivo tem uma superfície quente. Deve-se ter cuidado ao usar.

PEÇAS:


- 1 Botão de alimentação
- 2 Botão de aquecimento
- 3 Botão de pressão negativa
- 4 Ecrã LCD
- 5 Botão de tempo



UTILIZAÇÃO

Nota:

★ Antes de utilizar o instrumento, tem de colocar o filtro de algodão na tampa do filtro (Figura 1) e, em seguida, colocar a tampa do filtro no orifício de sucção do instrumento (Figura 2). Pode bloquear eficazmente o óleo essencial ou massajar os produtos diretamente no instrumento. Prolongue eficazmente a vida útil do instrumento. (Substitua o algodão do filtro após cada utilização, o algodão do filtro é seco ao ar e pode ser reutilizado).

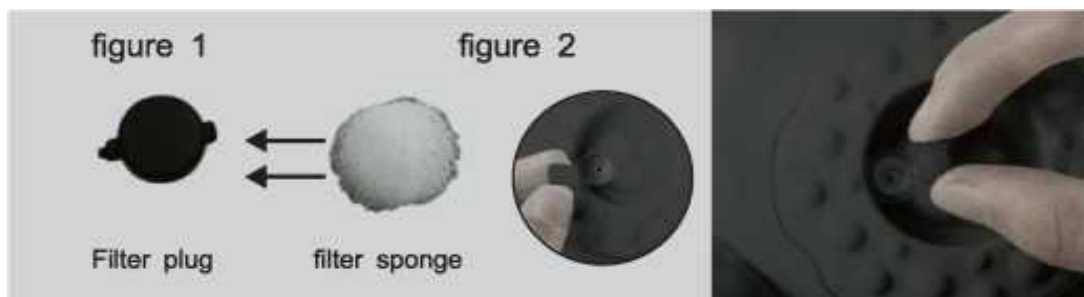

1. Depois de limpar a pele, aplique uma pequena quantidade de óleo essencial.
2. Carregue totalmente o instrumento primeiro.

3. Prima o botão de ligação e a luz digital acenderá. Neste momento, pode ajustar o "aquecimento" e a "pressão negativa" de acordo com as necessidades do cliente.
4. Prima o botão de "calor", a temperatura é dividida em 1-9 ajustes, cada um para cima, quanto mais alta for a temperatura.
5. Prima o botão de "pressão negativa", a "pressão negativa" é dividida em 1-9 ajustes. Para cada ajuste para cima, a pressão negativa aumenta.
6. Depois de utilizar o instrumento, prima o botão de alimentação do meio para desligar o instrumento, limpe-o e coloque-o num local seco.

Nota: O tempo de trabalho padrão do instrumento é de 20 minutos, a máquina suspende automaticamente o instrumento durante 20 minutos, podendo ser usado, o que pode efetivamente prolongar a vida útil do instrumento.

Instruções de reciclagem e de eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Estes podem tornar este produto ambientalmente seguro para reciclagem.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

Distribuidor: HS Plus d.o.o

País de origem: China