

## CUPPY – MASAŽNI APARAT ZA VAKUUMSKO TERAPIJO



### UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,  
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.



Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite, da jih boste lahko uporabili tudi v prihodnje.

### PAKET VSEBUJE:

### TEHNIČNI PODATKI:

Polnilna napetost : DC 5 V

Delovna napetost: 3,7 V

Napajanje: 8 W

#### Lastnosti

- Negativni pritisk gravitacije
  - A.) Aerobna vadba za vakuumsko sesanje maščobnega tkiva.
  - B.) Izboljšuje limfno drenažo in prekrvavitev.
  - C.) Odvajanje toksinov s pomočjo limfne cirkulacije.
  - D.) Piling učinek.
  
- Toplotna energija
  - A.) S pomočjo toplote nastaja kolagen.
  - B.) Neprekinjena toplota za sproščen duh v sproščnem telesu.
  
- Terapija z magnetnim valovanjem
  - A.) Lajša otekanje, zmanjšuje otekline in bolečine.
  - B.) Pospešuje regeneracijo telesa in zmanjšuje utrujenost.

## PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Ne uporabljajte, če imate na koži preveč vidnih žil.
2. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali menstruacijo.
3. Ne uporabljajte takoj po jedi.
4. Zmasiranega dela kože ne izpostavljajte dražilcem, kot so voda, kreme, mila, sonce,...
5. Pri uporabi se držite pravil.
6. Uporabljajte v intervalih, glede na stanje vaše kože.
7. Posameznega predela ne masirajte dlje kot 1 minuto; če začutite nelagodje, pa z redno uporabo prenehajte.
8. Odsvetujemo uporabo izdelka bolnikom s kožnimi alergijami, nosečnicam, srčnim bolnikom, bolnikom z visokim krvnim tlakom, malignimi tumorji, cerebrovaskularno boleznijo in tujki v telesu.

**OPOMBA:** Površina naprave je vroča. Uporabljajte previdno.


## DELI:

- 1 gumb za vklop
- 2 gumb za segrevanje
- 3 gumb za negativni pritisk
- 4 LCD zaslon
- 5 gumb za nastavitev časa

## UPORABA

### Opomba:

★ Preden pričnete z uporabo naprave, v nastavek za filter vstavite bombažni filter (slika 1), nato pa nastavek za filter namestite na prisesek naprave (slika 2). Ta lahko učinkovito prepreči zahajanje eteričnega olja ali drugih masažnih izdelkov v notranjost naprave. Na učinkovit način podaljšajte življenjsko dobo naprave. (Bombažni filter po vsaki uporabi zamenjajte, mogoče ga je posušiti na zraku in ga ponovno uporabiti).

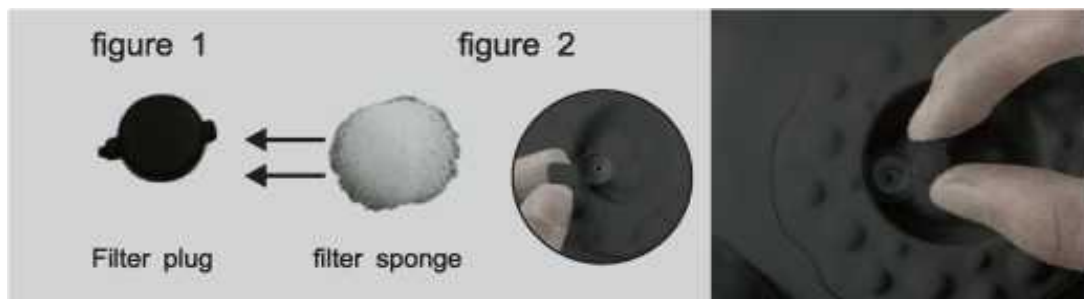

1. Ko kožo očistite, nanjo nanesite majhno količino eteričnega olja.
2. Napravo najprej napolnite.
3. Pritisnite gumb za vklop in prižgala se bo digitalna lučka. Zdaj lahko stopnjo "segrevanja" in "negativni pritisk" prilagodite v skladu s potrebami stranke.

4. Pritisnite gumb za "segrevanje". Nastavitve temperature so označene s števkami od 1 do 9 - višja številka pomeni višjo temperaturo.
5. Pritisnite gumb za "negativni pritisk". Nastavitve negativnega pritiska so označene s števkami od 1 do 9. Višja nastavitev pomeni višji negativni pritisk.
6. Ko z uporabo naprave prenehate, pritisnite sredinski gumb za izklop in tako napravo izklopite, nato pa jo očistite in shranite na suho mesto.

**Opomba:** Privzet čas delovanja naprave je 20 minut, po pretečenih 20 minutah pa se bo naprava samodejno ugasnila, kar bo učinkovito podaljšalo njeno življenjsko dobo.

---

### Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

Distributer: HS Plus d.o.o.

Država izvora: Kitajska