

EMS МАСАЖОР FOOTPAD



Техническа характеристики:

Име на продукта	EMS масажор за крака
Захранване	Алкална батерия 1,5 V, 2x AAA
Режими на работа	6 (A-F)
Честота	1-100 Hz
Изходящо напрежение	8 mA
Размер	32x29 cm
Тегло	57,4 г

Опаковката съдържа:

Main Device(FRONT) Main Device(REAR)



Foot Mat



Including:

1* Main Device
1* User Manual

1* Foot Mat
2* AAA Batteries(Selection)

Основно устройство (ОТПРЕД)
Основно устройство (ОТЗАД)

Поставка за крака
Включва:
1 * Основно устройство
1 * Ръководство за употреба
1 * Поставка за крака
Батериите AAA не са включени

Устройството се изключва автоматично след 12 минути употреба.

Устройството се изключва автоматично, ако не поставите краката си върху подложката.

Предупреждения:

Този продукт не трябва никога да се използва за облекчаване на недиагностицирана болка. Това не е медицинско изделие. Преди да започнете да лекувате болезнени състояния, моля, консултирайте се с Вашия лекар.

Използвайте на ниско ниво на интензивност и с по-кратка продължителност, за да избегнете свръхстимулация.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци.

Този продукт не е водоустойчив, пазете го от потапяне или контакт с вода.

Не използвайте продуктите, ако имате заболяване на краката или рани в тази област.

Използвайте този продукт само по предназначение.

Използвайте само аксесоари, доставени с продукта.

Не използвайте устройството на места с висока влажност, като например в банята.

Пазете устройството от контакт с какъвто и да е метал, например бижута.

Не използвайте устройството върху други части на тялото и конкретно върху части, които имат татуировка или пластмасов или метален имплант, включително на лицето, гърдите, гръбначния стълб и раменете.


Не го използвайте, ако сте бременна, имате сърдечно-съдово заболяване, пейсмейкър или вграден дефибрилатор, дълбока венозна тромбоза или високо кръвно налягане.

Начин на употреба:



Плъзнете капака на батерията на основното устройство
Сложете правилно 2 бр. батерии AAA
Прикрепете основното устройство към подложката за крака
Поставете краката си върху подложката (трябва да сте боси)
Натиснете бутона „ON/INC“, за да включите
Натиснете бутона „Program“, за да изберете програмата си
Натиснете бутона „ON/INC“, за да увеличите интензивността, или бутона „OFF/DEC“, за да намалите интензивността
Отпуснете се и се наслаждавайте

Режими на работа:

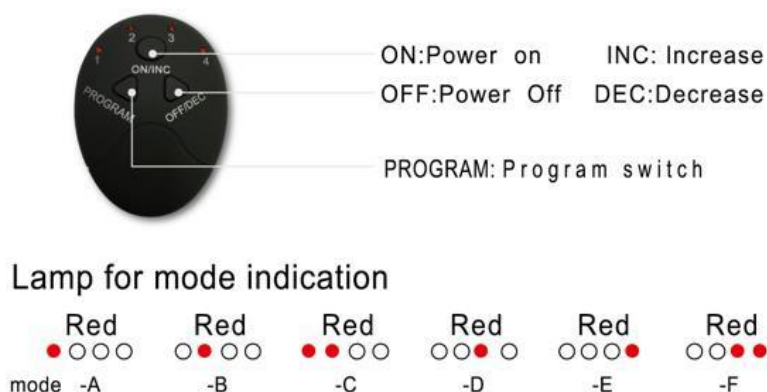

ON: Включено
OFF: Изключено
INC: Увеличаване
DEC: Намаляване
PROGRAM: Превключвател на режима
Светлинни индикатори за режима
Червен
режим

Инструкции за рециклиране и изхвърляне



Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете използвания продукт, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен. Те ще се погрижат за екологичното му рециклиране.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на Европейската Комисия.