

EMS MASAŽER FOOTPAD



Tehnički podaci:

Naziv proizvoda	EMS masažer za stopala
Napon	Alkalna baterija od 1,5 V, 2x AAA
Načini rada	6 (A – F)
Frekvencija	1 – 100 Hz
Izlazna snaga	8 mA
Veličina	32 x 29 cm
Težina	57,4 g

Pakiranje uključuje:



Glavni uređaj (ISPRED)
Glavni uređaj (STRAGA)

Prostirka za stopala
Uključeno:
1 glavni uređaj
1 korisnički priručnik
1 prostirka za stopala
AAA baterije ne isporučuju se u paketu

Uređaj se automatski isključuje nakon 12 minuta upotrebe.

Uređaj se automatski isključuje ako ne stavite noge na prostirku.

Upozorenja:

Ovaj proizvod nikad se ne smije upotrebljavati za ublažavanje nedijagnosticirane boli, ovo nije medicinski uređaj. Prije liječenja bilo kojeg bolnog stanja posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Upotrijebite niski intenzitet i kraće vrijeme upotrebe kako biste izbjegli pretjeranu stimulaciju.

Čuvajte korektore izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

Ovaj proizvod nije vodootporan, nemojte ga uranjati ni izlagati dodiru s vodom.

Nemojte upotrebljavati proizvode ako imate bilo kakav zdravstveni problem s nogama ili imate rane na ovom području.

Ovaj proizvod upotrebljavajte samo za njegovu namjenu.

Upotrebljavajte samo pribor isporučen s proizvodom.

Uređaj nemojte upotrebljavati na mjestima visoke vlažnosti, primjerice u kupaonici.

Nemojte dopustiti da uređaj dođe u kontakt s bilo kojom vrstom metala, primjerice s nakitom.

Nemojte upotrebljavati uređaj na bilo kojem drugom dijelu tijela i osobito na bilo kojem dijelu na kojem imate tetovažu te plastični ili metalni implantat, uključujući lice, prsa, kralježnicu i ramena.


Nemojte upotrebljavati ako ste trudni, imate bolest srca, imate srčani stimulator ili integrirani defibrilator, duboku vensku trombozu ili visok krvni tlak.

Kako se upotrebljava:



Skinite poklopac baterije s glavnog uređaja
Ispravno stavite 2 AAA baterije
Pričvrstite glavni uređaj na prostirku za noge
Stavite noge na prostirku (morate biti bos)
Pritisnite gumb „ON/INC” za uključivanje
Pritisnite gumb „Program” za odabir programa
Pritisnite gumb „ON/INC” za povećanje intenziteta ili gumb „OFF/DEC” za smanjenje intenziteta
Uživajte

Načini rada:

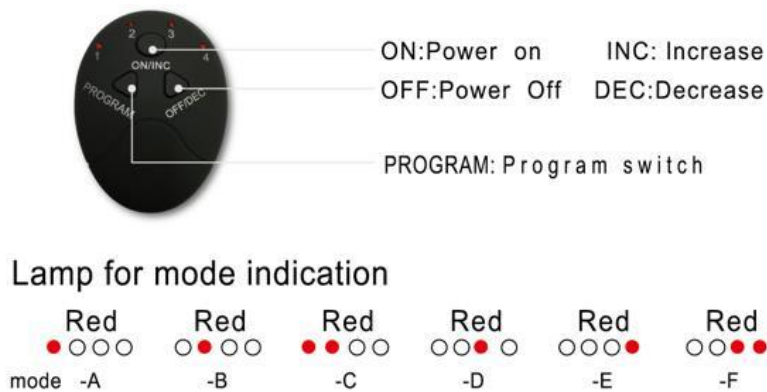

ON: uključivanje
OFF: isključivanje
INC: povećanje intenziteta
DEC: smanjenje intenziteta
PROGRAM: prekidač za način rada
Indikatori načina rada
Crvena
način rada

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanja zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirajte ga odgovorno s ciljem promocije održivog ponovnog iskorištavanja materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, učinite to preko sustava za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Oni mogu reciklirati ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih EZ direktiva.