

# EMS MASAŽUOKLIS

## FOOTPAD



### Techninės specifikacijos:

Prekės pavadinimas	EMS pėdų masažuoklis
Įtampa	1,5 V šarminės baterijos, 2x AAA
Režimai	6 (A-F)
Dažnis	1-100 Hz
Išvestis	8 mA
Matmenys	32x29 cm
Svoris	57,4 g

### Pakuotėje:

Main Device(FRONT)      Main Device(REAR)



Foot Mat



Including:

1\* Main Device  
1\* User Manual

1\* Foot Mat  
2\* AAA Batteries(Selection)

Pagrindinis prietaisas (PRIEKIS)

Pagrindinis prietaisas (NUGARĖLĖ)

Pėdų kilimėlis
Pakuotėje:
1* Pagrindinis įrenginys
1* Naudotojo vadovas
1* Pėdų kilimėlis
AAA tipo baterijos nepridedamos

Po 12 minučių švieselė automatiškai išsijungia.

Įrenginys išsijungia automatiškai, jei nepastatote kojų ant kilimėlio.

### **Įspėjimai:**

Šio gaminio niekada nenaudokite nedagnozuotam skausmui malšinti, tai nėra medicinos prietaisas. Prieš pradėdami gydyti bet kokį skausmą, pasitarkite su gydytoju.

Kad išvengtumėte per didelio stimuliavimo, naudokite mažo intensyvumo ir trumpesnės trukmės nustatymą.

Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Šis gaminys nėra atsparus vandeniui, nemerkite jo į vandenį ir nešlapinkite.

Nenaudokite šio prietaiso, jei turite kokių nors pėdų ligų ar žaizdų šioje srityje.

Šį gaminį naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite tik su gaminiu pateiktus priedus.

Nenaudokite prietaiso, kur labai drėgna, pavyzdžiui, vonios kambaryje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su metaliniais objektais, pavyzdžiui, su papuošalais.

Nenaudokite prietaiso ant jokių kitų kūno dalių ir ypač ten, kur yra tatuiruočių arba plastikinių ar metalinių implantų, įskaitant veidą, krūtinę, stuburą ir pečius.

Nenaudokite, jei esate nėščia, sergate širdies ligomis, turite širdies stimuliatorių ar integruotą defibriliatorių, giliųjų venų trombozę ar aukštą kraujospūdį.

## Kaip naudoti:




Atstumkite akumuliatoriaus dangtelį, esantį ant pagrindinio prietaiso
Teisingai įdėkite 2 AAA tipo baterijas
Prijunkite pagrindinį prietaisą prie kojų kilimėlio
Pastatykite kojas ant kilimėlio (kojos turi būti basos)
Paspauskite mygtuką "ON/INC", kad įjungtumėte
Paspauskite mygtuką "Program", kad pasirinktumėte programą
Spauskite mygtuką "ON/INC", kad padidintumėte intensyvumą, arba mygtuką "OFF/DEC", kad sumažintumėte intensyvumą
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės

## Režimai:



### Lamp for mode indication

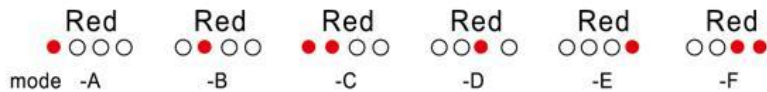

ON: Įjungta
OFF: Išjungta
INC: Padidinti
DEC: Sumažinti
PROGRAM: Režimo perjungimas
Režimo indikacijos lemputės
Raudona
režimas

### Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



Gamintojas deklaruoja, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.