

SMILY

Détartreur dentaire sonore électrique portable



MANUEL D'UTILISATION

Cher/ère client(e),

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Vous pouvez désormais conserver des dents et des gencives saines. Ce détartreur multifonctionnel utilise des vibrations de pointe pour retirer le tartre de vos dents et pour masser vos gencives, vous permettant ainsi d'arborer un sourire confiant et d'avoir l'haleine fraîche tous les matins !

Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement du détartreur. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil.

L'EMBALLAGE COMPREND :

- 1 x détartreur dentaire sonore électrique
- 1 x câble de charge
- 1 x mode d'emploi



CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale : 3,7 V

Capacité de la batterie : 300 mAh

Temps de charge : Environ 2 heures

Adaptateur : 5 V / 5 mA

Courant de veille : 20 uA

Courant nominal : 200 mA

Bruit du moteur : moins de 60 décibels

Durée d'utilisation : environ 2 heures

Vitesses de fonctionnement : 5

Indice d'étanchéité : IPX6

Style : Chargement (batterie intégrée)

Convient aux adultes

Matériel : silicone de qualité d'entrée + plastique

Environnement d'utilisation : température normale

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ET CONSERVEZ-LE POUR UNE UTILISATION FUTURE.

- Ce détartreur est conçu à des fins dentaires. Il est conçu pour éliminer les dépôts ou le tartre présents sur les dents ainsi que pour effectuer d'autres travaux dentaires où la vibration ultrasonique est bénéfique. Ne l'utilisez pas pour des applications auxquelles il n'est pas destiné. Si vous avez un doute au sujet de l'utilisation que vous souhaitez en faire, veuillez contacter votre revendeur local ou le point d'achat.
- Utilisez-le uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur ou endommager le produit, voire le rendre inutilisable. Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous d'avoir lu attentivement et compris le mode d'emploi.
- Appliquez toujours l'embout de l'appareil contre les surfaces dentaires lors du détartrage. Évitez tout contact inutile de l'embout avec les tissus mous, tels que la gencive, les muqueuses ou la peau.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'embout ne soit pas sujet à des vibrations anormales. Si des anomalies sont détectées, arrêtez immédiatement d'utiliser le détartreur et contactez le revendeur.

- Assurez-vous que l'embout ne touche pas la prothèse en céramique pendant l'opération de détartrage. Cela pourrait endommager l'embout.
- N'utilisez le détartréur qu'avec l'adaptateur secteur d'origine.
- Avant de connecter l'adaptateur secteur à une prise de courant, vérifiez que la tension indiquée sur sa plaque signalétique correspond à la tension de votre installation électrique.
- La tête métallique du détartréur ne peut pas être remplacée.
- N'exposez pas le détartréur à l'environnement extérieur, à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à une humidité excessive ou à des environnements excessivement poussiéreux.
- Utilisez-le à l'intérieur, à des températures comprises entre -10°C et 40°C.
- Ne lavez pas l'appareil et ne le laissez pas tremper pendant longtemps.
- Ce produit est réservé aux adultes uniquement. Veuillez conserver le produit correctement après utilisation. Tenez-le à l'écart des enfants pour éviter qu'ils se blessent.
- Ce produit comporte une batterie. Ne mettez pas l'appareil au feu et ne le placez pas à l'intérieur d'un récipient à haute température, afin d'éviter un incendie ou une explosion.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de radiateurs, de cheminée ou de toute autre source de chaleur.
- Maintenez le détartréur à une distance suffisante des yeux.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble. Cela pourrait endommager l'adaptateur secteur ou la prise de courant. Débranchez-le en saisissant l'adaptateur secteur.
- Vérifiez toujours que les composants de l'appareil ne sont pas endommagés avant d'entamer le détartrage. Les composants endommagés ne doivent pas être utilisés ; ils doivent être remplacés.
- Ne placez pas le câble sur des objets pointus.
- Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne réparez pas vous-même le détartréur ou l'un de ses accessoires et ne les modifiez en aucun cas. Pour les réparations, veuillez contacter un centre de service après-vente autorisé. En modifiant le produit, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de performances insatisfaisantes ou d'une garantie de qualité.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou l'adaptateur secteur est cassé. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
- Tout entretien ou réparation doit être effectué par un centre de services agréé.
- Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de gaz inflammables.
- L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Attention : n'utilisez pas le produit pendant le chargement.

COMPOSANTS

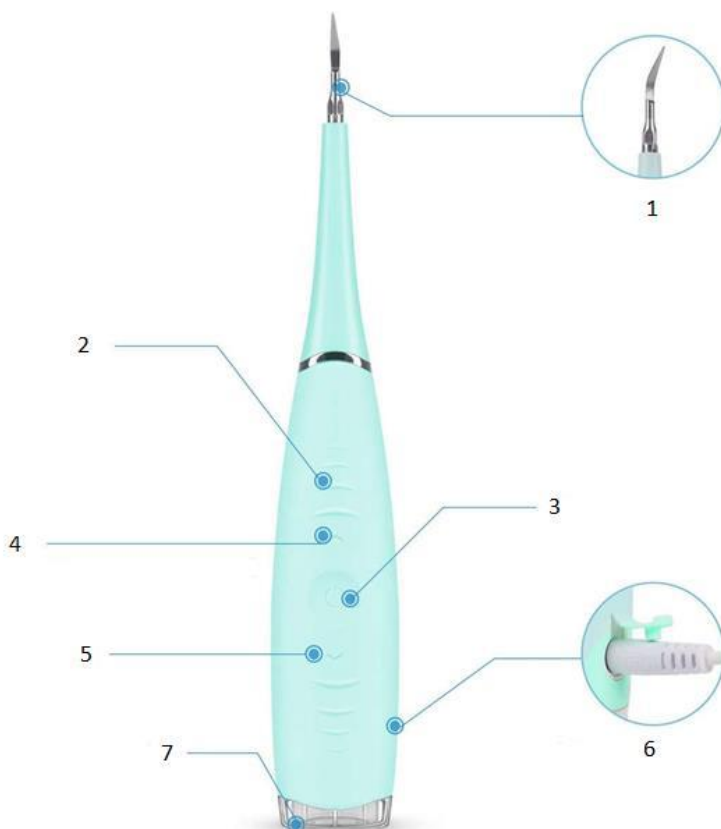

1. Tête de nettoyage	5. Réduction de la vitesse
2. Bande antidérapante	6. Port de charge
3. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)	7. Voyant de charge
4. Augmentation de la vitesse (au total, 5 vitesses réglables de haut en bas)	

CHARGE

Rechargement USB :

Méthode de charge sûre et rapide par USB.

1. Introduisez la fiche dans l'appareil et branchez-le sur une prise pour commencer la charge.
2. Le voyant de charge s'allume et est rouge, ce qui indique que l'appareil commence à se charger. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant devient vert.



REMARQUE :

- La recharge complète dure environ 2 heures.
- Une fois en mode charge, le détartreur passe en mode arrêt (l'appareil ne fonctionne pas pendant la charge).
- Une fois le produit chargé, il peut être utilisé environ 200 fois.

Si vous rechargez le détartreur pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période (plus de 3 mois), la charge complète peut prendre plus de temps.

- Débranchez le détartreur chargé de l'adaptateur secteur et débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique. Après avoir débranché le détartreur de l'adaptateur secteur, le témoin lumineux LED s'éteint.

Recommandations pour prolonger la durée de vie de la batterie :

- Chargez l'appareil à température ambiante.
- Ne le laissez pas branché à la source d'alimentation électrique plus longtemps que nécessaire pour le recharger.
- Idéalement, rangez le détartreur une fois qu'il est complètement chargé.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez-le au moins une fois tous les 6 mois.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION




Ce détartreur fonctionne sur le principe qui convertit l'énergie électrique en énergie de vibration ultrasonique.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil, réglez l'alimentation via les boutons de réglage vers le haut et vers le bas, puis vous pouvez commencer votre détartrage.




L'extrémité de l'embout doit être appliqué sur la dent de sorte que le mouvement de l'embout soit parallèle à la surface de la dent. Les 2 premiers millimètres de l'embout sont les plus efficaces.

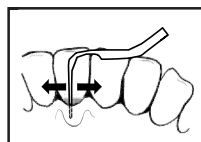

Un détartrage standard nécessite rarement d'un niveau de puissance supérieur à 50 %. Cependant, le tartre récalcitrant peut nécessiter un réglage de puissance plus élevé.

Veillez à ce que l'embout et la surface de la dent soit toujours en contact pendant l'opération de détartrage. Continuez à déplacer lentement l'embout d'avant en arrière et laissez l'instrument faire son travail. Faites des mouvements courts et longs pour que toute la surface de chaque dent soit détartrée.

L'embout est normalement dirigé vers la cavité dentaire.

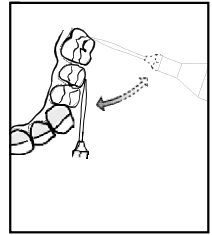

Pour que l'embout fonctionne parallèlement à la surface de chaque dent, il est important de suivre l'anatomie de la dent.



Avec un réglage de puissance adéquat, une pression appropriée exercée sur la dent (environ 20 grammes mais pas plus de 50) et l'embout fonctionnant parallèlement à la surface, le traitement est doux, silencieux et efficace.



ATTENTION !

- Si, pendant le traitement, un grincement se fait entendre (fort et dominant), cela peut indiquer que la pression exercée sur la dent est trop faible ou que l'embout n'est pas placé de manière parallèle à la surface de la dent.
- Ne forcez pas trop avec votre main. Exercez toujours une légère pression sur les dents.
- Faites attention lorsque vous passez l'appareil sur la zone sensible des gencives.
- Cet appareil peut être un peu difficile à utiliser pour certains utilisateurs au début mais, peu à peu, il deviendra votre outil indispensable en matière de soins bucco-dentaires !
- Les taches et le tartre prennent la forme de poudre. Par conséquent, veuillez vous rincer la bouche après utilisation.
- Utilisez l'appareil lorsque l'intérieur de votre bouche est humide.
- S'il y a une réduction d'humidité au cours de l'utilisation, rincez-vous la bouche.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour l'intérieur d'une dent, utilisez un miroir dentaire.

Une fois que vous avez terminé le nettoyage et détartrage de vos dents :

- Rincez-vous bien la bouche.
- Lavez la tête métallique de l'appareil à l'eau du robinet.
- Essayez le corps de l'appareil.

Instructions de recyclage et d'élimination



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

CE Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives communautaires applicables.

