

# Vakuuminis veido porų valymo prietaisas KILPOR 2.0



Modelio Nr.: XN-8030

NAUDOTOJO VADOVAS

## Naudotojui

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, kad žinotumėte, kaip tinkamai ir saugiai naudoti šį gaminį. Gaminį visada naudokite, kaip aprašyta šiame vadove, kad išvengtumėte sužalojimų ir gaminio gedimo. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

## Gaminio aprašymas

Neigiamo slėgio porų valymo prietaisas yra grožio prietaisas su dermabrazijos funkcija, skirtas porų valymui, sebumo ir kitų nešvarumų nusiurbimui nuo odos. Šis nešiojamas mikrodermabrazijos grožio prietaisas turi 4 keičiamus siurbimo antgalius, atliekančius 4 skirtingas funkcijas (odos šveitimo, veido stangrinimo, porų valymo, inkštirų šalinimo, raukšlių šalinimo). Vakuuminis porų valymo prietaisas „Kilpor 2.0“ turi 5 skirtingus siurbimo intensyvumo lygius, kad atitiktų skirtingų naudotojų poreikius.

## Techninės specifikacijos

Modelio numeris: XN-8030  
Gaminio dydis: 180x40x39 mm  
Galia: 0,7 W  
Įvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė (DC)

Vardinė srovė: ≤500 mA  
Akumuliatoriaus talpa: 1 000 mA  
Apytikslis įkrovimo laikas: 90 min  
Naudojimo laikas: apie 2,5 h

## Pakuotę sudaro

1. 1 pagrindinis prietaisas
2. 4 daugiafunkciai siurbimo antgaliai (1 didelis apvalus antgalis, 1 mažas apvalus antgalis, 1 ovalus antgalis, 1 mikrokristalinis antgalis)
3. Silikoninių sandariklių ir kempinėlių pakuotė
4. 1 USB įkrovimo laidas
5. 1 gaminio naudotojo vadovas



## Prietaiso dalys



1. Galvutė (ant kurios dedasi keičiami antgaliai)
2. Maitinimo jungiklis (penki reguliuojami intensyvumo lygiai)
3. Įkrovimo LED indikatorius
4. Įkrovimo lizdas



Įkraudami gaminį, USB laidą prijunkite prie įkroviklio (pakuotėje nepridedamas) arba prie kompiuterio. Įkrovimo metu degs raudona lemputė, o baigus įkrovimą – žalia.

## Galvučių aprašymas

### Keturi keičiami antgaliai



#### Pagražinkite savo odą mikrokrystalų pagalba

Dirbtinių mikrokrystalinių dalelių antgalis skirtas odai valyti ir negyvai odai nuo odos paviršiaus pašalinti.

#### Antgalis su didele apvalia skylute (stiprus siurbimas)

Šis stipraus siurbimo antgalis skirtas komedonams, sebumui, nešvarumams, kosmetikos likučiams valyti. Naudokite atsargiai, jeigu jūsų oda plona ar lengvai pažeidžiama. Naudokite kartą per savaitę, po 5 minutes ir atsižvelgdami į odos būklę.



#### Antgalis su maža apvalia skylute (silpnas siurbimas)

Šis silpno siurbimo antgalis skirtas komedonams, sebumui, nešvarumams, kosmetikos likučiams valyti. Šis antgalis gali būti naudojamas plonai ar lengvai pažeidžiamai odai.

## Ovalios formos antgalis (silpnas siurbimas)

Šį antgalį su elipsės formos skylute galima naudoti kasdiennei odos priežiūrai. Pridėkite antgalį prie raukšlelių aplink akis ar burną, ir greitai atleiskite, šį veiksmą kartokite keletą kartų. Norėdami stangrinti odą, šį antgalį galite vesti odos paviršiumi iš apačios į viršų.



## ĮSPĖJIMAI

1. Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, įsitikinkite, kad jūsų veidas ir rankos yra sausi ir ant jų nėra vandens ar kito skysčio. Prietaisas gali sugesti, j jo vidų patekus skysčiui.
2. Įsitikinkite, kad filtravimo kempinėle tinkamai įdėta į filtro laikiklį. Kempinėle turi būti sausa, nesušlapinta vandeniu ar kitu skysčiu. Taip pat prieš naudojimą būtina nuvalyti ir nusausinti odą. Priešingu atveju į prietaiso vidų gali patekti vandens ar kito skysčio, galinčio užkimšti prietaisą ir apriboti tinkamą jo veikimą.
3. Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, sensorinių ar psichikos sutrikimų, stokojantiems patirties ir (arba) žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo, kai instruktažą atlieka už jų saugumą ir gerovę atsakingas asmuo. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi.
4. Šis gaminio negalima naudoti kūno vietose, kuriose buvo atlikta bet kokia operacija arba randų. Taip pat nerekomenduojama naudoti nėščiosioms ir asmenims, sergantiems širdies ligomis.
5. Prietaiso neplaukite ir nepilkite į jį vandens.
6. Naudodami šį prietaisą nedėvėkite grandinėlių, auskarų ar kitų veido papuošalų. Nusiimkite šiuos ir visus kitus papuošalus prieš naudodami prietaisą.
7. Jei naudodami šį prietaisą jaučiate skausmą, nedelsdami nutraukite naudojimą.
8. Tai nėra medicinos prietaisas. Jokia pateikta informacija nėra ir negali būti laikoma medicinine rekomendacija, diagnoze ar gydymu.
9. Šis gaminys nėra atsparus vandeniui, todėl neturi būti naudojamas duše ar bet kur, kur galėtų turėti sąlytį su vandeniu. Nepanardinkite prietaiso po vandeniu.
10. Nelaikykite šio gaminio vonios kambaryje arba patalpoje, kurioje yra daug drėgmės.
11. Nelaikykite ir nenaudokite šio gaminio šalia šilumos ar ugnies šaltinių.
12. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šis prietaisas nėra žaislas, todėl juo negali naudotis vaikai ir jis turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
13. Nenaudokite ant sudirgusios odos. Nutraukite naudojimą, jei atsiranda odos jautrumas.
14. Būkite atsargūs naudodami aplink akis.
15. Šis prietaisas skirtas naudoti tik butyje ir tik sausomis sąlygomis.
16. Niekada nenaudokite prietaiso, jei ant siurbimo antgalio nėra tinkamai uždėta viena iš siurbimo galvučių.
17. Reguliariai šalinkite užsikimšimus, atsiradusius nuo dulkių, pūkų, plaukų ir t. t., nes jie itin susilpnina prietaiso siurbimo galią ir (arba) bendrą veikimą.
18. Nenaudojamą prietaisą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.


19. Nenaudokite prietaiso, jei jis neveikia taip, kaip turėtų veikti, buvo smarkiai sutrenktas, nukrito, buvo pažeistas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį.
20. Prietaisas niekada neturi būti įjungtas, kai yra nenaudojamas, valomas arba keičiami jo priedai.
21. Gaminiui tinkamai neveikiant ir (arba) sugedus, nbandykite jo taisyti patys ir pasirūpinkite, kad jis būtų tinkamai išmestas laikantis vietinių įstatymų.

## Prietaiso galvutės uždėjimo žingsniai

Įdėkite filtro kempinėle į filtro laikiklį, kaip parodyta žemiau;



Pirmiausia nuimkite siurbimo antgalį. Ištraukite siurbimo antgalį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę

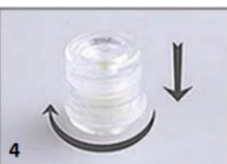

Tada ištraukite antgalio dangtelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.

Išimkite seną ir (arba) įdėkite naują filtro kempinę į filtro laikiklį.

Įsitikinkite, kad filtro kempinėle tinkamai įdėta į laikiklį. Uždėkite dangtelį ant antgalio, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.



Tuomet galite uždėti siurbimo antgalį. Sukite antgalį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis vėl bus pritvirtintas prie galvutės.

Jei silikoninis sandariklis yra pažeistas arba filtro kempinėle yra nešvari, pakeiskite ją, vadovaudamiesi aukščiau aprašytais žingsniais.

## Prieš naudojimą

**Pastaba: Labai svarbu naudoti tinkamą metodą!**

Prieš naudodami prietaisą, turite atverti poras karštu vandeniu (geriausia karštu rankšluosčiu, palaike jį kelias minutes ant veido), kad būtų lengviau išsiurbti nešvarumus.

- Prieš naudodami prietaisą, atverkite poras garintuvo ar karšto rankšluosčio pagalba arba 5 minutes ant odos užtepię ir palaikę gelį / kremą nuo inkštirų. Taip užtikrinsite geriausią prietaiso efektyvumą.
- Įsitinkinkite, kad po karštos vonios ar mankštos, poros yra visiškai atvertos ir palaikykite veido drėgmę.
- Lėtai veskite prietaisą odos paviršiumi. **Ilgai nelaikykite vienoje vietoje, kad nepakenktumėte odai.** Prietaisas gali nusiurbti sebumą, baltus inkštirus, spuogus ir gana negilius juodus inkštirus. Jei juodas inkštiras yra gana giliai, geriausia prietaisą naudoti prieš tai užtepus ir palaikius kremą nuo inkštirų.
- Poroms sutraukti galite naudoti toniką arba šaltą vandenį.



## Instrukcijos



**1 ŽINGSNIS:** Nuvalykite makiažą ir nusiplaukite veidą.

**2 ŽINGSNIS:** Naudokite šiltą rankšluostį arba veido garintuvą poroms atverti.

**3 ŽINGSNIS:** Užtepkite šiek tiek kremo nuo inkštirų, kad būtų lengviau pašalinti juodus inkštirus.

**4 ŽINGSNIS:** Pagal savo poreikius pasirinkite vieną iš keturių siurbimo galvūčių. Pradėkite nuo silpniausio siurbimo intensyvumo lygio.

**5 ŽINGSNIS:** Lėtai ir vienodu greičiu judinkite prietaisą aplink poras pirmyn ir atgal, per ilgai nelaikydami jo vienoje vietoje, siekdami išvengti odos pažeidimų. Taip pat prietaiso stipriai nespauskite ir netraukite vertikaliai. Nelaikykite prietaiso vienoje vietoje ilgiau, nei 3 sekundes, kitaip ant veido liks paraudimų ir mėlynių.

**6 ŽINGSNIS:** Po veido valymo naudokite atšaldytą rankšluostį, šaltą vandenį arba sutraukiančią porų priemonę, kad atstatytumėte poras, kurias valėte. Taip pat užtepkite veido kaukę, kad poros užsivertų.

### Kaip pasirinkti siurbimo intensyvumo lygį?

Vakuuminis veido porų valymo prietaisas sukurtas įvairių tipų odai. Silpnas siurbimas (1 ir 2 lygiai) tinka jautriai ir sausai odai. Pirmą kartą jį naudokite su atgaliu, turinčiu mažą skylutę. Vidutinis siurbimas (3 lygis) skirtas normaliai odai. Stiprus siurbimas (4 lygis) skirtas riebiai odai, o stipriausias siurbimas (5 lygis) skirtas mišriai odai su didelėmis poromis.

Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaiso silpno siurbimo 1 lygį.

Paspauskite įjungimo mygtuką du kartus, kad įjungtumėte prietaiso silpno siurbimo 2 lygį.

Paspauskite įjungimo mygtuką tris kartus, kad įjungtumėte prietaiso vidutinio siurbimo 3 lygį.

Paspauskite įjungimo mygtuką keturis kartus, kad įjungtumėte prietaiso stipraus siurbimo 4 lygį.

Paspauskite įjungimo mygtuką penkis kartus, kad įjungtumėte prietaiso stipriausio siurbimo 5 lygį.

Paspauskite įjungimo mygtuką šešis kartus, kad prietaisą išjungtumėte.



### Atlikite veido odos dermabraziją

1. Uždėkite mikrokristalų antgalį, nuvalykite ir nusauskinkite veido odą.
2. Pradėkite nuo žandikaulio, veskite prietaisą judesiu iš apačios į viršų.
3. Pridėję prie skruosto, veskite prietaisą judesiu nuo vidurio link išorės.
4. Pridėję prie kaktos, veskite prietaisą judesiu nuo vidurio link viršaus į abi puses.
5. Pridėję prie 1 zonos, veskite prietaisą judesiu iš apačios į viršų.

### Išvalykite komedonus, sebumą, kosmetikos likučius ir pan.

1. Uždėkite antgalį su didele arba maža skylute (antgalį ir siurbimo intensyvumą pasirinkite pagal savo odą).
2. Sulygiuokite antgalio skylutę su norima odos sritimi, veskite prietaisą viena kryptimi, o ne pirmyn ir atgal, nenaudokite prietaiso per ilgai.

### Priziūrėkite smulkias raukšles

1. Uždėkite antgalį su ovalia skylute.
2. Naudodami prietaisą pasirūpinkite oda ties akių kampučiais, nosimi, burna ir kitomis veido dalimis, reguliuokite prietaisą pagal savo poreikius.
3. Galite greitai pridėti ir atleisti antgalį ties sritimi, kuria norite pasirūpinti. Šį veiksmą galite kartoti pagal poreikį 5 minutes.

### Pastabos:

- Atminkite, kad naudodamiesi turite nuolat judinti prietaisą ir nelaikyti jo per ilgai vienoje vietoje.
- Prieš naudodami prietaisą, atverkite poras garintuvo ar karšto rankšluosčio pagalba arba 5 minutes ant odos užtepę ir palaikę gelį / kremą nuo inkštirų. Taip užtikrinsite geriausią prietaiso veikimą.

**DĖMESIO:** nesiurbkite tos pačios vietos visą laiką, nes oda gali parausti arba gali atsirasti mėlynė. Jei atsiranda mėlynė arba patinimas, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą. Užsidėkite šaltą kompresą, po to karštą kompresą arba sekančią dieną kreipkitės į gydytoją.

**TEISINGAS NAUDOJIMAS:** Niekada nelaikykite prietaiso viename taške. Vienu metu toje pačioje vietoje galite laikyti prietaisą ne ilgiau, kaip 3 sekundes. Nenaudokite prietaiso ant odos vertikaliai. Nuolat veskite prietaisą judesiu pirmyn arba atgal, kad oda netaptų raudona ar violetinė.



# Priežiūra

Po kiekvieno naudojimo išvalykite siurbimo antgalį nuplaudami jį šiltu vandeniu. Leiskite siurbimo antgaliui išdžiūti. Pagrindinis prietaisas nėra atsparus vandeniui, todėl nebandykite jo plauti vandeniu. Norėdami išvalyti pagrindinį prietaisą, nuvalykite jį minkšta, drėgna šluoste.

## NAUDINGI PATARIMAI

- Panaudoję vakuuminį veido porų valymo prietaisą, patepkite drėkinamuoju kremu tą vietą, kurioje naudojote prietaisą.
- Nenaudokite odos šveitiklių ar kitų šveičiamųjų priemonių prieš ir po prietaiso naudojimo.
- Naudodami prietaisą, nespauskite jo stipriai prie odos. Jo siurbimo pajėgumai pakankami, kad poros būtų išvalytos efektyviai.

Nedidelis paraudimas yra normalus reiškinys, kuris neilgai trukus turi išnykti.

**PASTABA:** Turint sausą odą, vakuuminį veido porų valymo prietaisą galima naudoti tik kartą per savaitę. Turint riebią ar mišrią odą, prietaisą galima naudoti du kartus per savaitę. Nenaudokite prietaiso ilgiau, nei penkias minutes per dieną.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS:

- Jei prietaisas neveikia, įsitikinkite, kad siurbimo antgalis tinkamai uždėtas arba patikrinkite, ar nereikia išvalyti kurio nors komponento.
- Jei prietaisas veikia lėčiau, išvalykite siurbimo antgalį ir prietaisą įkraudite.

## Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



CE ženklavimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.