

## PROBOX

Pištolj za masažu s 4 različite masažne glave



### KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Lagani, prijenosni i jednostavan uređaj za masažu koji postiže izvrsne rezultate!

#### PAKIRANJE UKLJUČUJE:

- 1 pištolj za masažu (1)
- 1 USB kabel za punjenje (2)
- 1 nastavak s viličastom glavom (za kralježnicu) (3)
- 1 nastavak s duguljastom glavom (za zglobove) (4)
- 1 kuglasti nastavak (za velike grupe mišića) (5)
- 1 nastavak s ravnom glavom (za cijelo tijelo) (6)
- 1 korisnički priručnik



## TEHNIČKI PODACI

Napajanje: USB

Ulazni napon: 5 V

Izlazni napon: 8,4 V

Izlazna snaga: 16,8 WH

Baterija: Punjiva li-ionska ćelija

### 6 razina namještanja:

- 1. razina – 2200 okretaja u minuti (način za iskustvo)
- 2. razina – 2400 okretaja u minuti (način za buđenje mišića)
- 3. razina – 2600 okretaja u minuti (način za opuštanje fascije)
- 4. razina – 2800 okretaja u minuti (način za razgradnju mliječne kiseline)
- 5. razina – 3000 okretaja u minuti (način za dubinsku masažu)
- 6. razina – 3200 okretaja u minuti (profesionalni način rada)



## OPISI DIJELOVA



- 1 zamjenjiva masažna glava
- 2 ispuh za hlađenje
- 3 prekidač, tipka za brzine
- 4 sučelje za punjenje
- 5 gumirana drška

## UPOZORENJA

1. Uređaj smiju upotrebljavati samo odrasle osobe. Ako imate ozljede, nemojte upotrebljavati uređaj. Prije upotrebe ovog uređaja posavjetujte se s liječnikom.
2. Jedno područje nemojte masirati duže od jedne minute. Prije masiranja preporuča se nošenje suhe odjeće ili stavljanje suhих ručnika na kožu, masažer treba pritisnuti te ga polagano i nježno pomicati.
3. Uz pretpostavku da NEMA BOLI ili neugode, razina visoke frekvencije može se upotrijebiti samo na mekom tkivu. Visoke brzine NE smiju se upotrijebiti na glavi ili bilo kojim dijelovima kostura.

4. Odaberite masažnu glavu koja odgovara dijelu tijela koji želite masirati.
5. Dugotrajno masiranje istog dijela tijela može prouzročiti abraziju. Odmah PREKINITE upotrebu ako se javi bilo kakva bol ili nelagoda.
6. Prste i dlake na bilo kojem dijelu tijela držite podalje od ekspanzijske šipke i otvora za ispuštanje topline kako ne bi došlo do ozljede.
7. Ništa nemojte stavljati u otvor za ispuštanje topline.
8. NEMOJTE uranjati u vodu te nemojte dopustiti da voda uđe u uređaj kroz otvor za ispuštanje topline.
9. Uređaj nemojte baciti niti ga zloupotrebljavati.
10. Prije upotrebe pažljivo provjerite uređaj i bateriju.
11. Uređaj nemojte na bilo koji način mijenjati. Nemojte skidati vijke niti pokušati rastaviti uređaj.
12. Isključite uređaj nakon jednog sata naprekidnog rada i ostavite ga da se hladi sat i pol prije ponovne upotrebe.
13. Uređaj nemojte bez odobrenja liječnika upotrebljavati na ozlijeđenim dijelovima tijela.


#### UPOTREBA ZAMIJENJIVIH NASTAVAKA MASAŽNIH GLAVA

Dostupne su četiri različite glave koje se jednostavno mogu zamijeniti ovisno o tome koji dio tijela želite masirati, pa vam ovaj uređaj nudi mnogo više od običnog masažnog valjka.



# SAVJETI ZA POSTAVLJANJE MASAŽNE GLAVE

Isključite uređaj, poravnajte masažnu glavu s konveksnim blokom (označen plavom bojom na slici 1) s utorom za pištolj (označen crvenom bojom na slici 1) i polako umetnite (slika 2).

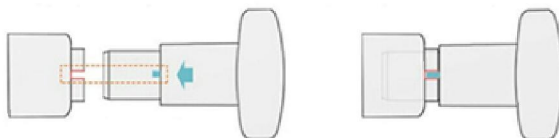

Slika 1

Slika 2

## PUNJENJE UREĐAJA

1. Prije prve upotrebe uređaj puniti **tri sata** kako bi se dokraja napunio.
2. **Za punjenje upotrebljavajte samo zidne utičnice.** Uređaj nemojte puniti na računalo ili sličnom uređaju.
3. Na uređaju će treperiti LED indikatori koji označavaju da se baterija puni. Kad svi LED indikatori prestanu treperiti i počnu kontinuirano svijetliti, baterija je dokraja napunjena.
4. Uređaj nemojte upotrebljavati tijekom punjenja.
5. Baterija se može puniti bilo kad i pri bilo kojoj razini napunjenosti. Ne preporučuje se da se baterija isprazni do razine crvenog LED indikatora.
6. **Prosječno vrijeme rada uređaja je 2 sata,** ovisno o brzini i pritisku koji se pri upotrebi primijeni.

## UPUTE ZA UPOTREBU:

**Nemojte ga kontinuirano upotrebljavati dulje od jednog sata. Zaustavite uređaj na 30 minuta i ponovno ga upotrijebite.**

**Može se upotrijebiti samo na suhoj i čistoj površini kože te se ne može upotrijebiti preko odjeće.**

1. Kad se napuni do kraja. Pritisnite tipka za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.
2. Pritisnite ga i lagano ga pomičite po koži. Svaki dio tretirajte približno 60 sekundi.
3. Ovaj uređaj upotrebljavajte samo na mekom tkivu i pripazite da se ne javi bol ili nelagoda. Nemojte ga upotrebljavati na glavi ili drugim tvrdim ili koštanim dijelovima tijela.
4. Želite li promijeniti razinu, nastavite pritiskati tipku za uključivanje/isključivanje. Svakim pritiskom prijeći ćete na sljedeću razinu. Prvim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje uređaj će početi raditi na 1. razini.
5. Uređaj isključite pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje. Kad prođete kroz sve razine, uređaj će se isključiti.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uređaj nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine. Držite ga podalje od tekućina i izvora topline. Pripazite da se u otvorima za prozračivanje motora ne nakupi prašina ili prljavština.
- Nemojte skidati vijke.
- Površinu uređaja obrišite vlažnim ručnikom, zatim ga osušite mekom krpom ili ga stavite u isporučenu ambalažu kad putujete.

### Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno

reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.