

## PROBOX

Pistola per massaggi con 4 diverse teste massaggianti



### MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Un dispositivo per massaggi leggero e portatile, facile da usare che consente di ottenere ottimi risultati!

#### LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 x Pistola per massaggi (1)
- 1 x cavo di ricarica USB (2)
- 1 x testa a forchetta (per la colonna vertebrale) (3)
- 1 x testa a proiettile (per giunti) (4)
- 1 x Testa a sfera (per grandi gruppi muscolari) (5)
- 1 x testa piatta (per tutto il corpo) (6)
- 1 x Manuale d'uso



## SPECIFICHE

Alimentazione: USB

Tensione di input: 5 V

Tensione di uscita: 8,4 V

Potenza di output: 16,8 WH

Batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio

### 6 livelli di regolazione:

- Livello 1 - 2200 giri/min (modalità esperienza)
- Livello 2 - 2400 giri/min (modalità risveglio muscolare)
- Livello 3 - 2600 giri/min (modalità rilassamento fascia)
- Livello 4 - 2800 giri/min (modalità decomposizione dell'acido lattico)
- Livello 5 - 3000 giri/min (modalità massaggio in profondità)
- Livello 6 - 3200 giri/min (modalità professionale)



## DESCRIZIONI DELLE PARTI



- 1 testa massaggiante sostituibile
- 2 uscite aria di raffreddamento
- 3 interruttore, pulsante gestione intensità
- 4 Interfaccia di ricarica
- 5 impugnatura in gomma









## AVVERTENZE

1. E' consentito l'uso ai soli adulti. In caso di lesioni, non utilizzare il dispositivo. Si prega di consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo.
2. Non massaggiare la stessa area per più di 1 minuto. Si consiglia di indossare abiti asciutti o applicare asciugamani asciutti sulla pelle prima di massaggiare, la pistola per massaggi deve essere premuta e spostata lentamente e delicatamente.
3. Su presupposto di non provocare NESSUN DOLORE o disagio, utilizzare con il livello più alto di frequenza solo su parti di tessuto molle. NON è consentito l'uso ad alta velocità sulla testa o qualsiasi parte dello scheletro.

4. Scegliere la testa massaggiante appropriata in base alla parte del corpo che si desidera massaggiare.
5. Insistere a lungo nella stessa posizione può provocare abrasioni. **INTERROMPERE** immediatamente l'uso in caso di sensazione di dolore o fastidio.
6. Tenere le dita o i capelli/peli di qualsiasi parte del corpo lontani dall'asta di espansione e dal foro di emissione del calore per evitare potenziali lesioni.
7. Non inserire niente nel foro di emissione del calore.
8. **NON** immergere in acqua ed evitare che l'acqua penetri nel dispositivo attraverso il foro di emissione del calore.
9. Non gettare o utilizzare in modo improprio il dispositivo.
10. Si prega di controllare attentamente il dispositivo e la batteria prima dell'uso.
11. Non apportare modifiche al dispositivo. Non rimuovere le viti né tentare di smontare il dispositivo.
12. Spegnere il dispositivo dopo un funzionamento continuo per un'ora e lasciarlo riposare per mezz'ora prima di riprendere l'uso.
13. Non utilizzare questo dispositivo su parti del corpo lesionate senza il permesso del medico.

#### USO DELLE TESTE DI MASSAGGIO SOSTITUIBILI

E' dotato di 4 teste differenti che possono essere facilmente interscambiate per massaggi su aree diverse e offre quindi molte più opzioni rispetto a un normale rullo massaggiante.

		<p><b>Per muscoli di tutto il corpo:</b> Adatto per massaggiare muscoli come braccia, glutei, cosce, polpacci, ecc.</p>
		<p><b>Per le articolazioni del corpo:</b> Adatto per colpire le strutture profonde dei nervi nelle articolazioni, ecc.</p>
		<p><b>Per il massaggio della colonna vertebrale:</b> Adatto per il rilassamento e la modellatura di tutto il corpo.</p>
		<p><b>Per tutto il corpo:</b> Indicato per massaggiare collo e colonna vertebrale, tendine d'Achille.</p>

# SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLA TESTA DI MASSAGGIO

Spegner il dispositivo, allineare la testa massaggiante Blocco convesso (blu in figura 1) con la testa massaggiante Scanalatura della pistola (figura 1 rossa), inserire lentamente, completare (figura 2).

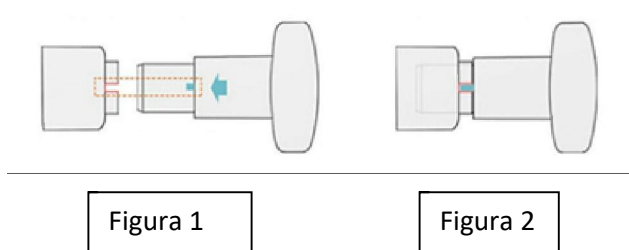


Figura 1

Figura 2

## RICARICARE IL DISPOSITIVO

1. Prima di usare il dispositivo per la prima volta, caricarlo completamente **per tre ore**.
2. **Caricare solo da presa a muro**. Non caricare tramite un computer o un dispositivo simile.
3. Le luci LED sul dispositivo lampeggiano, indicando che la batteria è in carica. Quando tutte le spie LED smettono di lampeggiare restando accese, la batteria è completamente carica.
4. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
5. La batteria può essere caricata in qualsiasi momento e a qualsiasi livello. Si sconsiglia di usare il dispositivo quando la batteria ha raggiunto il livello del LED rosso.
6. **Il tempo medio di funzionamento del dispositivo è di 2 ore**, a seconda della velocità e della pressione applicata durante l'utilizzo.

## ISTRUZIONI D'USO:

**Non utilizzare continuamente per più di un'ora. Si prega di lasciar riposare il dispositivo per 30 minuti prima di riutilizzarlo.**

**Può essere utilizzato solo su aree della pelle del corpo asciutte e pulite e non può essere utilizzato attraverso i vestiti.**

1. Quando è completamente carico. Premere il pulsante di accensione / spegnimento per accendere il dispositivo.
2. Premere il dispositivo e spostarlo delicatamente sulla pelle. La durata del massaggio di ogni parte deve essere di circa 60 secondi.
3. Utilizzare questo dispositivo solo sulle parti molli del corpo per non causare dolore o fastidio. Non usarlo sulla testa o su qualsiasi parte del corpo dura o sulle ossa.
4. Per cambiare l'intensità, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento. Ogni pressione aumenta l'intensità di un livello. Con una prima pressione del pulsante On / off il dispositivo inizia a funzionare al livello 1.

5. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento. Una volta superato tutti i livelli; il dispositivo si spegne.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Tenere lontano da liquidi e fonti di calore. Mantenere i fori di sfiato del motore liberi da polvere e detriti.
- Non rimuovere le viti.
- Pulire la superficie del dispositivo con un panno leggermente umido, quindi asciugarlo con un panno morbido per riporlo o inserirlo nella custodia da trasporto in dotazione.

### Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo

responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclo sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità dei prodotti ai requisiti delle direttive CE applicabili.