

## PROBOX

### Massaažipüstol 4 erineva massaažipeaga



## KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite meie toote.

Kerge, kaasaskantav massaažiseade, mida on lihtne kasutada ja mis annab suurepäraseid tulemusi!

### KOMPLEKT SISALDAB:

- 1 x massaažipüstol (1)
- 1 x USB-laadimiskaabel (2)
- 1 x Kähvli-massaažipea (selgroo jaoks) (3)
- 1 x Kuulikujuline pea (liigeste jaoks) (4)
- 1 x pallikujuline pea (suurte lihasgruppide jaoks) (5)
- 1 x lame pea (kogu keha jaoks) (6)
- 1 x Kasutusjuhend



## TÄPSUSTUSED

Toiteallikas: USB

Sisendpinge: 5 V

Väljundpinge: 8,4 V

Võimsus: 16,8 Wh

Aku: Taaslaetav Li-ioonelement

### 6 taseme reguleerimine:

- Tase 1 - 2200 PM (kogemusrežiim)
- Tase 2 - 2400 PM (lihaste äratamise režiim)
- Tase 3 - 2600 PM (fastsia lõdvestusrežiim)
- Tase 4 - 2800 PM (piimhappe lagundamise režiim)
- Tase 5 - 3000 PM (süvamassaaži režiim)
- Tase 6 - 3200 PM (professionaalne režiim)



## OSADE KIRJELDUSED



- 1 vahetatav massaažipea
- 2 jahutusõhu väljalaskeava
- 3 lülitid, käigukangi nupp
- 4 Laadimisliides
- 5 kummist käepide


## HOIATUSED

1. Seda tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Kui teil on vigastusi, ärge kasutage seadet. Enne selle seadme kasutamist pidage nõu oma arstiga.
2. Ärge masseerige ühte piirkonda kauem kui 1 minut. Enne massaaži on soovitatav kanda kuivi riideid või kanda nahale kuivad rätikud, massaaživahendit tuleb vajutada ja liigutada aeglaselt ja õrnalt.
3. Esineda EI tohiks VALU ega ebamugavustunnet, kõrgsageduse taset saab kasutada ainult pehmekeelistel osadel. Peal või mis tahes skeletiosadel EI tohi kasutada suure kiirusega režiimi.

4. Valige sobiv massaaži pea vastavalt kehaosale, mida soovite masseerida.
5. Samas asendis pikaajaline masseerimine võib põhjustada hõõrdumist. LÕPETAGE kohe kasutamine, kui tekib valu või ebamugavustunne.
6. Võimalike vigastuste vältimiseks hoidke oma sõrmed, juuksed või mis tahes kehaosad paisumisvardast ja soojusemissiooni avadest eemal.
7. Ärge pange midagi soojusemissiooni avasse.
8. ÄRGE kastke seda vette ja vältige vee sattumist seadmesse läbi soojusemissiooni ava.
9. Ärge visake seda seadet ära ega kasutage seda valesti.
10. Palun kontrollige seadet ja akut enne kasutamist hoolikalt.
11. Ärge tehke seadmele mingeid muudatusi. Ärge eemaldage kruvisid ega üritage seadet lahti võtta.
12. Palun lülitage seade pärast ühe tunni pikkust pidevat töötamist välja ja hoidke see enne edasi kasutamist pool tundi väljalülitatuna.
13. Ärge kasutage seda seadet vigastatud kehaosadel ilma arsti loata.


## VAHETATAVA MASSAAŽIPEA KASUTAMINE

Sellel on 4 erinevat pead, mida saab hõlpsasti vahetada sõltuvalt masseeritavast piirkonnast ja seega pakub see palju rohkem võimalusi kui tüüpiline massaažirull.

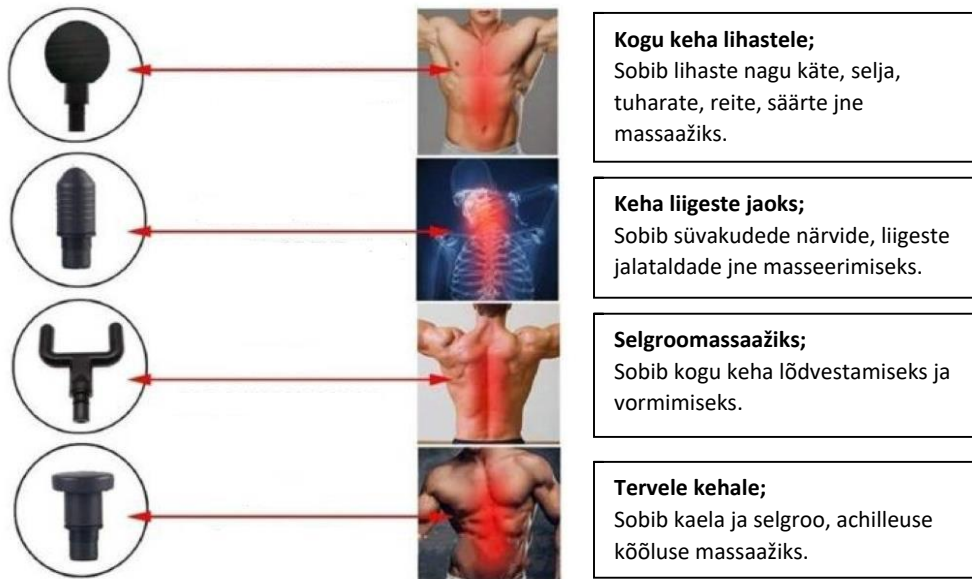


# MASSAAŽIPEA PAIGALDAMISE NÄPUNÄITED

Lülitage masin välja, joondage massaažipea  
Kumer osa (joonisel 1 sinine) koos massaažipeaga  
Püstoli soon (joonisel 1 punane), aeglaselt sisestada, lõpetada (joonis 2).

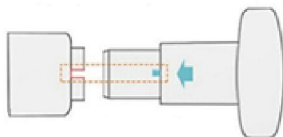

Joonis 1

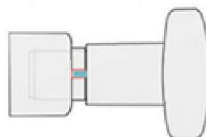

Joonis 2

## SEADME LAADIMINE

1. Enne esmakordset kasutamist laadige seade täielikult **kolm tundi**.
2. **Laadige seda ainult seinapistikupesast.** Ärge laadige seda arvuti või sarnase seadme kaudu.
3. Seadme LED-tuled vilguvad, mis näitab, et akut parajasti laetakse. Kui kõik LED-tuled lõpetavad vilkumise ja põlevad pidevalt, näitab see, et aku on täielikult laetud.
4. Ärge kasutage seda laadimise ajal.
5. Akut saab laadida igal ajal ja igal tasemel. Akut ei ole soovitatav kasutada kuni punase LED-i tasemeni.
6. **Seadme keskmine tööaeg on 2 tundi**, sõltuvalt kiirusest ja kasutamisel rakendatavast survest.

## KASUTUSJUHISED:

**Ärge kasutage seda pidevalt kauem kui üks tund. Palun seisatage seade 30 minutiks ning kasutage seda edasi.**

**Seadet võib kasutada ainult kuival, puhtal nahapinnal ja seda ei saa kasutada läbi riiete.**

1. Kui seade on täielikult laetud. Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu (on/off).
2. Vajutage ja liigutage seda õrnalt nahal. Iga osa kestus on umbes 60 sekundit.
3. Kasutage seda seadet ainult keha pehmetel kudedel, tekitamata valu või ebamugavustunnet. Ärge kasutage seda pea või mis tahes kõva või kondise kehaosa peal.
4. Taseme muutmiseks vajutage mitu korda nuppu sisse/välja (on/off). Iga vajutus suurendab taset ühe võrra. Kui vajutate esimest korda nuppu on/off, hakkab seade tööle tasemel 1.
5. Seadme väljalülitamiseks vajutage mitu korda on/off nuppu. Kui olete kõik tasemed läbinud, lülitub seade välja.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Ärge kastke seda vette või muudesse vedelikesse. Hoidke seda eemal vedelikest ja soojusallikatest. Hoidke mootori ventilatsiooniavad tolmust ja prahist vaba.
- Ärge eemaldage kruvisid.
- Pühkige seadme pind kergelt niiske rätiga, seejärel kuivatage see hoiustamiseks pehme lapiga või pange see reisile minnes kaasasolevasse karpi.

### Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb toode ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnoahutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.

