

## PROBOX

Masažo pistoletas su 4 masažo galvutėmis



### NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

Šiuo lengvu nešiojamu masažuokliu paprasta naudotis ir jis užtikrina puikius rezultatus!

#### PAKUOTĖ SUDARO:

- 1 x masažo pistoletas (1)
- 1 x USB įkrovimo laidas (2)
- 1 x šakutės formos galvutė (stuburui) (3)
- 1 x kulkos formos galvutė (sąnariams) (4)
- 1 x apvali galvutė (didelių raumenų grupėms) (5)
- 1 x plokščia galvutė (visam kūnui) (6)
- 1 x naudotojo vadovas



## SPECIFIKACIJOS

Maitinimo šaltinis: USB

Įvesties įtampa: 5 V

Išvesties įtampa: 8,4 V

Išvesties galia: 16,8 WH

Akumuliatorius: Pakartotinai įkraunamas ličio jonų elementas

### 6 lygių reguliavimas:

- 1 lygis - 2200 aps/min (pradinis režimas)
- 2 lygis - 2400 aps/min (raumenų žadinimo režimas)
- 3 lygis - 2600 aps/min (raiščių atpalaidavimo režimas)
- 4 lygis - 2800 aps/min (pieno rūgšties skaidymo režimas)
- 5 lygis - 3000 aps/min (giluminio masažo režimas)
- 6 lygis - 3200 aps/min (profesionalus režimas)



## DALIŲ APRAŠYMAI



- 1 keičiama masažo galvutė
- 2 aušinimo anga
- 3 jungiklis, lygių perjungimo mygtukas
- 4 įkrovimo anga
- 5 guminė rankena

## ĮSPĖJIMAI

1. Prietaisu leidžiama naudotis tik suaugusiems. Jei turite kūno sužalojimų, nenaudokite prietaiso. Prieš naudodami šį prietaisą pasitarkite su gydytoju.
2. Nemasazuokite vienos vietos ilgiau nei 1 minutę. Prieš masažuojant rekomenduojama dėvėti sausus drabužius arba odą uždengti sausu rankšluosčiu. Masažuoklį reikia spausti ir judinti lėtai ir švelniai.

3. Jei neįjuntate skausmo ar diskomforto, aukšto dažnio lygmens procedūros gali būti naudojamos tik ant minkštųjų audinių dalių. Galvai ar kitoms skeleto dalims **NEGALIMA** naudoti didelio intensyvumo masažo.
4. Pasirinkite tinkamą masažo galvutę priklausomai nuo kūno dalies, kurią norite masažuoti.
5. Ilgai masažuodami tą pačią vietą galite ją pažeisti. Nedelsdami **NUTRAUKITE** naudojimą, jei jaučiate skausmą ar diskomfortą.
6. Kad išvengtumėte galimų sužalojimų, laikykite pirštus ar bet kurios kūno dalies plaukus atokiau nuo masažo galvutę laikančios dalies ir šilumą skleidžiančios angos.
7. Nieko nekiškite į šilumos skleidimo angą.
8. Nemerkite šio prietaiso į vandenį. Vanduo neturi patekti į prietaisą pro šilumos skleidimo angą.
9. Neišmeskite ir tinkamai naudokite šį prietaisą.
10. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite prietaisą ir akumuliatorių.
11. Nedarykite jokių prietaiso pakeitimų. Neišukite varžtų ir nebandykite išardyti prietaiso.
12. Po valandos nepertraukiamo veikimo išjunkite prietaisą ir palikite atvėsti bent pusvalandį prieš pakartotinai jį naudodami.
13. Be gydytojo leidimo nenaudokite šio prietaiso ant sužalotų kūno dalių.


## KEIČIAMŲ MASAŽINIŲ GALVUČIŲ NAUDOJIMAS

4 skirtingas galvutes galima lengvai keisti, atsižvelgiant į masažuojamą sritį, todėl šis prietaisas žymiai efektyvesnis nei įprasti masažo voleliai.



## MASAŽO GALVUČIŲ MONTAVIMO PATARIMAI

Išjunkite aparatą, sulygiuokite masažo galvutę  
Išgaubimas (1 paveikslėlyje - mėlynas) ant masažo galvutės  
Pistoletu griovelis (1 pav., raudona spalva), lėtai įstatykite, užfiksuokite (2 pav.).

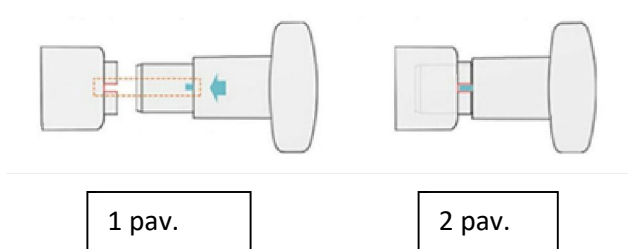

### PRIETAISO ĮKROVIMAS

1. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, pilnai jį įkraukite **tris valandas**.
2. **Įkraukite jį iš tik sieninio lizdo**. Neįkraukite jo iš kompiuterio ar panašaus įrenginio.
3. Prietaiso LED lemputės mirksės, rodydamos, kad akumuliatorius įkraunamas. Kai visos šviesos diodų lemputės nustoja mirksėti ir šviečia, tai reiškia, kad akumuliatorius visiškai įkrautas.
4. Nenaudokite jo įkrovimo metu.
5. Akumuliatorių galima įkrauti bet kuriuo metu ir esant bet kokiam įkrovos lygiui. Nerekomenduojama naudoti akumuliatoriaus iki kol užsidegs raudona LED lemputė.
6. **Vidutinė prietaiso veikimo trukmė - 2 valandos**, priklausomai nuo greičio ir naudojamo spaudimo.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

**Nenaudokite jo nepertraukiamai ilgiau kaip vieną valandą. Sustabdykite prietaisą 30 minučių ir vėl jį naudokite.**

**Masažuoklį galima naudoti tik ant sausos ir švarios odos ir negalima naudoti per drabužius.**

1. Kai prietaisas visiškai įkrautas, paspauskite on/off mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Švelniai spauskite ir stumkite jį kūno paviršiumi. Vienoje vietoje laikykite apie 60 sekundžių.
3. Šį prietaisą naudokite tik ant minkštųjų kūno audinių, nesukeldami skausmo ar diskomforto. Nenaudokite jo ant galvos ar kitos kietos ar kaulėtos kūno dalies.
4. Norėdami pakeisti lygį, spauskite on/off mygtuką. Kiekvienu paspaudimu pereisite į aukštesnį lygį. Pirmą kartą paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką, prietaisas pradės veikti 1 lygiu.
5. Norėdami išjungti prietaisą, toliau spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Perėjus per visus lygius, prietaisas išsijungs.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Laikykite jį atokiau nuo skysčių ir šilumos šaltinių. Saugokite variklio ventiliacijos angas nuo dulkių ir purvo.
- Neišsukinėkite varžtų.
- Nušluostykite prietaiso paviršių šiek tiek drėgnu rankšluosčiu, tada nusauskite minkštu audiniu, o keliaudami įdėkite jį į originalią dėžutę.

### Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



CE ženklintas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.