

## PROBOX

Masāžas ierīce ar 4 dažādām masāžas galviņām



### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.

Viegla un ērti pārnēsājama masāžas ierīce, ko ir vienkārši lietot, un tā sniedz lieliskus rezultātus!

#### KOMPLEKTĀ IETILPST:

- 1 x masāžas ierīce (1)
- 1 x USB uzlādes vads (2)
- 1 x dakšas veida galviņa (mugurkaulam) (3)
- 1 x lodes veida galviņa (locītavām) (4)
- 1 x bumbas veida galviņa (lielām muskuļu grupām) (5)
- 1 x plakanā galviņa (visam ķermenim) (6)
- 1 x lietošanas instrukcija



## SPECIFIKĀCIJAS

Strāvas avots: USB

Ieejas spriegums: 5 V

Izejas spriegums: 8,4 V

Izejas jauda: 16,8 WH

Akumulators: Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators

### 6 dažādi režīmi:

- 1. līmenis - 2200 apgr./min (izmēģinājuma režīms)
- 2. līmenis - 2400 apgr./min (muskuļu pamodināšanas režīms)
- 3. līmenis - 2600 apgr./min (relaksācijas režīms)
- 4. līmenis - 2800 apgr./min (pienskābes sadalīšanās režīms)
- 5. līmenis - 3000 apgr./min (dziļās masāžas režīms)
- 6. līmenis - 3200 apgr./min (profesionālais režīms)



## DETAĻU APRAKSTS



1. nomaināma masāžas galviņa
2. dzesēšanas gaisa izeja
3. ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) poga, līmeņu pārslēgšanas poga
4. uzlādes interfeiss

5. gumijas rokturis

## BRĪDINĀJUMI

1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai pieaugušie. Ja jums ir traumas, nelietojiet šo ierīci. Pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
2. Nemasējiet vienu vietu ilgāk par 1 minūti. Pirms masāžas ieteicams uzvilkt sausas drēbes vai uzklāt uz ādas sausus dvieļus. Masāžas ierīci jāpiespiež un jāpārvieta pa ķermeni lēni un maigi.
3. Ja jums NAV SĀPES vai diskomforta, tad jūs varat izmantot arī lielāko līmeni mīkstajiem audiem. Galvu vai jebkuras skeleta daļas NEVAR masēt lielā intensitātes līmenī.
4. Izvēlieties piemērotu masāžas galviņu atbilstoši tai ķermeņa daļai, kuru jūs vēlaties masēt.
5. Ilgstoša masāža vienā un tajā pašā vietā var izraisīt nobrāzumus. Nekavējoties PĀRTRAUCIET ierīces lietošanu, ja jums rodas sāpes vai diskomforts.
6. Lai izvairītos no iespējamām traumām, turiet pirkstus vai matus pa gabalu no tās ķermeņa vietas, kuru jūs apstrādājat ar masāžas ierīci.
7. Neievietojiet neko siltuma emisijas atverē.
8. Neiegremdējiet ierīci ūdenī un izvairieties no ūdens iekļūšanas ierīcē caur siltuma emisijas atveri.
9. Neizmetiet šo ierīci, un nelietojiet to neparedzētiem mērķiem.
10. Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet gan ierīci, gan akumulatoru.
11. Neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē. Neizskrūvējiet skrūves un nemēģiniet izjaukt ierīci.
12. Lūdzu, izslēdziet ierīci pēc vienas stundas nepārtrauktas darbības un pirms atkārtotas lietošanas pusstundu to atpūtiniet.
13. Nelietojiet šo ierīci uz savainotām ķermeņa daļām bez ārsta atļaujas.


## NOMAINĀMO MASĀŽAS GALVIŅU IZMANTOŠANA

Ierīcei ir 4 dažādas galviņas, kuras var viegli nomainīt atkarībā no masējamās zonas, un tādējādi šī ierīce piedāvā daudz vairāk iespēju nekā parasts masāžas rullītis.




## MASĀŽAS GALVIŅU UZSTĀDĪŠANAS PADOMI

Izslēdziet ierīci un pielieciet izvēlēto masāžas galviņu  
Izbīdītā vieta (1. attēlā zils) jānovieto masāžas ierīces  
rievā (1. attēls sarkans), lēnām to ievietojiet, lai rastos savienojums (2. attēls).

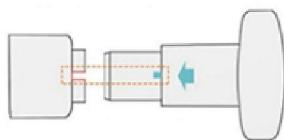

1. attēls

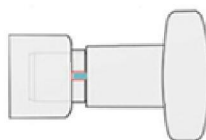

2. attēls

## IERĪCES UZLĀDE

1. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ierīci **trīs stundas**.
2. **Uzlādējiet to tikai pievienojot sienas kontaktligzdai.** Neuzlādējiet to, izmantojot datoru vai līdzīgu ierīci.
3. Ierīces LED indikatori mirgo, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts. Kad visas LED lampiņas beidz mirgot un iedegas, tas nozīmē, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.
4. Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā.
5. Akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā. Nav ieteicams izlietot akumulatoru līdz LED indikators sāk mirgot sarkanā krāsā.
6. **Ierīces vidējais darbības laiks ir 2 stundas** atkarībā no intensitātes līmeņa un pielietotā spiediena ierīces lietošanas laikā.

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA:

**Nelietojiet ierīci bez pārtraukuma ilgāk par vienu stundu. Lūdzu, apturiet ierīci uz 30 minūtēm, un pēc tam to varat lietot atkal.**

**To var lietot tikai uz sausas, tīras ķermeņa virsmas, un to nevar lietot caur apģērbu.**

1. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta. Nospiediet ieslēgšanas pogu (on/off), lai ieslēgtu ierīci.
2. Viegli pieskarieties ar to ādai. Katras ķermeņa daļas apstrādes ilgums ir aptuveni 60 sekundes.
3. Izmantojiet šo ierīci tikai uz mīkstajiem ķermeņa audiem, neradot sāpes vai diskomfortu. Nelietojiet to uz galvas vai jebkuras cietas vai kaulainas ķermeņa daļas.
4. Lai mainītu intensitātes līmeni, turpiniet spiest ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) pogu. Ar katru pogas nospiešanas reizi intensitātes līmenis tiks paaugstināts par vienu. Pirmo reizi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) pogu, ierīce sāks darboties 1. līmenī.
5. Lai izslēgtu ierīci, turpiniet spiest ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) pogu. Kad būsiet izgājuši visus līmeņus, ierīce izslēgsies.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Uzglabājiet to pa gabalu no šķidrumiem un karstuma avotiem. Uzturiet motora ventilācijas atveres brīvas no putekļiem un netīrumiem.
- Neizņemiet skrūves.
- Noslaukiet ierīces virsmu ar nedaudz mitru drānu, pēc tam nosusiniet to ar mīkstu drānu. Lai ierīci uzglabātu, jūs varat to ievietot komplektā iekļautajā kartona kastītē, arī tad, kad to ņemat līdzi ceļojumā.

### Otrreizējās pārstrādes un iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.