

SIX PACK KOMPLEKT

1. Kuidas seade töötab?

Six pack komplekt tõmbab minimaalse elektrivoolu abil teie lihaseid kokku ja pakub õrna massaaži või lihaste tugevdamist:

- Lõdvestage pinges õlad, selg ja vöökoht
- Lihastoonus paraneb
- Massaažiefekt

1. Täpsustused:

Pinge:	2 x Leelispatarei 1,5 V AAA
Kasutusrežiim:	AF (6režiim)
Sagedus:	1 ~ 100 Hz
Programmi kestus:	12 minutit
Välju:	Max. 9,8 mA
Suurus:	21x10x2,3 cm
Kaal:	57,4 g

2. Toote omadused:

2.1. Madalsageduslik teraapia


Elektri abil tekitatakse madal sagedus, mille rütm on kehale soodsalt mõjuv. Reguleerige tugevust nii, et tunneksite end hästi. Madal sagedus mõjub kehale õrnalt nagu massaaž.

2.2. Vali 6 programmi vahel

2.2.1. Valige hõlpsasti 6 töörežiimi vahel

2.2.2. Programm lülitub automaatselt välja 12 minuti möödudes

3. Kuidas seda kasutada

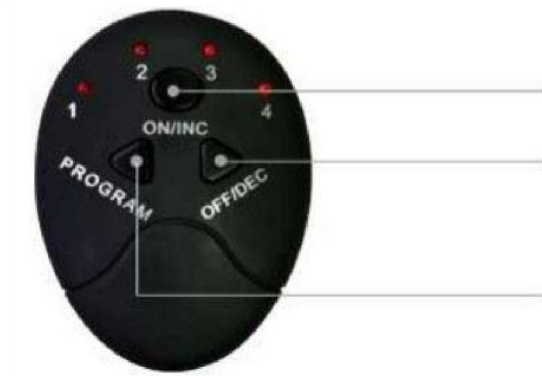


ON / INC: nupp, millega lülitada sisse / suurendada intensiivsust

OFF / DEC: nupp, millega lülitada välja / vähendada intensiivsust

PROGRAM: programmide vahel

ümberrülitamine Toimingu märgutuled:

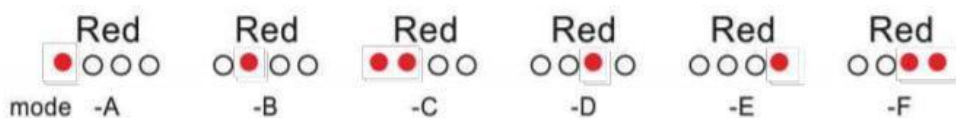

Kui vajutate toitenuppu intensiivsuse suurendamiseks, muutub valgus intensiivsemaks ja vastupidi, kui vajutate toitenuppu intensiivsuse vähendamiseks, paistab valgus vähem intensiivselt.

- Mõlemal nupul on 10 taset
- Programmi lülitusnupp: valige 6 režiimi (A ~ F) vahel
- Kui patarei on tühi, eemaldage kork mahutist, vahetage patarei ja sulgege see korgiga.

4. Kuidas kasutada Six pack komplekti

- Kasutage alati puhtal ja kuival nahal
- Eemaldage kaitsev foolium geelilehtedelt
- Asetage seade soovitud kehaosale (kõht, jalad, õlad jne)

! ÄRGE LÜLITAGE SEADET SISSE ENNE SELLE NAHALE ASETAMIST.

! ÄRGE PUUDUTAGE KLEEPUVAT OSA, SEST SEE LÜHENDAB SUURESTI GEELILEHTEDE KASUTUSIGA.

5. Esmakordne kasutamine

- Võtke seade karbist välja
- Asetage seade soovitud kehaosale
- Valige soovitud programm
- Reguleerige intensiivsust
- Programmi kestus on 12 minutit
- Vajutage toitenuppu kuni valgus kustub

Kõige parem on kasutada seadet kuni 12 minutit korraga, 2-3 korda päevas. Kui kasutate seda pikka aega, võib teil tekkida väsimustunne.

Vältige kasutamist vähemalt 30 minuti jooksul pärast söömist. Kõige parem on kasutada seadet pärast duši all käimist puhtal ja kuival nahal.

6. HOOLDUS

- Lülitage seade pärast kasutamist välja.
- Paigaldage geelipatjadele kaitsekile, et see püsiks kleepuva ja puhtana.
- Puhastage mustus niiske lapiga ja õrna pesuvahendiga.

- Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse, kuumuse, niiskuse, tule, elektri jne. kätte.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge puudutage seadet märgade kätega.
- Kui te ei kasuta seadet pikka aega, eemaldage patarei kaugjuhtimispuldist.

7. Patareide vahetamine

- Avage patareikate
- Asetage patarei õigesti sisse (pöörake tähelepanu + ja - märkidele)
- Sulgege patareipesa kaanega
- Lülitage seade sisse ja kontrollige, kas see töötab

KOKKUVÕTE



1. Avage patareipesa



2. Sisestage patareid (2xAAA)



3. Kinnitage kaugjuhtimispult seadme külge



4. Koorige maha kaitsev foolium



5. Kinnitage kaugjuhtimispult seadme külge



6. Asetage rihm käele/jalale