

PRIETAISAS SIX PACK

1. Kaip veikia šis prietaisas?

Prietaisas „Six pack“ minimalios elektros srovės pagalba sutraukia raumenis ir atlieka švelnų masažą bei stiprina raumenis:

- Atpalaiduoja įsitempusius pečius, nugarą ir juosmenį
- Pagerina raumenų tonusą
- Turi masažo poveikį

1. Specifikacijos:

Įtampa:	2 x Šarminė 1,5 V AAA baterija
Naudojimo režimai:	AF (6 režimai)
Dažnis:	1 ~ 100 Hz
Programos trukmė:	12 minučių
Išvadas:	Daugiausia 9,8 mA
Matmenys:	21x10x2,3 cm
Svoris:	57,4 g

2. Produkto savybės:

2.1. Žemo dažnio terapija


Elektros pagalba sukuriama žemo dažnio ritmas, kuris teigiamai veikia organizmą. Sureguliuokite intensyvumą taip, kad jaustumėtės gerai. Žemas dažnis švelniai veikia kūną, panašiai kaip masažas.

2.2. Rinkitės iš 6 programų

2.2.1. Paprasta pasirinkti vieną iš 6 darbo režimų

2.2.2. Programa automatiškai išsijungia po 12 minučių

3. Kaip naudotis

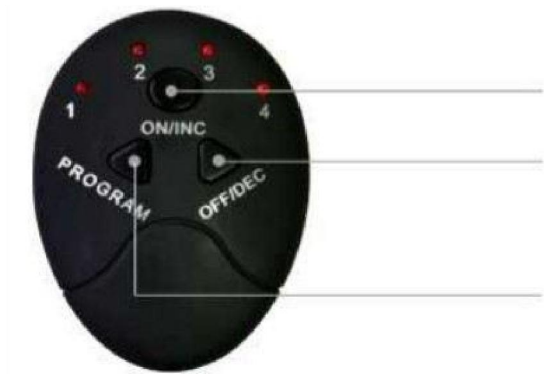


ON / INC: įjungimo / intensyvumo didinimo mygtukas

ON / INC: išjungimo / intensyvumo mažinimo mygtukas

PROGRAM: perjungiant programą, dega

Veikimo indikatorius:

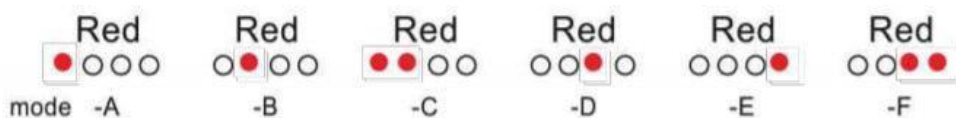

Paspaudus įjungimo mygtuką arba padidinus intensyvumą, lemputė šviečia intensyviau, ir atvirkščiai, paspaudus išjungimo mygtuką arba sumažinus intensyvumą, lemputė šviečia silpniau.

- Abu mygtukai turi po 10 lygių
- Programų perjungimo mygtukas: pasirinkite vieną iš 6 režimų (A ~ F)
- Kai akumulatorius išsikraus, nuimkite laikiklio dangtelį, pakeiskite akumuliatorių ir vėl uždarykite.

4. Kaip naudoti "Six pack" rinkinį

- Visada naudokite ant švarios ir sausos odos
- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo gelio lakštų
- Uždėkite prietaisą ant norimos kūno dalies (pilvo, kojų, pečių ir pan.)

! NEJUNKITE PRIETAISO PRIEŠ JĮ UŽDĖDAMI ANT ODOS.

! NELIESKITE LIPNIOSIOS DALIES, NES TAI LABAI SUTRUMPINA GELIO LAKŠTŲ TARNAVIMO LAIKĄ.

5. Pirmasis naudojimas

- Išimkite prietaisą iš dėžutės
- Uždėkite prietaisą ant norimos kūno dalies
- Pasirinkite norimą programą
- Sureguliuokite intensyvumą
- Programos trukmė - 12 minučių
- Spauskite išjungimo mygtuką, kol užges lemputė

Geriausia prietaisą naudoti iki 12 minučių, po 2-3 kartus per dieną. Jei jį naudosite ilgiau, galite jausti nuovargį.

Venkite jį naudoti bent 30 minučių po valgio. Geriausia prietaisą naudoti po dušo ant švarios ir sausos odos.

6. PRIEŽIŪRA

- Po naudojimo prietaisą išjunkite.
- Uždėkite apsauginę plėvelę ant gelio plokštelių, kad jos išliktų lipnios ir švarios.
- Valykite nešvarumus drėgna šluoste ir švelniu plovikliu.

- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje, drėgmėje, ugnyje, elektros srovėje ir pan.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis.
- Jei ilgą laiką nenaudosite prietaiso, išimkite bateriją iš nuotolinio valdymo pulto.

7. Akumuliatoriaus keitimas

- Atidarykite akumuliatorių skyriaus dangtelį
- Teisingai įdėkite baterijas (atkreipkite dėmesį į + ir -)
- Uždarykite akumuliatorių skyrelį dangteliu
- Įjunkite prietaisą ir patikrinkite, ar jis veikia

SANTRAUKA



1. Atidarykite akumuliatorių skyriaus dangtelį



2. Įdėkite baterijas (2xAAA)



3. Prie įrenginio pritvirtinkite nuotolinio valdymo pultą



4. Nulupkite apsauginę plėvelę



5. Prie įrenginio pritvirtinkite nuotolinio valdymo pultą



6. Uždėkite dirželį ant rankos / kojos