

SMILY

Kaasaskantav elektriline hambapuhasti SMILY



KASUTUSJUHEND

Hea klient,

Täname, et ostsite meie toote.

Nüüdsest saate säilitada terved hambad ja igemed. See multifunktsionaalne hambapuhasti kasutab täiustatud vibratsioone, et eemaldada hammastelt hambakivi ja masseerida igemeid, andes teile igal hommikul enesekindla naeratuse ja värsket hingeõhku!

Käesolevas juhendis käsitletakse ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid. Enne toote kasutamist loe see kasutusjuhend põhjalikult läbi.

KARBIS ON:

1x Elektriline hambapuhasti
1x Laadimisjuhe
1x Kasutusjuhend



TEHNILISED NÄITAJAD

Nimipinge: 3,7 V

Aku maht: 300 mAh

Laadimisaeg: Umbes 2 tundi

Adapter: 5 V / 5 mA

Valmisolekuvool: 20 uA

Nimivool: 200 mA

Mootori müra: alla 60 detsibelli

Kasutamise aeg: umbes 2 tundi

Sagedusastmed: 5

Veekindluse reiting: IPX6

Stiil: Laadimine (sisseehitatud aku)

Sobib kasutamiseks: täiskasvanutele

Materjal: kõrge kvaliteediline silikoon +
plastik

Kasutamise keskkond:
tavatemperatuurid

OLULISED OHUTUSJUHISED


Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne toote kasutamist ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

- See hambapuhasti on mõeldud vaid hammastel kasutamiseks. See on mõeldud tõrva või hambakivi eemaldamiseks ja muudeks hambaravitöödeks, kus vibratsioon on eelistatav. Ärge kasutage seda seal, kus see ei ole ette nähtud. Kui te ei ole kindel oma rakenduses, võtke ühendust oma kohaliku edasimüüja või ostukohaga.
- Kasutage ainult ettenähtud otstarbel. Kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada kasutajale tõsiseid vigastusi või toote kahjustumist, mis võib toote parandamatuks muuta. Enne selle toote kasutamist veenduge, et olete tutvunud kasutusjuhendiga ja sellest aru saanud.
- Pöörake otsik alati hambapindade vastu, kui te neid puhastate. Vältige otsa mittevajalikku kokkupuudet pehmete kudede, näiteks igemete, limaskestade või nahaga.
- Kontrollige enne kasutamist, et otsik ebatavaliselt ei vibreeriks. Kui teil on kahtlusi, lõpetage kohe hambapuhasti kasutamine ja võtke ühendust edasimüüjaga.

- Ärge laske otsikul puudutada keraamilist proteesi hammaste puhastamise ajal. See võib otsikut kahjustada.
- Kasutage hambapuhastit ainult koos originaalse toiteadapteriga.
- Enne adapteri ühendamist pistikupessa veenduge, et selle hoiatussildil märgitud nimipinge vastab teie pistikupesa pingele.
- Hambapuhasti metallpea ei ole asendatav.
- Ärge kasutage ega hoiustage hambapuhastit välitingimustes, äärmuslikel temperatuuridel, otsese päikesevalguse käes, liigeses niiskuses või liigselt tolmuses keskkonnas.
- Kasutage seda -10°C kuni 40°C siseruumides.
- Ärge peske ega leotage toodet pikka aega.
- See toode on mõeldud ainult täiskasvanutele. Palun hoiustage seadet pärast selle kasutamist korralikult. Hoida lastest eemal, et vältida vigastuste teket.
- See toode sisaldab akut. Tulekahju või plahvatuse vältimiseks ärge asetage seda tulle või kõrge temperatuuriga konteinerisse.
- Ärge asetage seadet küttekehade, lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse.
- Hoidke hambapuhasti silmadest ohutul kaugusel.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest, et ühendada toiteadapterit pistikupesast lahti. See võib kahjustada toiteadapterit või pistikupesa. Ühendage toiteadapter pistikupesast lahti, tõmmates otse pistikust.
- Enne protseduuri alustamist kontrollige alati seadme komponente kahjustuste suhtes. Kahjustatud komponente ei tohi kasutada ja need tuleb asendada.
- Ärge asetage toiteadapteri kaablit teravate esemete lähisteile.
- Ohtliku olukorra tekkimise vältimiseks ärge parandage hambapuhastit ega selle tarvikuid ise ega modifitseerige neid mingil viisil. Kõigi parandustööde puhul pöörduge volitatud teeninduskeskusesse. Toote muutmisega riskite, et kaotate oma seaduslikud õigused, mis tulenevad mitterahuldavast toimimisest või kvaliteedigarantiist.
- Ära kasuta seadet, kui seade ei tööta või kui see on maha kukkunud või mingil viisil kahjustada saanud.
- Ärge kerige juhet ümber seadme: see võib põhjustada juhtme kulumist.
- Kõik hooldus- ja remonditööd peab teostama volitatud teenindaja.
- Toode ei sobi kasutamiseks tuleohtlike gaaside juuresolekul.
- Kasuta seda seadet ainult ettenähtud otstarbel.

Tähelepanu: ärge kasutage toodet laadimise ajal.

KOMPONENDID

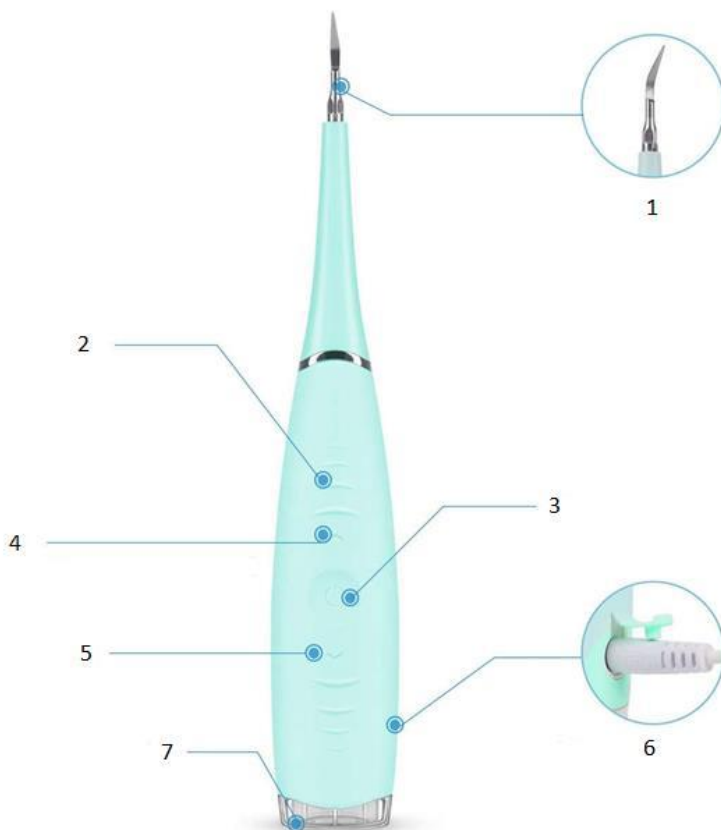

1. Puhastusotsik	5. Sagedusastme allareguleerimine
2. Libisemiskindel riba	6. Laadimispesa
3. ON/OFF lüüti	7. Laadimisindikaator
4. Sagedus ülesreguleerimine (kokku 5 käiku, mis on reguleeritavad üles-alla)	

LAADIMINE

USB-laetav:

Ohutu ja kiire USB laadimine.

1. Laadija asetage hambapuhasti alumise osa külge, siis ühendage laadija laadimise alustamiseks vooluvõrku.
2. Laadimise märgutuli süttib punaselt, mis näitab, et seade hakkas laadima. Kui seade on täielikult laetud, süttib roheline tuli.



MÄRKUS:

- Täielik laadimine võtab umbes 2 tundi.
- Pärast laadimisrežiimi sisenemist lülitub hambapuhasti väljalülitatud režiimi (seade ei tööta laadimise ajal).
- Kui toode on laetud, saab seda kasutada umbes 200 korda.

Kui laete hambapuhastit esimest korda või kui te ei ole seda pikka aega (kauem kui 3 kuud) kasutanud, siis võib täielik laadimine nõuda rohkem aega.

- Ühendage laetud hambapuhasti vooluadapterist lahti ja ühendage vooluadapter vooluvõrgust välja. Pärast hambapuhasti vooluadapterist lahtiühendamist lülitub LED-laadimisindikaator välja.

Soovitused võimalikult pika aku eluea saavutamiseks:

- Laadige hambapuhastit toatemperatuuril.
- Ärge jätke hambapuhastit vooluallikaga ühendatud kauemaks, kui on vaja selle laadimiseks.
- Ideaalis hoiustage seadet täislaetuna.
- Kui te ei kasuta seadet pikka aega, laadige seda vähemalt kord iga 6 kuu tagant.

KASUTUSJUHEND




See puhastusseade töötab põhimõttel, mis muudab elektrienergia vibratsioonieksiks.

Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu, reguleerige võimsust ülemise ja alumise reguleerimisnupu abil ja alustage puhastamist vajavate osade puhastamist.




Otsiku külge tuleb asetada hamba külge nii, et otsiku liikumine on paralleelne hamba pinnaga. Otsiku esimesed 2 mm on kõige tõhusamad!

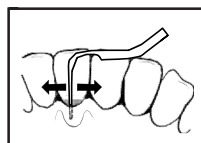

Tavapärase hammaste puhastamine nõuab harva rohkem kui 50% võimsust. Kuid raskesti eemaldatav hambakivi võib nõuda suuremat võimsuse seadistust.

Veenduge, et otsiku ja hamba pealispinna vaheline kontakt säiliks hambapinna puhastamise ajal. Liigutage otsikut aeglaselt edasi-tagasi ja lastes instrumendil töötada. Kasutage lühikesi ja pikki liigutusi, et iga hamba kogu pealispind oleks puhastatud.

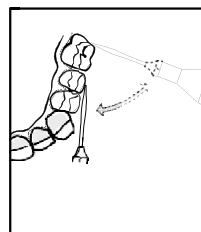

Otsik on tavaliselt suunatud hambatasku suunas.

Selleks, et otsik töötaks paralleelselt iga hamba pinnaga, on oluline järgida hamba anatoomiat.



Õige võimsuse seadistusega, sobiva survega hambale (umbes 20 grammi, kuid mitte üle 50) ja pinnaga paralleelselt töötava otsikuga on protseduur õrn, vaikne ja tõhus.



TÄHELEPANU!

- Kui ravi ajal on kuulda vinguvat heli (valju ja domineerivat), võib surve hambale olla liiga väike või otsik ei ole paralleelne hamba pinnaga.
- Ärge kasutage käega liiga palju jõudu. Puudutage hambaid alati kerge vajutusega.
- Olge ettevaatlik tundliku igemepiiri ümbruses.
- Mõnele kasutajale võib olla esimesel korral veidi raske kasutada, kuid järkjärgult muutub see teie hädavajalikuks suuhooldusvahendiks!
- Hambakatt ja plekid muutuvad pulbriliseks. Seetõttu loputage palun pärast kasutamist suu läbi.
- Palun kasutage seda niiskes suus.
- Kui niiskus on kasutamise ajal kadunud, loputage suu.
- Kui seda kasutatakse hamba siseküljel, kasutage hambapeeglit.

Pärast hammaste puhastamist;

- Loputage suu hästi.
- Peske metallpea puhta jooksva vee all.
- Pühkige hammaste puhastusvahendi korpus.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastussüsteeme või võtke ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnoahutuks ümbertöötlemiseks.



Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.

