

SMILY

Portatīvais elektriskais zobu tīrītājs



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,
paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.
No šī brīža jūsu zobi un smaganas būs daudz veselīgāki. Šis daudzfunkcionālais zobu
tīrītājs izmanto modernu vibrāciju, lai noņemtu zobakmeni no zobiem un masētu
smaganas, nodrošinot lielisku smaīdu un svaigu elpu katru dienu!

**Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas drošības vadlīnijas un lietošanas norādījumi.
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.**

KOMPLEKTĀ IETILPST:

- 1x elektrisks zobu tīrītājs
- 1x uzlādes vads
- 1x lietotāja rokasgrāmata



SPECIFIKĀCIJAS

Nominālais spriegums: 3,7 V

Baterijas jauda: 300 mAh

Uzlādes laiks: Aptuveni 2 stundas

Adapteris: 5 V / 5 mA

Gaidīšanas režīma strāva: 20 uA

Nominālā strāva: 200 mA

Motora troksnis: mazāk nekā 60 decibelu

Darba laiks: aptuveni 2 stundas

Ierīces darbības ilgums: 5

Ūdensizturības kategorija: IPX6

Veids: Uzlāde (iebūvēts akumulators)

Piemērots: pieaugušajiem

Materiāls: silikons + plastmasa

Izmantošanas vide: normāla temperatūra

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI


Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

- Šī ierīce ir paredzēta zobu tīrīšanai. Tā ir paredzēta zobu aplikuma noņemšanai un citiem zobārstniecības darbiem, kur šāda veida vibrācija ir lietderīga. Neizmantojiet to tādiem mērķiem, kuriem šī ierīce nav paredzēta. Ja neesat pārliecināts par pareizu ierīces lietošanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai veikalu, kur to iegādājāties.
- Izmantojiet to tikai paredzētajiem mērķiem. Lietošanas instrukciju neievērošanas gadījumā lietotājs var gūt nopietnas traumas vai sabojāt ierīci tā, ka to vairs nevarēs salabot. Pirms šīs ierīces lietošanas pārliecinieties, ka esat iepazinies un sapratīs lietošanas instrukciju.
- Veicot zobu tīrīšanu, uzgalis vienmēr jāpieliek pie zobu virsmas. Izvairieties no nevajadzīga uzgaļa kontakta ar mīkstajiem audiem, piemēram, smaganām, gļotādu vai ādu.
- Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai uzgaļa vibrācija nav neparasta. Ja tiek konstatētas kādas novirzes, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar izplatītāju.

- Nepieļaujiet, ka uzgalis darbības laikā pieskaras keramiskajai protēzei. Tas var sabojāt uzgali.
- Izmantojiet ierīci tikai ar tās oriģinālo strāvas adapteri.
- Pirms adaptera pieslēgšanas elektrotīklam pārlicinieties, vai uz tā nominālvērtības etiķetes norādītais spriegums atbilst tam spriegumam, kāds ir jūsu elektrotīkla rozetē.
- Zobu tīrītāja metāla uzgalis nav nomaināms.
- Nepakļaujiet zobu tīrīšanas ierīci apkārtējās vides ietekmei, ekstremālām temperatūrām, tiešiem saules stariem, pārmērīgam mitrumam vai pārāk putekļainai videi.
- Izmantojiet to no -10°C līdz 40°C un tikai iekštelpās.
- Nemazgājiet un neatstājiet ierīci šķidrumā ilgā laiku.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie. Lūdzu, pēc lietošanas ierīci uzglabāji pareizi. Sargājiet to no bērniem, lai viņi nejauši ar to nesavainotos.
- Šai ierīcei ir akumulators. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai sprādziena, nenovietojiet to ugunsnedrošā vietā vai vietā ar paaugstinātu temperatūru.
- Nenovietojiet ierīci netālu no sildītājiem, atklātas uguns vai citām iekārtām, kas ir karstuma avoti.
- Zobu tīrītāju vienmēr turiet pietiekamā attālumā no acīm.
- Neatvienojiet strāvas adapteri no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada. Tas var sabojāt strāvas adapteri vai kontaktligzdu. Atvienojiet strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas, velkot aiz kontaktdakšas.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīces sastāvdaļas nav bojātas. Bojātas sastāvdaļas nedrīkst lietot, un tās ir jānomaina.
- Nenovietojiet strāvas adaptera vadu virs asiem priekšmetiem.
- Lai izvairītos no bīstamu situāciju rašanās, neremontējiet ierīci vai tās aksesuārus paši un nekādā veidā tos nematicējiet. Ja nepieciešams veikt remontdarbus, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Veicot manipulācijas ar ierīci, jūs riskējat zaudēt savas likumīgās tiesības, kas izriet no neapmierinošas darbības vai kvalitātes garantijas.
- Nedarbiniet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, ja ierīce nedarbojas pareizi, ir nokritusi vai ir bojāta.
- Netiniet vadu ap ierīci.
- Jebkāda veida remonts ir jāveic tikai pilnvarotam servisa pārstāvim.
- Ierīce nav piemērota lietošanai uzliesmojošu gāzu klātbūtnē.
- Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajam mērķim.

Uzmanību: nelietojiet ierīci uzlādes laikā.

DETAĻAS

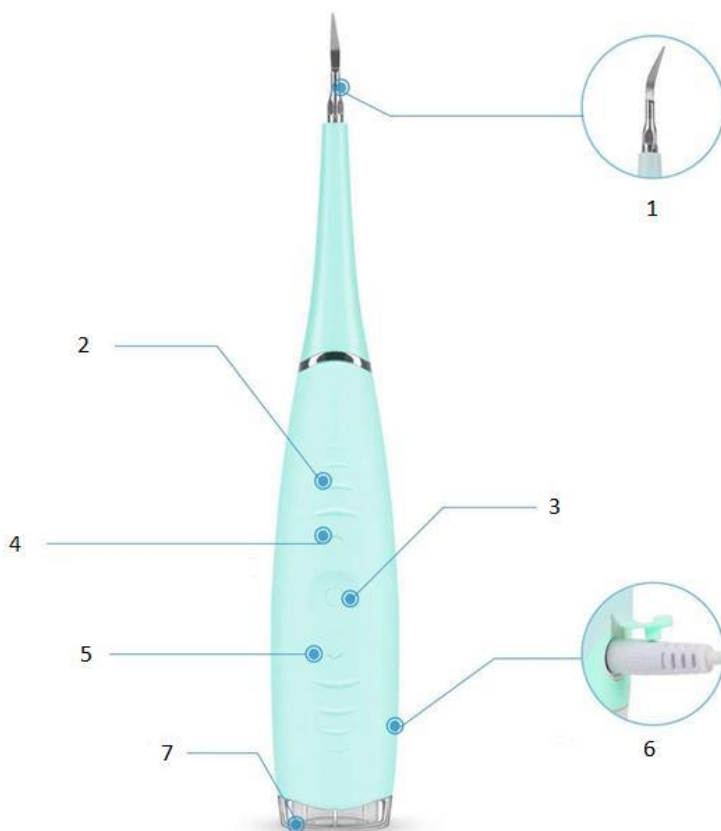

1. Tīrīšanas uzgalis	5. Intensitātes samazinātājs
2. Pretslīdes sloksne	6. Uzlādes ports
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) slēdzis	7. Uzlādes indikators
4. Intensitātes palielinātājs (5 regulējami intensitātes režīmi)	

UZLĀDE

Uzlādējams ar USB:

Drošs un ātrs uzlādes veids, izmantojot USB.

1. Ievietojiet lādētāju ierīces apakšdaļā, un pievienojiet to strāvas avotam, lai sāktu uzlādi.
2. Uzlādes indikators iedegsies sarkanā krāsā, norādot, ka ir sākušas uzlādes. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, iedegsies zaļa gaismas.



PIEZĪME:

- Pilnīga uzlāde ilgst aptuveni 2 stundas.
- Uzsākot uzlādi, zobu tīrītājs būs izslēgtā režīmā (uzlādes laikā ierīce nedarbosies).
- Kad ierīce būs pilnībā uzlādēta, to varēs izmantot aptuveni 200 reizes.

Ja zobu tīrītāju uzlādējat pirmo reizi vai ja to neesat lietojis ilgu laiku (ilgāk nekā 3 mēnešus), pilnīgai ierīces uzlādei var būt nepieciešams nedaudz ilgāks laiks.

- Atvienojiet uzlādēto zobu tīrītāju no strāvas adaptera un atvienojiet strāvas adapteri no elektriskās rozetes. Pēc ierīces atvienošanas no strāvas adaptera uzlādes LED indikators izslēgsies.

Ieteikumi iespējami ilgāka akumulatora darbības laika nodrošināšanai:

- Uzlādējiet zobu tīrītāju istabas temperatūrā.
- Neatstājiet ierīci pieslēgtu pie strāvas avota ilgāk, nekā nepieciešams tās pilnīgai uzlādei.
- Ideālā gadījumā uzglabājiet ierīci pilnībā uzlādētu.
- Ja ierīci ilgstoši nelietojat, tad uzlādējiet to vismaz reizi 6 mēnešos.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS



Šis zobu tīrītājs darbojas pēc principa, kas pārvērš elektrisko enerģiju vibrācijā.

Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, noregulējiet intensitāti, izmantojot intensitātes regulēšanas pogas, un sāciet tīrīt tās zobu daļas, kuras jums ir nepieciešams notīrīt.





Uzgali pielieciet pie zoba tā, lai uzgaļa kustība notiktu paralēli zoba virsmai. Pirmie 2 mm no uzgaļa ir visefektīvākie!

Parastai tīrīšanai reti kad ir nepieciešams vairāk nekā 50% no maksimālās intensitātes līmeņa. Tomēr, ja ir grūti noņemt zobakmeni, var būt nepieciešams lielāks intensitātes līmenis.

Pārliecinieties, ka zobu tīrīšanas laikā tiek saglabāts kontakts starp ierīces uzgali un zoba virsmu. Lēnām pārvietojiet uzgali uz priekšu un atpakaļ un ļaujiet ierīcei veikt savu darbu. Veiciet mazākas un lielākas kustības, lai tiktu noņemti visi netīrumi no zoba virsmas.

Uzgali jāvērš virzienā uz zoba kabatu.

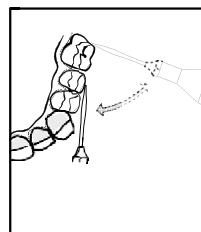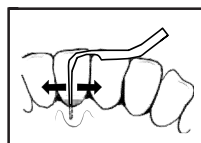

Lai uzgalis strādātu paralēli katra zoba virsmai, ir svarīgi ievērot zoba anatomiju.



Ar pareizu intensitātes režīmu, atbilstošu spiedienu uz zobu (aptuveni 20 g, bet ne vairāk kā 50 g) un uzgali, kas darbojas paralēli zobu virsmai, tīrīšana būs maiga, klusa un efektīva.



UZMANĪBU!

- Ja tīrīšanas laikā ir dzirdama čikstoša skaņa (skaļa un dominējoša), spiediens uz zobu var būt pārāk mazs vai arī uzgalis nav novietots paralēli zoba virsmai.
- Nespiediet uzgali pārāk stipri pie zobiem. Vienmēr piespiediet ierīci pie zobiem saudzīgi.
- Esiet uzmanīgi darbojoties ap jutīgo smaganu līniju.
- Dažiem lietotājiem pirmajā lietošanas reizē to var būt mazliet grūti lietot, taču pamazām tas kļūs par jūsu neaizstājamo mutes dobuma kopšanas rīku!
- Aplikumam un traipiem ir pulverveida konsistence. Tāpēc pēc ierīces lietošanas vienmēr izskalojiet muti.
- Lūdzu, lietojiet ierīci tikai tad, ja mute ir mitra.
- Ja lietošanas laikā mute kļūst sausa, lūdzu, izskalojiet muti.
- Lietojot ierīci zoba iekšpusē, izmantojiet zobu spoguļi.

Pēc zobu tīrīšanas pabeigšanas:

- Kārtīgi izskalojiet muti.
- Nomazgājiet metāla uzgali zem tīra tekoša ūdens.
- Noslaukiet zobu tīrīšanas ierīci.

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.

