

VFACE Massageroller



BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

In nur 5 Minuten abends können Sie Ihre Hautpflege auf ein neues Level bringen. Mit unserem Beauty-Bar-Gesichtsmassagegerät erreichen Sie endlich das volle Potential Ihrer Hautpflegeroutine und erreichen schnell strahlende, leuchtende Haut!

LIEFERUMFANG:

1 x Massageroller

1 x Handbuch

1 x Tasche

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Material: Metall

Farbe: Gold

Nennspannung: DC 1.5V

Frequenz: 6000 Umdrehungen pro Minute

Strom: 1 x AA-Batterie (nicht enthalten)

Wasserdichtes Design


Anwendung auf Stirn, Wange, Hals, Schlüsselbein, Schulter, Arm, Hände und Beine.





1. T-förmiger Kopf
2. Griff/Batteriefach
3. Drehbarer Ein-/Ausmacher

EINBAU/AUSTAUSCH DER BATTERIE

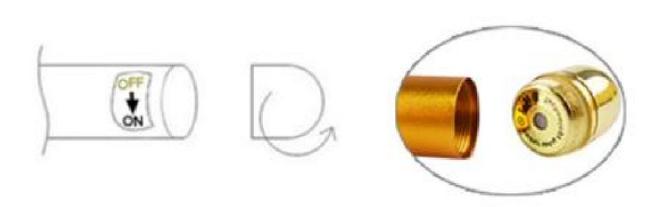


1. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Schalterabdeckung zu entfernen.



2. Legen Sie die Batterie (1 x AA) ein, schließen Sie den Schalterdeckel und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn wieder an seinem Platz zu befestigen.

SCHALTVORGÄNGE

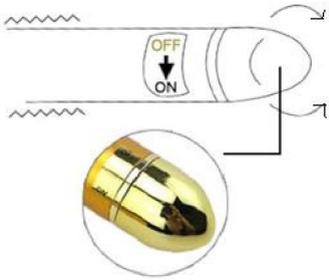

EINSCHALTEN: Drehen Sie die Schalterabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten.

AUSSCHALTEN: Drehen Sie die Schalterabdeckung im Uhrzeigersinn, um das Gerät auszuschalten.

ANLEITUNG:



1. Reinigen Sie Ihr Gesicht und Ihren Hals.
2. Tragen Sie Lifting-Serum oder Feuchtigkeitscreme auf.
3. Schalten Sie den Roller ein.
4. Lassen Sie die T-Bar-Spitze der VFACE mit einer Aufwärtsbewegung fest gleiten und führen Sie sie von den inneren zu den äußeren Bereichen des Gesichts.
5. Halten Sie das Werkzeug in jedem Bereich für 5 Sekunden.

Häufigkeit der Behandlung: Täglich (nach der morgendlichen und abendlichen Reinigung).

Behandlungszeit: 5-10 min

Reinigen Sie den VFACE Massageroller und bringen Sie ihn wieder in den ursprünglichen Zustand.

PFLEGE UND WARTUNG

- Verwenden Sie nach jedem Gebrauch ein weiches, trockenes Tuch, um alle Feuchtigkeit abzuwischen, und wischen Sie den Roller sauber. Tun Sie ihn wieder in die Originalverpackung.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn der Massageroller für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur und in trockener Umgebung.

Anweisungen für Recycling und Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Verhindern Sie eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung; recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gebrauchtgerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln.



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien übereinstimmt.