

SMILY

Limpiador dental sónico eléctrico y portátil



MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro producto.

De ahora en adelante, podrá mantener sus dientes y encías saludables. El limpiador de dientes ultrasónico puede retirar eficazmente la placa dental, el cálculo dental, las manchas y elimina fácilmente el sarro duro de los dientes para prevenir la enfermedad de las encías. Este escalador dental multi funcional utiliza vibraciones avanzada para quitar el sarro de los dientes y masajear las encías. Podrá lucir su sonrisa con confianza y ¡tener un aliento fresco cada mañana!

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea este manual detenidamente antes de usar este producto.

EL PAQUETE INCLUYE:

- 1 escalador dental sónico eléctrico y portátil
- 1 cable de carga
- 1 manual de usuario



ESPECIFICACIONES

Tensión nominal: 3,7 V

Capacidad de la batería: 300 mAh

Tiempo de carga: 2 horas
aproximadamente

Adaptador: 5 V / 5 mA

Corriente de espera: 20 uA

Corriente nominal: 200 mA

Ruido del motor: menos de 60 decibeles

Tiempo de carga: 2 horas
aproximadamente

Velocidades: 5

Clasificación impermeable: IPX6

Estilo: Batería integrada:

Adecuado para adultos

Material: silicona médica + plástico

Usar en ambientes de: temperatura
normal

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto Y GUARDELO PARA USO FUTURO.

- Este escalador está diseñado para fines dentales. Está diseñado para eliminar sarro o cálculos en los dientes y realizar otros trabajos dentales en los que la vibración ultrasónica es beneficiosa. No lo use para aplicaciones para las cuales no está diseñado. Si no está seguro de su aplicación, comuníquese con su distribuidor local o con el lugar de compra.
- Úselo solo para los fines previstos. El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento puede provocar que el usuario sufra lesiones graves o que el producto se dañe, posiblemente sin posibilidad de reparación. Antes de utilizar este producto, asegúrese de haber estudiado y comprendido las instrucciones de funcionamiento.
- Aplique siempre la punta contra las superficies de los dientes al raspar. Evite el contacto innecesario de la punta con tejidos blandos, como gingivales, mucosas o piel.


- Compruebe si hay vibraciones anormales en la punta antes de usar. Si se encuentran anomalías, deje de usar el limpiador de dientes inmediatamente y comuníquese con el distribuidor.
- No permita que la punta toque la prótesis de cerámica durante el raspado. Esto podría dañar la punta.
- Utilice únicamente el escalador con el adaptador de corriente original.
- Antes de conectar el adaptador a una toma de corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en su etiqueta de clasificación corresponda con el voltaje de su toma de corriente.
- La cabeza de metal del limpiador de dientes no es reemplazable.
- No exponga el limpiador de dientes al ambiente exterior, temperaturas extremas, luz solar directa, humedad excesiva o ambientes excesivamente polvorientos.
- Úselo en un ambiente interior de -10 ° C a 40 ° C.
- No lavar ni remojar el producto durante mucho tiempo.
- Este producto está restringido solo a adultos. Guarde el producto correctamente después de su uso. Manténgalo alejado de los niños para evitar lesiones accidentales.
- Este producto contiene batería. No lo coloque en un recipiente de fuego o de alta temperatura para evitar fuego o explosión.
- No coloque el producto cerca de calentadores, fogatas u otros equipos que sean una fuente de calor.
- Mantenga el limpiador de dientes a una distancia suficiente de los ojos.
- No desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente tirando del cable de alimentación. Esto podría dañar el adaptador de corriente o la toma de corriente. Jale del enchufe para desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente.
- Siempre examine los componentes de la unidad para buscar daños antes de comenzar el tratamiento. Los componentes dañados no deben usarse y deben reemplazarse.
- No coloque el cable del adaptador de corriente sobre objetos afilados.
- Para evitar que surja una situación peligrosa, no repare el limpiador de dientes ni ninguno de sus accesorios usted mismo ni lo modifique de ninguna manera. Para todas las reparaciones, comuníquese con un centro de servicio autorizado. Al manipular el producto, corre el riesgo de anular sus derechos legales derivados de un rendimiento insatisfactorio o una garantía de calidad.
- No use el aparato con un cable o enchufe roto, o si funciona mal, se cae o se daña de alguna manera.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Cualquier servicio o reparación debe ser realizado por un representante de

servicio autorizado.

- El producto no es adecuado para su uso en presencia de gases inflamables.
- Utilice este aparato solo para el fin para el que fue diseñado.

Atención: no utilice el producto mientras se carga.

COMPONENTES

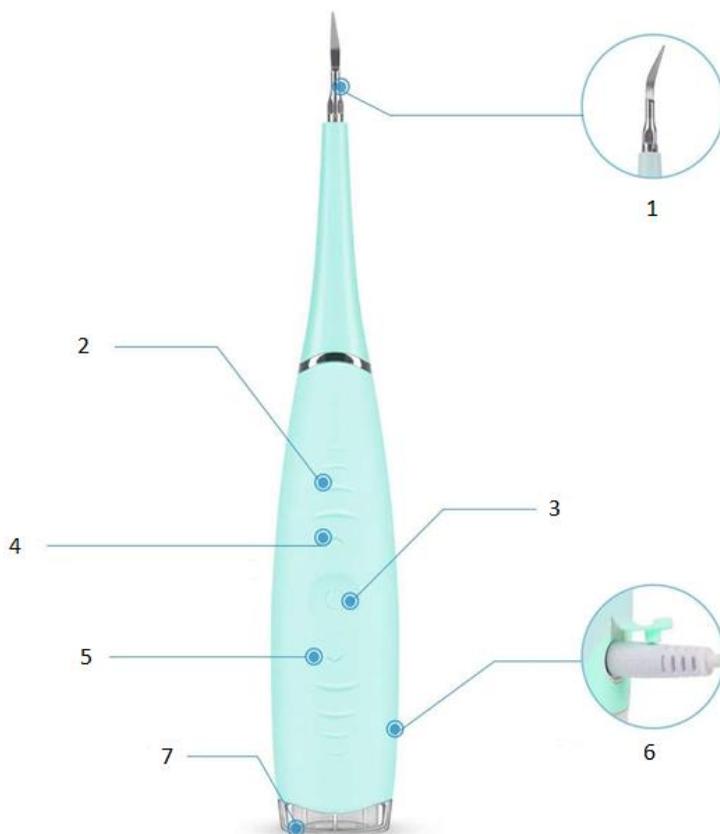

1. Cabezal de limpieza	5. Reducir la velocidad
2. Tira antideslizante	6. Puerto de carga
3. Interruptor encendido / apagado	7. Indicador de carga
4. Velocidades (5 velocidades ajustables de arriba a abajo)	

CÓMO SE CARGA

USB recargable:

Carga segura y rápida con USB.

1. Inserte el cargador en la extremo del limpiador de dientes, conéctelo a la corriente para comenzar a cargar.
2. La luz indicadora de carga se iluminará en rojo, lo que señala el inicio de la carga. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz verde se encenderá y dejará de parpadear.



NOTA:

- Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.
- Después de ingresar al modo de carga, el limpiador de dientes cambiará al modo apagado (la máquina no funcionará mientras se carga).
- Una vez que se carga el producto, se puede utilizar unas 200 veces.

Si está cargando el limpiador de dientes por primera vez o si no lo ha usado durante mucho tiempo (más de 3 meses), una carga completa puede requerir más tiempo.

- Desconecte el limpiador de dientes cargado del adaptador de corriente y desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente. Después de desconectar la recortadora de cabello del adaptador de corriente, el indicador de carga led se apagará.

Recomendaciones para lograr la mayor duración posible de la batería:

- Cargue el producto a temperatura ambiente.
- No deje el producto conectado a la fuente de alimentación eléctrica durante más tiempo del necesario para cargarlo.
- Lo ideal es que guarde la recortadora completamente cargada.
- Si no usa la recortadora durante mucho tiempo, cárguela al menos una vez cada 6 meses.

INSTRUCCIONES DE USO




Este limpiador funciona según el principio que convierte la energía eléctrica en energía de vibración ultrasónica.

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo, ajuste la potencia a través de los botones de ajuste superior e inferior y comience a limpiar las partes que necesitan limpieza.



El lado del extremo de la punta se aplicará al diente de manera que el movimiento de la punta sea paralelo a la superficie del diente.


¡Los primeros 2 mm de la punta son los más eficientes!

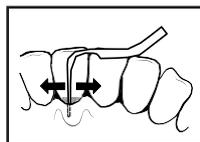

Una limpieza normal casi nunca requiere más del 50 % de nivel de potencia. Sin embargo, los cálculos difíciles de eliminar pueden requerir un ajuste de potencia más alto.

Asegúrese de que el contacto entre la punta y la superficie del diente se mantiene durante la limpieza. Siga moviendo la punta lentamente hacia adelante y hacia atrás y deje que el instrumento haga el trabajo. Utilice pasadas cortas y largas para que toda la superficie de cada diente quede descamada.

La punta normalmente apunta hacia la cavidad del diente.

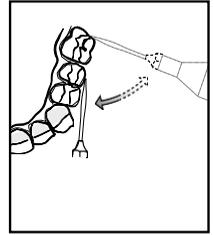

Para mantener la punta trabajando paralela a la superficie de cada diente, es importante seguir la anatomía del diente.



Con el ajuste de potencia correcto, la presión adecuada contra el diente (aproximadamente 20 gramos pero no más de 50) y la punta operando paralela a la superficie, el tratamiento será suave, silencioso y eficiente.



¡ATENCIÓN!

- Si durante el tratamiento se escucha un chirrido (fuerte y dominante), es posible que la presión contra el diente sea demasiado baja o que la punta no esté paralela a la superficie del diente.
- No aplique mucha fuerza con la mano. Siempre toque los dientes con una ligera presión.
- Tenga cuidado con la delicada línea de las encías.
- Para algunos usuarios, puede ser un poco difícil de usar la primera vez, ¡pero gradualmente se convertirán en sus herramientas imprescindibles de cuidado bucal!
- La placa y la mancha son en forma de polvo. Por lo tanto, enjuague su boca después de usar.
- Úselo con la boca húmeda.
- Si se pierde humedad durante el uso, enjuague la boca.
- Cuando se usa en el interior del diente, use un espejo dental.

Después de terminar de limpiar los dientes;

- Enjuáguese bien la boca.
- Lave la cabeza de metal con agua corriente limpia,
- Limpie el cuerpo del limpiador de dientes.

Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Este producto se puede reciclar en el ambiente de manera segura.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.

