

SMILY

Prijenosni električni sonični skidač zubnog kamenca



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Dragi korisniče,

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Od sada možete održavati zdravlje zuba i desni. Učinkovito uklanja zubni plak, zubni kamenac, mrlje, kao i tvrdi kamenac sa zuba, time sprečavajući bolesti desni. Ovaj višenamjenski skidač zubnog kamenca upotrebljava napredne vibracije za uklanjanje kamenca sa zuba i masažu desni, tako da se možete osmehivati sa samopouzdanjem i uživati u svježem dahu svako jutro!

Ovaj se priručnik odnosi na sigurnosne smjernice i upute za upotrebu. Prije upotrebe proizvoda temeljito proučite ovaj priručnik.

PAKIRANJE UKLJUČUJE:

- 1 x električni sonični skidač zubnog kamenca
- 1 x kabel za punjenje
- 1 x korisnički priručnik



TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 3,7 V

Kapacitet baterije: 300 mAh

Vrijeme punjenja: oko 2 sata

Adapter: 5 V / 5 mA

Struja u stanju mirovanja: 20 uA

Nazivna struja: 200 mA

Buka motora: manje od 60 decibela

Radno vrijeme: oko 2 sata

Stupnjevi rada: 5

Ocjena vodootpornosti: IPX6

Stil: punjenje (ugrađena baterija)

Primjenjivi korisnici: odrasli

Materijal: silikon medicinske kvalitete + plastika

Okruženje za upotrebu: normalna temperatura

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE


Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆE UPOTREBE.

- Ovaj skidač zubnog kamenca dizajniran je za stomatološke svrhe. Dizajniran je za uklanjanje tartara ili kamenca na zubima i druge dentalne aktivnosti u kojima se upotrebljavaju ultrazvučne vibracije. Nemojte ga upotrebljavati za svrhe za koje nije namijenjen. Ako niste sigurni u vezi s upotrebom, obratite se svojem lokalnom distributeru ili mjestu kupnje.
- Upotrebljavajte ga samo za namjeravane svrhe. Nepoštivanje uputa za upotrebu može dovesti do toga da korisnik pretrpi ozbiljne ozljede ili se proizvod ošteti, ponekad tako da se više ne može popraviti. Prije upotrebe ovog proizvoda provjerite jeste li proučili i razumjeli upute za upotrebu.
- Uvijek namjestite vrh na površinu zuba tijekom skidanja kamenca. Izbjegavajte nepotreban kontakt vrha s mekanim tkivima, odnosno s desnama, sluznicom ili kožom.
- Prije upotrebe provjerite vibrira li vrh na uobičajeni način. Ako utvrdite abnormalnosti, odmah prestanite upotrebljavati skidač i obratite se distributeru.

- Ne dopustite da vrh dodiruje keramičku protezu tijekom skidanja zubnog kamenca. To može oštetiti vrh.
- Upotrebljavajte skidač zubnog kamenca samo s originalnim strujnim adapterom.
- Prije priključivanja adaptera u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu vaše utičnice.
- Metalna glava uređaja za čišćenje zubi nije zamjenjiva.
- Ne izlažite uređaj vanjskom okruženju, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, prekomjernoj vlažnosti ili pretjerano prašnjavoj okolini.
- Upotrebljavajte ga na temperaturama od -10 °C do 40 °C u zatvorenom okruženju.
- Ne perite i ne namačite proizvod dulje vrijeme.
- Upotreba ovog uređaja ograničena je samo na odrasle. Propisno pohranite proizvod nakon upotrebe. Držite ga podalje od djece kako bi se izbjegle slučajne ozljede.
- Ovaj proizvod sadrži bateriju. Nemojte ga stavljati u vatru ili spremnike s visokom temperaturom kako biste izbjegli požar ili eksploziju.
- Ne postavljajte proizvod u blizinu grijača, otvorene vatre ili ostale opreme koja služi kao izvor topline.
- Uređaj za čišćenje zubi držite na dovoljnoj udaljenosti od očiju.
- Ne isključujte strujni adapter iz utičnice tako da povučete kabel za napajanje. To može oštetiti strujni adapter ili utičnicu. Isključite strujni adapter iz utičnice tako da povučete utikač.
- Prije početka liječenja obavezno pregledajte ima li oštećenja na komponentama jedinice. Oštećene komponente ne smiju se upotrebljavati i treba ih obavezno zamijeniti.
- Ne postavljajte kabel strujnog adaptera preko oštih predmeta.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati uređaj za čišćenje zubi ili bilo koji njegov pripadajući dio ili ga modificirati na bilo koji način. Za sve popravke obratite se ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da vršite neovlaštene izmjene na stroju, riskirate poništiti svoja zakonska prava koja proizlaze iz nezadovoljavajuće izvedbe ili jamstva kvalitete.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, ili ako ne radi ispravno ili je u bilo kojem slučaju pao ili se oštetio.
- Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Svako servisiranje ili popravak mora izvesti ovlaštenu predstavnik servisa.
- Proizvod nije prikladan za upotrebu u prisutnosti zapaljivih plinova.
- Upotrebljavajte ovaj uređaj samo za namjeravanu svrhu.

Pažnja: Nemojte upotrebljavati proizvod tijekom punjenja.

KOMPONENTE

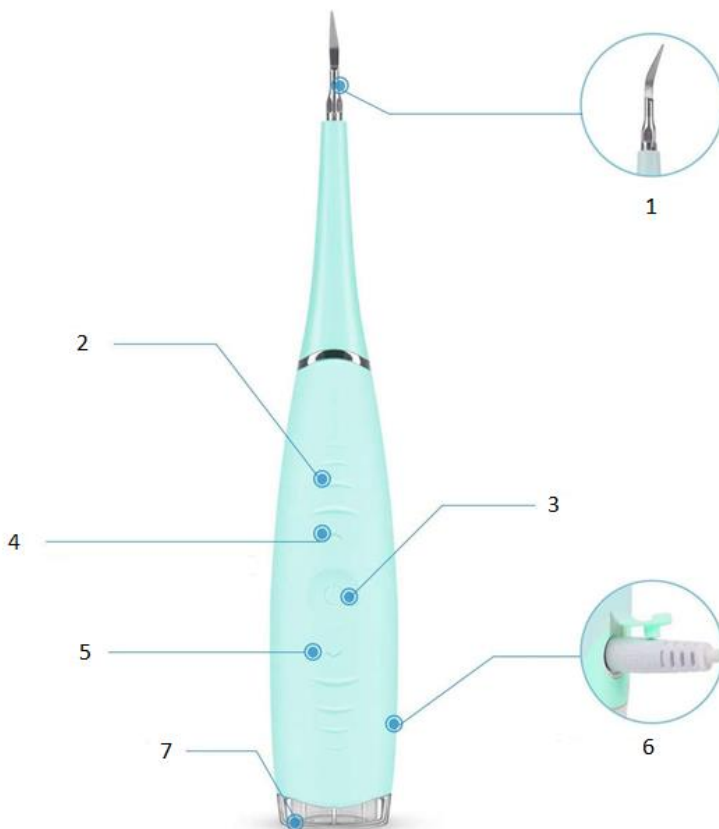

1. Glava za čišćenje	5. Tipka za niži stupanj
2. Protuklizna traka	6. Priključak za punjenje
3. Prekidač ON/OFF	7. Indikator punjenja
4. Tipka za viši stupanj (ukupno 5 stupnjeva koji se mogu prebacivati od viših prema nižima)	

PUNJENJE

USB punjivo:

Siguran i brz način punjenja putem USB-a.

1. Umetnite punjač u donju stranu uređaja za čišćenje zubi, priključite ga na mrežu napajanja za početak punjenja.
2. Žaruljica indikatora punjenja svijetlit će crveno, što znači da počinje punjenje. Kad se uređaj potpuno napuni, uključit će se zeleno svjetlo.



NAPOMENA:

- Potpuno punjenje traje otprilike 2 sata.
- Nakon ulaska u način punjenja uređaj za čišćenje zubi prebacit će se u način isključivanja (uređaj neće raditi tijekom punjenja).
- Nakon što se proizvod napuni, može se upotrijebiti oko 200 puta.

Ako prvi puta punite uređaj za čišćenje zubi ili ako ga već dugo ne upotrebljavate (dulje od 3 mjeseca), tada bi vam za potpuno punjenje moglo zatrebati više vremena.

- Odvojite napunjeni uređaj za čišćenje zubi od strujnog adaptera i iskopčajte strujni adapter iz električne utičnice. Nakon iskopčavanja proizvoda sa strujnog adaptera, LED indikator punjenja također se isključuje.

Preporuke za postizanje najdužeg mogućeg vijeka trajanja baterije:

- Puniti proizvod na sobnoj temperaturi.
- Uređaj za čišćenje zubi ne ostavljajte priključenim na izvor električne energije dulje nego što je potrebno za punjenje.
- Idealno bi bilo da uređaj uvijek spremate u potpunosti napunjen.
- Ako uređaj ne upotrebljavate dulje vrijeme, napunite ga barem jednom svakih 6 mjeseci.

UPUTE ZA UPOTREBU




Ovaj čistač radi na principu koji pretvara električnu energiju u energiju ultrazvučnih vibracija.

Pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili uređaj, prilagodite napajanje s pomoću gornje i donje tipke za prilagođavanje i započnite s čišćenjem dijelova koji trebaju čišćenje.




Bočna strana vrha mora se namjestiti na zub tako da je kretanje vrha paralelno s površinom zuba. Prva 2 mm vrha najučinkovitija su!

Uobičajeno skidanje zubnog kamenca rijetko zahtijeva više od 50 % snage. Međutim, kamenac koji se teško uklanja može zahtijevati veću postavku snage.

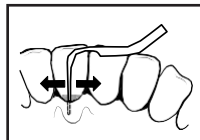

Pazite da održite kontakt između vrha i površine zuba tijekom skidanja kamenca. Nastavite polako pomicati vrh naprijed-natrag i pustite instrument da radi svoj posao. Upotrebljavajte kratke i duge poteze dok ne prođete površinu svakog zuba.

Vrh je normalno usmjeren prema zubnom džepu.

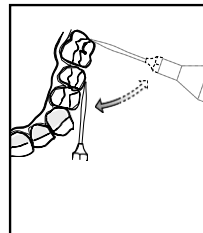

Da bi vrh nastavio raditi paralelno s površinom svakog zuba, važno je pratiti anatomiju zuba.



S pravilno prilagođenom snagom, propisnim pritiskom koji se primjenjuje na zub (približno 20 grama, ali ne više od 50) i vrhom koji radi paralelno s površinom, tretman će biti nježan, tih i učinkovit.



PAŽNJA!

- **Ako se tijekom tretmana začuje škripanje (glasno i jako), pritisak koji se primjenjuje na zub može biti preslab ili vrh nije paralelan s površinom zuba.**
- **Ne pritišćite vrh prejako. Uvijek primjenjujte lagani pritisak na zube.**
- **Budite oprezni oko osjetljive linije desni.**
- **Nekim će korisnicima možda biti malo teško upotrebljavati uređaj u početku, ali postupno će postati vaš obavezni alat za njegu usne šupljine!**
- **Plak i mrlje su u obliku praha. Stoga obavezno isperite usta nakon upotrebe.**
- **Upotrebljavajte uređaj dok je usna šupljina vlažna.**
- **Ako se tijekom upotrebe uređaja izgubi vlažnost, isperite usta.**
- **Kad upotrebljavate uređaj s unutarnje strane zuba, upotrijebite i zubno ogledalo.**

Nakon završetka čišćenja zubi:

- Dobro isperite usta.
- Operite metalnu glavu pod čistom tekućom vodom.
- Obrišite tijelo uređaja za čišćenje zubi.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.

