

## KOMPLET {SIX PACK}

### 1. Kako uređaj funkcionira?

Komplet {Six Pack} koristi nisku električnu struju za stezanje vaših mišića i nježnu masažu ili efekt jačanja mišića:

- opuštanje napetih mišića u ramenima, leđima i struku
- poboljšanje tonusa mišića
- masaža.

### 2. Tehnički podaci:

Napon:	Alkalna baterija 1,5 V AAA x 2 EA
Načini rada:	A ~ F (6 načina rada)
Frekvencija:	1 ~ 100 Hz
Trajanje programa:	12 minuta
Izlaz:	Maks. 9,8 mA
Veličina:	21 x 10 x 2,3 cm
Težina:	57,4 g

### 3. Značajke proizvoda:

#### 3.1. Terapija niske frekvencije


Uz pomoć struje uređaj stvara puls niske frekvencije koji pozitivno djeluje na tijelo. Intenzitet namjestite po želji. Niska frekvencija ima blagi učinak na tijelo, nalik masaži.

#### 3.2. Odaberite jedan od šest programa

3.2.1. Jednostavno odaberite jedan od šest načina rada

3.2.2. Program se automatski isključuje nakon 12 minuta

### 4. Kako koristiti

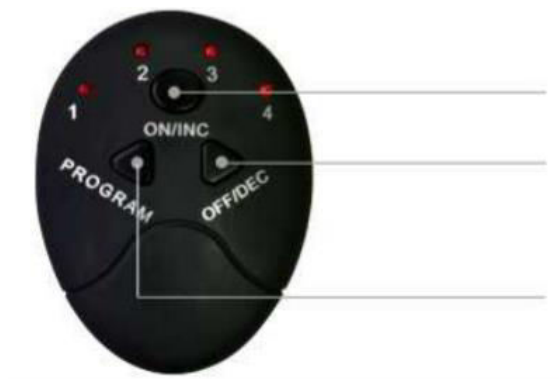


**ON/INC:** uključivanje/povećanje intenziteta

**OFF/DEC:** isključivanje/smanjenje intenziteta

**PROGRAM:** prebacivanje između programa

Indikatori načina rada:

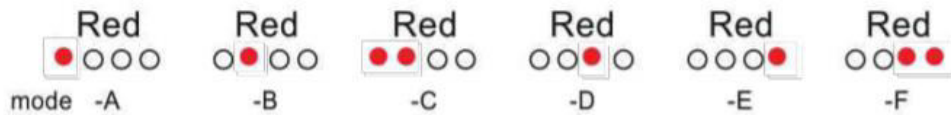

Kada pritisnete gumb „uključivanje/povećanje intenziteta”, žaruljica svijetli jače i obrnuto, kada pritisnete gumb „isključivanje/smanjenje intenziteta”, žaruljica svijetli slabije.

- Oba gumba imaju deset razina
- Prebacivanje između programa: birajte između šest načina rada (A ~ F)
- Kada je baterija prazna, uklonite poklopac s odjeljka za bateriju i zamijenite bateriju, a zatim ponovno stavite poklopac.

#### 5. Kako koristiti komplet {Six pack}

- Uvijek koristite na čistoj i suhoj koži
- Uklonite zaštitni film s gel jastučića
- Postavite uređaj na željeni dio tijela (trbuh, noge, ramena itd.)

**! NEMOJTE UKLJUČITI UREĐAJ PRIJE NEGO ŠTO GA STAVITE NA TIJELO.**

**! NEMOJTE DIRATI LJEPLJIVE POVRŠINE KAKO BISTE IZBJEGLI SMANJENJE ŽIVOTNOG VIJEKA GEL JASTUČIĆA.**

#### 6. Prva upotreba

- Izvadite uređaj iz kutije
- Postavite uređaj na željeni dio tijela
- Odaberite željeni program
- Podesite intenzitet
- Trajanje programa je 12 minuta
- Pritisnite gumb za isključivanje više puta dok se žaruljica ne isključi

Uređaj je najbolje koristiti do 12 minuta po sesiji, 2 – 3 puta dnevno. Ako ga koristite duže, možete se osjećati umorno.

Izbjegavajte korištenje uređaja 30 minuta nakon obroka. Uređaj je najbolje koristiti nakon tuširanja, na čistoj i suhoj koži.

#### 7. Održavanje

- Isključite uređaj nakon upotrebe.
- Stavite zaštitni film na gel jastučice kako bi ostali ljepljivi i čisti.
- Prljavštinu očistite vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

- Nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini, vlazi, vatri, struji itd.
- Čuvajte ga izvan dohvata djece.
- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.
- Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, izvadite bateriju iz regulatora.

#### 8. Zamjena baterije

- Uklonite poklopac odjeljka za baterije
- Ispravno umetnite baterije (obratite pažnju na + i -)
- Ponovno stavite poklopac
- Uključite uređaj i provjerite radi li

#### SAŽETAK:



1. Otvorite odjeljak za baterije



2. Umetnite baterije (2 x AAA)



3. Pričvrstite regulator na jedinicu



4. Odlijepite zaštitni film



5. Pričvrstite regulator na jedinicu



6. Stavite traku na ruku/nogu