

KILPOR 2.0 VÁKUUMOS PÓRUSTISZTÍTÓ



Modelszám: XN-8030

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A vásárlónak

Köszönjük a vásárlását. A termék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megértse a termék használatát. A termék esetleges meghibásodásának és személyi sérülésének elkerülése érdekében mindig használja ezt a kézikönyvet. Kérjük, egye félre ezt a kézikönyvet későbbi referencia céljából.

Termék leírása

A vákuumos pórustisztító egy negatív nyomással és dermabráziós funkcióval rendelkező szépségápolási eszköz, amely megtisztítja a pórusokat, kiszívja az olajat és más szennyeződések a bőréről. Ez a hordozható mikrodermabráziós kozmetikai készülék 4 cserélhető szívófejjel és 4 különféle funkcióval rendelkezik (bőrhámlás, pórustisztítás, mitesszerek és pattanások tisztítása, ráncok eltávolítása). A Kilpor 2.0 vákuumos pórustisztító 5 különféle erősségű szívó üzemmóddal rendelkezik, hogy kielégítsen különböző felhasználói igényeket.

Műszaki adatok

Modell szám: XN-8030

Méret: 180*40*39 mm

Teljesítmény: 0.7 W

Bemeneti feszültség: DC 5V

Névleges áram: ≤500 mA

Elemkapacitás: 1000 mA

Töltési idő: kb. 90 perc

Használati idő: kb. 2,5 óra

A csomag tartalma

1. Főegység 1x
2. Többfunkciós szívófej 4x (1 x nagy körfej, 1 x kis körfej, 1x ovális fej, 1 x mikrokristályos fej)
3. Szivacsokat és gumi gyűrűket tartalmazó csomag
4. USB töltőkábel 1x
5. A termék használati útmutatója 1x



A különféle elemek bemutatása



1. Szabadon kicserélhető fej
2. Bekapcsológomb (öt sebességi beállítás)
3. Töltésjelző LED izzó
4. Töltőaljzat



A termék töltésekor csatlakoztassa az USB vezetékét a töltőhöz (nem tartozék) vagy a számítógéphez. A piros lámpa töltés közben világít, majd zöldre vált a töltés befejeztével.

A különféle fejek bemutatása

Négy darab fej



Tegye szebbé a bőrét mikrokristályokkal

A mesterséges mikrokristályokat tartalmazó fej a bőr tisztítására és az elhalt bőr eltávolítására alkalmas.

Nagy méretű körfej (erős szívás)

Ez a fej az erős szívásnak köszönhetően tökéletes a sminkmaradvány, olajok, por és más szennyeződések eltávolításához. Érzékeny vagy száraz bőrű emberek kérjünk, óvatosan használják ezt a fejet. Hetente egyszer, 5 percig használatos, a bőr állapotától függően.



Kis méretű körfej (gyenge szívás)

Ez a fej tökéletes a sminkmaradvány, olajok, por és más szennyeződések eltávolításához az érzékeny vagy száraz bőrű személyek számára.

Ellipszis alakú fej (gyenge szívás)

Ez a kis ellipszis alakú fej felhasználható a napi bőrápoláshoz. A szem- vagy száj körüli ráncok eltávolításához szívja be a területet, majd gyorsan engedje el azt – ismételve meg ezt többször. Az arcbőr felemeléséhez is használható.




Figyelem

1. A készülék kezelése előtt ellenőrizze, hogy az arca és a kezei szárazok, és víztől vagy más folyadéktól mentesek. Ha a folyadék kerül a készülékbe, az károsíthatja a készüléket.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrőszivacs megfelelően van-e a szűrőpohárban, és hogy a szivacs száraz-e, és hogy az víztől vagy más folyadéktól mentes. A bőrt szárazon kell kezelni különben gép szivattyújába kerülő bármilyen folyadék, eltömítheti a gépet, vagy tönkre teheti azt.
3. Ezt a készüléket nem szabad gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy tapasztalatlansággal és / vagy elégtelen ismeretekkel rendelkező személyek számára használni, kivéve, ha a biztonságért és jóléért felelős személy felügyelete alatt áll, vagy utasításokat kapnak. ettől a személytől, hogyan kell kezelni a készüléket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak felügyelet nélkül végezhetik el.
4. Ez a termék nem használható olyan testrészekre, amelyek bármilyen műtéten átestek, heg által gyógyulnak. Terhes nőknek és szívbetegségben szenvedő betegnek sem javasoljuk a termék használatát.
5. Figyelmeztetés: Ne helyezze vízbe a terméket, és ne mossa azt vízzel.
6. A termék használata közben ne viseljen nyakláncot, fülbevalót vagy bármilyen arcékszert. A nyakláncot, fülbevalót és más típusú ékszereket a termék használata előtt le kell venni.
7. Ha fájdalmat tapasztal a termék használata közben, azonnal hagyja abba a használatot.
8. Ez nem egy orvosi eszköz. A termékkel kapcsolatban semmi sem helyettesít orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést.
9. Ez a termék nem vízálló, ezért nem szabad zuhanyzóban vagy más olyan helyen használni, amely vizet érint. Ne merítse a készüléket víz alá.
10. Ne tárolja a terméket fürdőszobában vagy magas nedvességtartalmú helyiségben.
11. Ne tárolja és használja a terméket hő- vagy tűzforrás közelében.
12. Tartsa távol a gyermekektől. Ez az eszköz nem játék, ezért gyermekek nem használhatják, ezért nem tárolandó gyermekek számára elérhető helyen.
13. Ne használja irritált bőrön. Ha bőrirritáció lép fel, hagyja abba a használatot.
14. Óvatosan használja a szem környékén.
15. Ez a készülék kizárólag otthoni és száraz felhasználásra készült.
16. Szívófej nélkül soha ne használja a készüléket.
17. Rendszeresen távolítsa el a por, a bolyha, a haj stb. által okozott dugulásokat, mivel ezek jelentősen csökkentik az eszköz szívóteljesítményét és/vagy általános teljesítményét.
18. Használaton kívül hűvös, száraz helyen tárolandó.
19. Na használja a készüléket, ha az nem működik úgy, ahogy kellene, éles ütést kapott, leesett, megsérült, szabadban maradt vagy vízbe esett.
20. A készüléket ne kapcsolja be annak (vagy készülékeinek) tisztítás közben.
21. Meghibásodás és / vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a javítást egyedül, és győződjön meg arról, hogy a terméket a helyi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítja. +

A szívófejek telepítésének lépései

Helyezze a szűrőszivacsot a szűrőpohárba az alább látható módon;

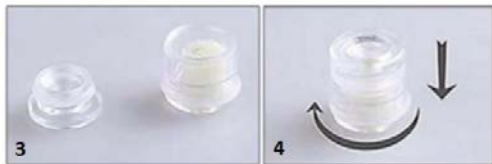

Először távolítsa el a szívófejet. Fogja meg a szívófejet és forgassa el azt az óramutató járásával megegyezően, miközben kihúzza azt.

Távolítsa el a régi vagy/és helyezze be az új szűrőszivacsot a szűrőpohárba. Ellenőrizze, hogy a szűrőszivacs jól van-e a csészében. Helyezze vissza a fúvóka kupakját a fúvókára (fordítsa el a kupakot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a kupakot a helyére).

Most visszahelyezheti a szívófejet. Fogja meg a fejet és forgassa az óramutató járásával megegyező irányban, amíg vissza nem illeszkedik a fúvókához.

vagy piszkos, kérjük, cserélje ki azokat

Ha a szilikon gyűrű vagy a szűrőszivacs, sérült

Használat előtt

Figyelem: A termék megfelelő használata nagyon fontos!

A termék használata tágítsa ki a pórusait meleg vízzel (lehetőleg néhány percig forró törülközővel), hogy a szennyeződések könnyen kiszivároghassanak.

- A termék használata előtt 5 perccel használjon gőzölőt, forró törülközőt vagy mitesszer eltávolító gélt/krémet bőrén, a pórusok teljes kinyitásához, így fog a termék a leghatékonyabban működni.
- Ellenőrizze, hogy a pórusok teljesen nyitottak-e a forró fürdő vagy edzés után, és tartsa az arcot nedvesen.
- Kérjük, lassan mozgassa a készüléket bőr mentén. **Ne maradjon sokáig egy helyen, hogy ne sértse meg a bőrt.** Szívja fel a szükséges mennyiségű olajokat, pattanásokat, a mitesszereket és más szennyeződések. Ha a mitesszerek mélyen vannak a bőrbe épülve, akkor a terméket krémmel együtt használja.
- A használat után a pórusok összehúzásához használjon tonert vagy hideg vizet.



Utasítások



- 1. LÉPÉS:** Távolítsa el a sminkjét és tisztítsa meg az arcát.
- 2. LÉPÉS:** Használjon meleg törülközőt vagy arcgőzölőt a pórusok megnyitásához.
- 3. LÉPÉS:** Vigyen fel néhány arckrémeket a mitesszerek felszabadításához.
- 4. LÉPÉS:** Igényei szerint válasszon a négy szívófej közül. Kezdje a legalacsonyabb szívóteljesítménnyel.
- 5. LÉPÉS:** Mozgassa állandó sebességgel a mitesszertisztítót a pórusai körül, lassan mozogjon, ne maradjon túl sokáig egy helyen a sérülések elkerülése érdekében, ne nyomja le erősen, vagy függőlegesen. Ne maradjon egy helyen 3 másodpercnél tovább; különben bőrpír és zúzódások maradnak az arcán.
- 6. LÉPÉS:** Az arc megtisztítása után használjon jeges törülközőt, vizet vagy pórus összehúzó folyadékot a kezelt pórus helyreállításához. Az arc megtisztítása után vigyen fel arcmaszkot a pórusok összehúzására.

Hogyan válassza ki a különböző szívóerőket?

A pórustisztító vákuumot különféle bőrtípusokhoz tervezték. Az 1. és 2. szintű gyenge szívási szint érzékeny és száraz bőrre alkalmas. Kérjük, a kezelést a legkisebb fejjel kezdje. A közepes szívóerőséget (3. szint) a semleges/normál bőrre, az erős (4. szint) szívási szint zsíros bőrre, és a legerősebb (5. szint) szívószintet nagy pórusú vagy egyes bőrre tervezték.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz alacsony szintű (1) indításához.
Az alacsony szint (2) indításához nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot.
A közepes (3) szint elindításához nyomja meg háromszor a bekapcsológombot.
Az erős (4) szint elindításához nyomja meg négyszer a bekapcsoló gombot.
A legerősebb (5) szint elindításához nyomja meg ötször a bekapcsoló gombot.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg hatszor a bekapcsoló gombot.

Dermabrázió az arcbőr számára

1. Helyezze fel a mikrokristályos fejet, majd használat előtt tisztítsa meg az arcbőrt és szárítsa meg.
2. Induljon el az állkapocstól, és a készüléket lentről felfele mozgassa
3. Helyezze a készüléket az arcára, majd kifelé mozgassa a készüléket az arc mindkét részén.
4. Helyezze a készüléket a homlokára, és a készüléket lentről felfele mozgassa.
5. Helyezze a készüléket a halántékára, és a készüléket lentről felfele mozgassa.

Tisztítsa meg az arcát felesleges olajoktól, kozmetikum maradványoktól és más szennyeződésektől

- 1.) Csatolja fel a nagy vagy kis méretű fejet (bőrtípusától függően).
- 2.) Igazítsa a fejet a kezelendő bőrfelülethez, állandóan mozgassa előre és hátra a készüléket, és ne használja azt túl sokáig egy helyen.



Vigyázzon a finom ráncokra

- 1.) Csatolja fel az ellipszis alakú fejet
- 2.) Helyezze a képet a kezelendő felülethez közel, pl. szem, orr, száj és az arc többi részét, és állítsa be a gépet az igényeinek megfelelően.
- 3.) A kezelendő területet legfeljebb 5 percig masszírozza úgy, hogy folyamatosan felemeli a készüléket az arcától. A folyamatos szívás és kiengedés kellemes, masszírozást biztosít.

Megjegyzés:

- Ne felejtse el mozgatni használat közben, ne hagyja azt túl sokáig egy helyen
- A termék használata előtt 5 perccel gőzölje meg vagy áztassa le a bőrét gőzölővel vagy meleg törölközővel, így teljesen kinyílnak a pórusai, és a készülék is jobban fog működni.

FIGYELEM: Kérjük, ne tartsa a készüléket túl sokáig egy helyen, hiszen az bőrirritációt válhat elő. Ha bőre lila színűvé válik vagy megduzzad, azonnal hagyja abba az eszköz használatát. Kérjük, végezzen hideg kompressziót, majd meleg kompressziót, és forduljon orvoshoz másnap.

HELYES HASZNÁLAT: Soha ne tartsa a készüléket egy helyen - egy ponton maximum 3 másodpercig tartsa azt. Ne használja a készüléket függőlegesen a bőrön. Mindig csúsztassa előre vagy hátra, annak érdekében, hogy elkerülje bőr bevörösödését vagy belilulását.



KARBANTARTÁS

Minden egyes használat után tisztítsa ki és öblítse át a szívó fejet meleg vízzel, majd kint azt a levegőn száradni. A főegységet ne kísérelje meg víz alá meríteni, mert az nem vízálló. A főegységet egyszerűen törölje át egy puha, nedves ruhával.

HASZNOS TANÁCSOK

- A vákuumos pórustisztító használata után használjon hidratálót a területre.
- Használat előtt és után ne használjon arcradírt vagy bármilyen hámlasztót.
- Használat közben ne nyomja le erősen a készüléket, annak szívóképessége önmagában elegendő a pórusok hatékony kitisztásához.

A használat utáni enyhe bőrpír normális és idővel el fog tűnni.

Megjegyzés: Vákuum pórus tisztító hetente egyszer használandó száraz típusú bőrön. Az olajos és vegyes típusú bőrrel rendelkezőknek heti két használat ajánlat. Ne használja tovább a terméket 5 percnél tovább.

HIBAELHÁRÍTÁS:

- Ha a készülék nem működik, győződjön meg róla, hogy a szívó fej megfelelően van behelyezve, vagy ellenőrizze, hogy bármelyik alkatrészt ki kell-e tisztítani
- Ha a készülék lassabban dolgozik vagy szív, tisztítsa ki a szívó fejet és töltsse fel a terméket

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése, illetve az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának előmozdítása érdekében, felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket. Használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki környezetbarát módon tud megszabadulni a terméktől.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.