

VFACE

Elektromos szépeészeti eszköz



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Estéenként akár 5 perc használattal teljesen új szintre emelheti a bőrápolást. Az arcmasszírozóval maximalizálhatja bőrápolási rutinjának hatékonyságát és ragyogóan egészséges arcbőrre tehet szert sokkal gyorsabban.

A CSOMAG TARTALMA:

1 x elektromos szépeészeti
eszköz

1 x használati útmutató
1 x tároló

TERMÉKLEÍRÁS:

Anyag: fém

Szín: arany

Névleges feszültség: DC 1,5 V

Frekvencia: 6000 fordulat/perc

Teljesítmény: 1 db AA elem (nem tartozék)

Vízálló kivitel


Használja homlokán, arcán, nyakán,
kulcsontján, vállán, karján, kézen és lábán.






1. T alakú fej
2. Nyél/elemtartó
3. KI/BE forgatható gomb

ELEM BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

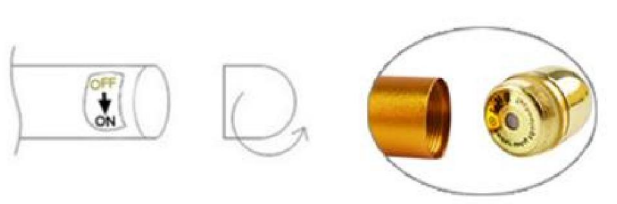


1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a kapcsoló fedelét az eltávolításához.

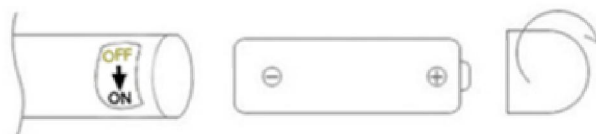

2. Helyezze be az elemet (1 x AA), zárja a kapcsoló fedelét, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva tekerje vissza.

FŐKAPCSOLÓ

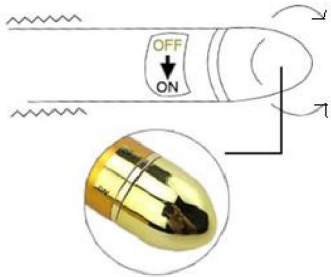

BEKAPCSOLÁS: a bekapcsoláshoz fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba.

KIKAPCSOLÁS: a kikapcsoláshoz fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:



1. Tisztítsa meg az arcát és a nyakát.
2. Vigyen fel bőrápoló vagy hidratáló krémet.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Határozott mozdulatokkal csúsztassa a VFACE T-alakú végét felfelé irányuló mozdulatokkal, az arc belső területeiről a külseje felé.
5. Használja területenként 5 másodpercig.

A kezelés gyakorisága: Minden nap (reggeli és esti kezelés során).

Kezelés ideje: 5-10 perc

Használat és tisztítás után helyezze vissza a VFACE-t a tárolójába.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után törölje át száraz és puha ronggyal és törölje tisztára. Helyezze vissza az eredeti tárolójába.
- Vegye ki belőle az emelet, ha sokáig nem használja.
- Tárolja szobahőmérsékleten, száraz helyen.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.