

# SMILY

Draagbare elektrische Sonic tandheelkundige scaler



## HANDLEIDING

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van ons product.

Van nu af aan kunt u uw tanden en tandvlees gezond in stand houden. Effectief verwijderen van tandplak, tandsteen en vlekken, verwijdert harde tandsteen gemakkelijk waardoor tandvleesaandoeningen worden voorkomen. Deze multifunctionele tandheelkundige scaler maakt gebruik van geavanceerde trillingen om tandsteen van uw tanden te verwijderen en uw tandvlees te masseren, waardoor u elke ochtend een zelfverzekerde glimlach en een frisse adem krijgt!

**Deze handleiding behandelt de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.**

## PAKKET BESTAAT UIT:

- 1 x elektrische Sonic tandheelkundige scaler
- 1 x plaadkabel
- 1 x handleiding



## SPECIFICATIE

Nominale spanning: 3,7 V	Werktijd: ongeveer 2 uur
Batterijcapaciteit: 300 mAh	Versnellingen: 5
Oplaadtijd: Ongeveer 2 uur	Waterdichtheid: IPX6
Adapter: 5 V / 5 mA	Stijl: Opladen (ingebouwde batterij)
Standby-stroom: 20 uA	Voor volwassenen
Nominale stroom: 200 mA	Materiaal: siliconen inlaatkwaliteit + kunststof
Motorgeluid: minder dan 60 decibel	Gebruiksomgeving: normale temperatuur

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Deze scaler is ontworpen voor tandheelkundige doeleinden. Het is ontworpen voor het verwijderen van tandsteen of kalkaanslag op tanden en andere tandheelkundige handelingen waarbij de ultrasone trillingen gunstig zijn. Gebruik het niet voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Neem bij twijfel over uw toepassing contact op met uw plaatselijke dealer of plaats van aankoop.
- Alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden. Het niet naleven van de bedieningsinstructies kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of tot beschadiging van het product, mogelijk onherstelbaar. Zorg ervoor dat u de bedieningsinstructies hebt bestudeerd en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Breng de punt altijd aan op tandoppervlakken bij het scalen. Vermijd onnodig contact van de tip met zachte weefsels, zoals tandvlees, slijmvliezen of huid.
- Controleer voor gebruik op abnormale trillingen van de punt. Als er afwijkingen worden gevonden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Scaler en neem contact op met de dealer.
- Zorg ervoor dat de tip de keramische prothese niet raakt tijdens het scalen. Dit kan de punt beschadigen.
- Gebruik de scaler alleen met de originele voedingsadapter.
- Controleer de spanning voordat u de adapter op een stopcontact aansluit zoals vermeld op het typeplaatje dat overeen komt met het vermogen van uw stopcontact.

- De metalen kop van de tandreiniger is niet vervangbaar.
- Stel de tandreiniger niet bloot aan de buitenomgeving, extreme temperaturen, direct zonlicht, overmatige vochtigheid of extreem stoffige omgevingen.
- Gebruik het bij een binnenomgeving van -10 °C tot 40 °C.
- Was het product niet langdurig en laat het niet weken.
- Dit product is alleen bestemd voor volwassenen. Berg het product na gebruik goed op. Blijf uit de buurt van kinderen om per ongeluk letsel te voorkomen.
- Dit product bevat een batterij. Plaats het niet in een vuur of op hoge temperatuur om brand of explosie te voorkomen.
- Plaats niet in de buurt van verwarmingstoestellen, open vuur of andere apparatuur die een warmtebron is.
- Houd de tandreiniger op voldoende afstand van de ogen.
- Koppel de voedingsadapter niet los van het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Dit kan de stroomadapter of het stopcontact beschadigen. Koppel de stroomadapter los van het stopcontact door aan de stekker te trekken.
- Onderzoek de onderdelen van het apparaat altijd op schade voordat u met de behandeling begint. Beschadigde onderdelen mogen niet worden gebruikt en moeten worden vervangen.
- Plaats het snoer van de stroomadapter niet over scherpe voorwerpen.
- Om een gevaarlijke situatie te voorkomen, mag u de tandreiniger of de bijbehorende accessoires niet zelf repareren of op enigerlei wijze wijzigen. Neem voor alle reparaties contact op met een erkend servicecentrum. Door met het product te knoeien, loopt u het risico uw wettelijke rechten teniet te doen die voortvloeien uit onbevredigende prestaties of kwaliteitsgarantie.
- Gebruik het apparaat niet met een gebroken snoer of stekker, of als het apparaat niet goed functioneert, is gevallen of op een of andere manier beschadigd is.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Elke service of reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
- Het product is niet geschikt voor gebruik in de buurt van brandbare gassen.
- Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.

**Let op: gebruik het product niet tijdens het opladen.**

## ONDERDELEN

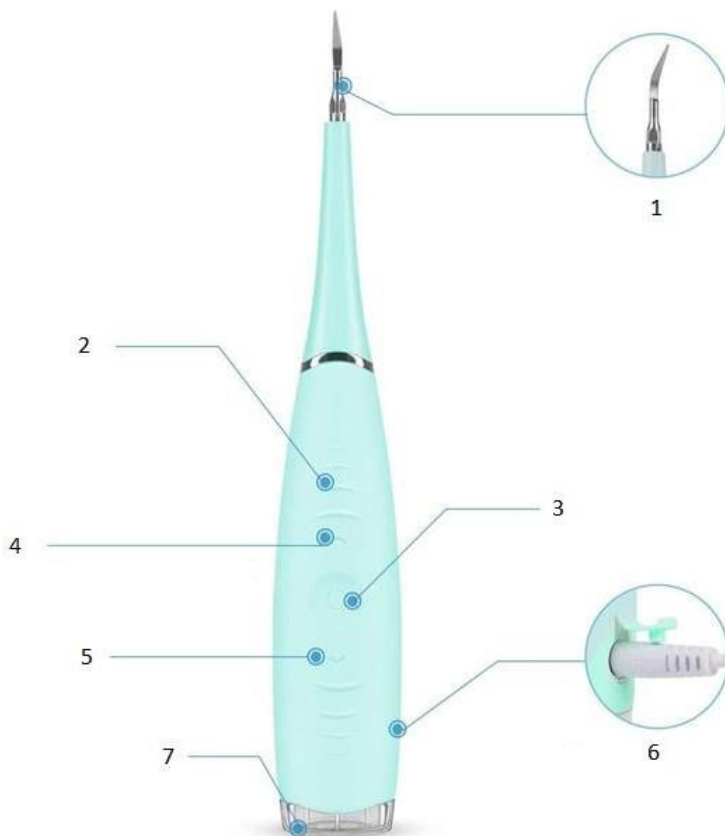

1. Reinigingskop	5. Versnellingsregelaar
2. Antislipstrip	6. Oplaadpoort
3. Aan / uit knop	7. Oplaadindicator
4. Versnelling omhoog (totaal 5 versnellingen instelbaar van boven naar beneden)	

## OPLADEN

### USB oplaadbaar:

Veilig en snel opladen via USB.

1. Steek de oplader in de achterkant van de tandreiniger, sluit hem aan op de stroom om te beginnen met opladen.
2. Het indicatielampje gaat rood branden, wat aangeeft dat het opladen begint. Als het apparaat volledig is opgeladen, wordt het lampje groen.



### OPGELET:

- Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur.
- Na het invoeren van een oplaadmodus, schakelt de tandreiniger uit (apparaat werkt niet tijdens het opladen).
- Nadat het product is opgeladen, kan het ongeveer 200 keer worden gebruikt.

Als u de tandreiniger voor de eerste keer oplaadt of als u deze lange tijd (langer dan 3 maanden) niet hebt gebruikt, kan het volledig opladen meer tijd kosten.

- Koppel de opgeladen tandreiniger los van de stroomadapter en haal de stroomadapter uit het stopcontact. Nadat u de tandreiniger van de voedingsadapter hebt losgekoppeld, gaat de led-oplaadindicator uit.

## Aanbevelingen voor het bereiken van de langst mogelijke levensduur van de batterrij:

- Laad het apparaat op bij kamertemperatuur.
- Laat het apparaat niet langer aangesloten op de stroombron dan nodig is om hem op te laden.
- Bewaar het apparaat idealiter volledig opgeladen.
- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, laad deze dan minimaal eens per 6 maanden op.

## BEDIENINGSINSTRUCTIES




Deze reiniger werkt volgens het principe dat de elektrische energie omzet in de ultrasone trillingsenergie.

Druk op de aan / uit-knop om het apparaat in te schakelen, pas het vermogen aan met de bovenste en onderste instelknoppen en begin met het reinigen van de onderdelen die moeten worden schoongemaakt.




De zijkant van het uiteinde wordt op de tand aangebracht zodat de beweging van de punt evenwijdig is aan het oppervlak van de tand. De eerste 2 mm van de punt zijn het meest efficiënt!

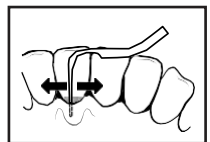

Voor een normale schaalverdeling is zelden meer dan 50% van het vermogen nodig. Het is echter mogelijk dat moeilijk te verwijderen tandsteen een hogere vermogensinstelling nodig heeft.

Zorg ervoor dat het contact tussen de punt en het tandoppervlak behouden blijft tijdens het schalen. Blijf de punt langzaam heen en weer bewegen en laat het instrument het werk doen. Gebruik korte en lange bewegingen, zodat het hele oppervlak van elke tand of kies wordt geschaald.

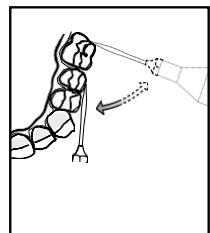

De punt is normaal gesproken gericht op de tandholte.

Om de punt parallel aan het oppervlak van elke tand te laten werken, is het belangrijk om de anatomie van de tand te volgen.



Met de juiste krachtinstelling, de juiste druk tegen de tand (ongeveer 20 gram maar niet meer dan 50) en de punt parallel aan het oppervlak, zal de behandeling zacht, stil en efficiënt zijn.



### AANDACHT!

- Als tijdens de behandeling een piepend geluid te horen is (luid en overheersend), kan de druk op de tand te laag zijn of kan de punt niet parallel aan het tandoppervlak liggen.
- Gebruik niet te veel kracht met de hand. Neem altijd contact op met de tanden met een lichte druk.
- Wees voorzichtig rond de gevoelige tandvleesrand.
- Voor sommige gebruikers is het de eerste keer misschien een beetje moeilijk te gebruiken, maar langzamerhand wordt het een must-have voor mondverzorging!
- Plak en vlekjes is poedervormig. Spoel daarom na gebruik uw mond.
- Gebruik het in aanwezigheid van vocht in de mond.
- Als er tijdens het gebruik vocht verloren gaat, dient u de mond te spoelen.
- Gebruik bij gebruik aan de binnenkant van de tand een tandspiegel.

## Nadat u klaar bent met het poetsen van de tanden:

- Spoel uw mond goed uit.
- Was de metalen kop onder schoon stromend water.
- Maak de tandreiniger schoon.

---

## Instructies voor recycling en verwijdering



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

